

wiroCLEVER FLEX



[de]	Produktdatenblatt PP+PE KITTEL	Seite 2
[en]	Product data sheet PP+PE GOWN	Page 6
[nl]	Productgegevensformulier PP+PE JAS	Zijde 10
[fr]	Fiche produit BLOUSES PP+PE	Page 14
[es]	Hoja de datos del producto BATA DE PP+PE	Página 18
[it]	Scheda prodotto CAMICE IN PP+PE	Pagina 22
[el]	Δελτίο δεδομένων προϊόντος ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΟΔΙΑ PP+PE	Σελίδα 26
[tr]	Ürün Bilgi Formu PP+PE ÖNLÜK	Sayfa 30
[ru]	Техническая спецификация ХАЛАТ ИЗ ПП+ПЭ	Сторона 34
[pl]	Karta produktu KITEL PP+PE	Strona 38
[da]	Produktdatablad PP + PE-KITTEL	Side 42
[sv]	Produktdatablad PP+PE-SKYDDSRÖCK	Sida 46
[no]	Produktdatablad PP+PE-KITTEL	Side 50
[cs]	Informační list výrobku PP+PE PLÁŠŤ	Strana 54
[hu]	Termékadatlap PP+PE LÁTOGATÓI KÖPENY	Oldal: 58
[sk]	Informačný list výrobku PP + PE PLÁŠŤ	Strana 62
[sl]	Podatkovni list izdelka PP+PE HALJA	Stran 66
[ro]	Fișa produsului HALAT PP+PE	Pagina 70
[pt]	Folha de dados do produto BATA PP+PE	Página 74
[lt]	Gaminio duomenų lapas PP+PE DARBINIAI CHALATAI	Puslapis 78
[lv]	Produkta datu lapa PP+PE UZSVĀRČĪ	Lappuse 82
[bg]	Информационен лист за продукта PP+PE ПРЕСТИЛКА	Страница 86
[uk]	Технічний лист ХАЛАТ З ПП+ПЕ	Сторінка 90
[et]	Toote teabeleht PP+PE KITTEL	Lk 94
[fi]	Tuotetietolehti PP + PE -TAKIT	Sivu 98



wiroCLEVER FLEX

PP+PE KITTEL

PE-Beschichtung an Armen & Front | Gummizugbündchen | Bindebänder in Nacken & Taille | 2 Abtrennperforationen (zum Kürzen der Länge)



PREMIUM+









Hersteller	
Firma + Anschrift	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Deutschland
SRN	DE-MF-000004956
Handelsmarke	care & serve®
Bevollmächtigungen	
CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Schweiz
Produktbeschreibung	
Kategorie	PREMIUM+
Produktbezeichnung	care & serve® PREMIUM+ wiroCLEVER FLEX PP+PE Kittel PE-Beschichtung an Armen & Front Gummizugbündchen Bindebänder in Nacken & Taille 2 Abtrennperforationen (zum Kürzen der Länge)
Produkteigenschaften	PE-Beschichtung an Armen & Front Gummizugbündchen Bindebänder in Nacken & Taille 2 Abtrennperforationen (zum Kürzen der Länge)
Material	
Material	Polypropylen-Spinnvlies mit Polyethylen Beschichtung
Materialgewicht	PP: ≈ 20 g/m ² (± 2 g/m ²) PE: ≈ 15 g/m ² (± 2 g/m ²)
Verwendung	
Verwendungszweck	Medizinische Schutzkleidung im Sinne der Technischen Regeln für Biologische Arbeitsstoffe (TRBA 250) zur Vermeidung von Kontamination der Arbeits- oder Privatkleidung bei Eingriffen oder Pflegemaßnahmen durch direkten Kontakt mit Blut, Sekreten, Exkreten oder anderem kontaminiertem Material.
Lebensmittelkontakt	Ein kurzzeitiger indirekter Kontakt mit Lebensmitteln ist zulässig.
Anwendungsbereich	Es erfolgt keine direkte medizinische Anwendung am Patienten. Medizinische Schutzkleidung dient der Abdeckung von Kleidung und/oder Haaren.
Anwendungsgruppe	Mitarbeiter und Besucher von Laboren, der Pharmaindustrie, Krankenhäusern oder ähnlichen Einrichtungen.
Patientengruppe	Medizinische Schutzkleidung sind für alle Patientengruppen geeignet.
Indikation	Medizinische Kleidung als Barriere zum Abdecken der Kleidung und/oder der Haare.
Kontraindikation	Keine bekannten Kontraindikationen.
Verwendungshinweis	Einwegprodukt nicht steril
Einschränkung	Keine PSA (persönliche Schutzausrüstung) Nicht zum Einpacken und Lagern von Lebensmitteln geeignet.
Hinweis	Alle schwerwiegenden Vorfälle im direkten Zusammenhang mit diesem Produkt sind dem Hersteller und den zuständigen Behörden zu melden.
Einsatzgebiete	Krankenhaus Altenheim u.a. Fachkreise Industrie Pharmaindustrie Labor Nahrungsmittelverarbeitung HACCP Reinigung Hygiene







Materialzusatzinfo	latexfrei	
Gesundheitshinweis	<p>Bei Hautreizungen oder allergischen Reaktionen sofort die Verwendung einstellen und ärztlichen Rat einholen.</p> <p>Soweit nach aktuellem Stand der Technik bekannt, enthalten die Produkte keine toxischen, karzinogenen, mutagenen oder reproduktionstoxischen Substanzen, wenn sie gemäß ihrer vorgesehenen Verwendung eingesetzt werden.</p> <p>Diese Produkte enthalten keine Latexbestandteile und gelten als hypoallergen. Sie können jedoch bei empfindlicher Haut Irritationen verursachen. Bei längerem Tragen kann die Belüftung der Haut eingeschränkt werden, was zu Hautreizungen führen kann.</p>	


Standards

CE-Kennzeichnung	Medizinprodukt der Klasse I gemäß (EU) 2017/745		
SRN	DE-MF-000004956		
Basis UDI DI	4051642-wiroCLEVERFLEX-X5		
	<p>CE-Kennzeichnung</p> <p>Die CE Kennzeichnung garantiert den freien Verkehr von Produkten und Waren innerhalb der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Das CE-gekennzeichnete Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen der angegebenen Europäischen Verordnungen.</p>		
VO (EU) 2023/988	Verordnung (EU) Nr. 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit		
VO (EG) 1935/2004	Verordnung über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen		
VO (EU) 10/2011	Verordnung über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen		

Anwendung

Gebrauchsanweisung	<p>Vor dem Gebrauch</p> <p>Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie für Ihre Bedürfnisse und Anwendungsbereiche das passende Produkt ausgewählt haben. Bitte tragen Sie medizinische Schutzkleidung nicht, wenn sie Mängel aufweisen oder bereits benutzt wurden. Medizinische Schutzkleidung ist für einen kurzzeitigen Gebrauch vorgesehen. Im medizinischen Bereich ist die Nutzung auf einen Patienten/eine Patientin begrenzt.</p> <p>Handhabung</p> <p>Diese Kittel werden mit der geschlossenen Seite nach vorne getragen und hinten oder seitlich verschlossen. Schlüpfen Sie mit den Armen in die Ärmel und verschließen Sie die Bindebänder im Nacken und in der Taille.</p> <p>Um beim Ausziehen eine Kontamination mit der Kleidung zu verhindern, wird empfohlen, dass eine zweite Person den Kittel hinten öffnet und ihn nach vorne über die Schultern schiebt. Fassen Sie die oberen Kittelenden und drehen Sie den Kittel beim Ausziehen auf links.</p>		
Sicherheitshinweis	Gemäß unserer Risikoanalyse nach EN ISO 14971:2019 + A11:2021 sind für dieses Produkt keine zusätzlichen Sicherheitshinweise erforderlich.		
Entsorgung	Unbenutzte und nicht kontaminierte Produkte können umweltgerecht verbrannt oder auf Deponien entsorgt werden. Kontaminierte Produkte müssen, gemäß der geltenden nationalen Gesetze und Vorschriften je Kontaminationsart, entsorgt werden.		
Haltbarkeit	5 Jahre ab Produktionsdatum, sofern unbenutzt und bei korrekter Lagerung.		
Lagerung	<p>Vor Sonneneinstrahlung schützen.</p> <p>Trocken lagern.</p> <p>Unsachgemäße Lagerung kann zur Reduktion der Haltbarkeit führen.</p>		
Rückverfolgbarkeit	Chargenbezogene Rückverfolgbarkeit von der Bedarfsermittlung bis zum Lagerabgang. Produktdatenblatt Version 2 gültig ab Charge 2617 +		

Verpackung

Recycling	Lizenziert gemäß VerpackG, Lizenznummer DE1618662887322. Bitte führen Sie die Verpackung dem Recycling zu.	
-----------	---	---





www.wiros.de

WEB <https://www.wiros.de/shop/kittel/pppe-kittel/wiroclever-flex/>

Variante 1

Verkaufseinheit	100 Stück/Karton				
Verpackungsebene 1	10 Stück/Polybeutel				
Mindestbestellmenge	1 Karton				
Artikelnummern	Artikelnummer	Farbe	Größe	Größe (U x L)	Toleranz
	25304502	weiß+blau	M	≈ 120 x 104/119/134/149 cm ± 3 cm	
	25304503	weiß+blau	L	≈ 120 x 104/119/134/149 cm ± 3 cm	
GTINs	Artikelnummer	Unit of Use UDI	Verpackungsebene 1 UDI	Verpackungsebene 2 UDI	Karton UDI
	25304502	4051642004815	4051642075532	-----	4051642575537
	25304503	4051642006598	4051642075365	-----	4051642575360

Variante 2

Verkaufseinheit	100 Stück/Karton				
Verpackungsebene 1	10 Stück/Polybeutel				
Mindestbestellmenge	1 Karton				
Artikelnummern	Artikelnummer	Farbe	Größe	Größe (U x L)	Toleranz
	25304504	weiß+blau	XL	≈ 144 x 104/119/134/149 cm ± 3 cm	
	25304505	weiß+blau	XXL	≈ 168 x 104/119/134/149 cm ± 3 cm	
GTINs	Artikelnummer	Unit of Use UDI	Verpackungsebene 1 UDI	Verpackungsebene 2 UDI	Karton UDI
	25304504	4051642004808	4051642075303	-----	4051642575308
	25304505	4051642004792	4051642075310	-----	4051642575315

Die Zahlenangaben zu Maßen, Gewichten, Stärken und Toleranzen sind als Sollwerte zu verstehen und können abweichen.

Die Angaben stützen sich auf den aktuellen Stand unserer Kenntnisse. Sie sind keine garantierte Zusicherung von Produkteigenschaften und begründen kein vertragliches Rechtsverständnis. Angaben, die älter als 2 Jahre sind, bitte erneut bestätigen lassen. Eingabefehler und Irrtümer vorbehalten.

Die zur Verfügung gestellten Produktdatenblätter sind Eigentum der WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Die WIROS Wilfried Rosbach GmbH ist Inhaberin aller Urheber-/Nutzungs- und Verwertungsrechte der Produktdatenblätter. Es ist nicht gestattet die Produktdatenblätter zu ändern oder die Piktogramme zu nutzen. Die zur Verfügung gestellten Produktdatenblätter dürfen nur im Zusammenhang mit Original-WIROS-Produkten zu Grunde gelegt werden.






wiroCLEVER FLEX

PP+PE GOWN

PE coating on arms & front | Elasticated cuffs | Neck & waist ties | 2 cut-off perforations (for shortening the length)



PREMIUM+

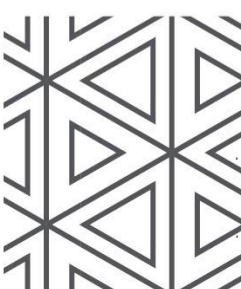

Product data sheet

wiroCLEVER FLEX



Manufacturer

Company + Address	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Germany
SRN	DE-MF-000004956
Trademark	care & serve®

Authorisation

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Switzerland
--------	--

Product description

Category	PREMIUM+
Product description	care & serve® PREMIUM+ wiroCLEVER FLEX PP+PE gown PE coating on arms & front Elasticated cuffs Neck & waist ties 2 cut-off perforations (for shortening the length)
Product features	PE coating on arms & front Elasticated cuffs Neck & waist ties 2 cut-off perforations (for shortening the length)

Material

Material	Polypropylene spun-bonded fabric with polyethylene coating
Material weight	PP: $\approx 20 \text{ g/m}^2 (\pm 2 \text{ g/m}^2)$

Application


Intended use	Medical protective clothing as defined in the Technical Rules for Biological Agents (TRBA 250) to prevent contamination of work or normal clothes during interventions or care measures resulting from direct contact with blood, secretions, excretions or other contaminated material.
Contact with food produce	Short-term indirect contact with foodstuffs is permitted.
Scope of application	There is no direct medical application on the patient. Medical protective clothing is intended to cover clothing and/or hair.
Application group	Employees and visitors from laboratories, the pharmaceutical industry, hospitals or similar institutions.
Patient group	Medical protective clothing is suitable for all patient groups.
Indication	Medical clothing as a barrier to cover clothing and/or hair.
Contraindication	No known contraindications.
Notes on use	Disposable product Not sterile
Limitation	No PPE (personal protective equipment) Not suitable for packing or storing food.
Note	All serious incidents directly related to this product must be reported to the manufacturer and the competent authorities.
Application areas	Hospital Old people's home inc. specialist circles Industry Pharmaceutical industry Laboratory Food processing HACCP Cleaning Hygiene



Product data sheet

wiroCLEVER FLEX





Supplementary material info	Latex-free	
Health advice	If skin irritation or allergic reactions occur, discontinue use immediately and seek medical advice. As far as is known according to the current state of the art, the products do not contain any toxic, carcinogenic, mutagenic or reproductively toxic substances when used in accordance with their intended use. These products do not contain latex components and are considered hypoallergenic. However, they can cause irritation in sensitive skin. Long-term wear may restrict skin ventilation, which can cause skin irritation.	


Standards

CE marking	Class I medical device in accordance with EU 2017/745	 
SRN	DE-MF-000004956	
Basis UDI DI	4051642-wiroCLEVERFLEX-X5	
	CE marking The CE mark guarantees the free movement of products and goods within the European Economic Community. All products with the CE mark comply with the essential requirements of the European regulations specified.	
VO (EU) 2023/988	Regulation (EU) No 2023/988 on general product safety	
VO (EG) 1935/2004	Regulation regarding plastic materials and articles intended to come into contact with food.	
VO (EU) 10/2011	Regulation on plastic materials and articles intended to come into contact with food	

Use

Instructions for use	Before use Please make sure that you have selected the right product for your needs and areas of use. Please do not wear medical protective clothing if it is faulty or has already been used. Medical protective clothing is intended for short-term use and use is limited to one patient in the medical field. Use Gowns are worn with the closed side at the front and are fastened at the back or side. To do this, slide your arms into the sleeves and fasten the ties on your neck and waist. In order to prevent contamination with clothing when taking the gown off, it is recommended for a second person to untie the gown from behind and slide it forwards over your shoulders. The person wearing the gown grasps the upper ends of the gown and turns it inside out when removing it.	
Safety notice	According to our risk analysis under EN ISO 14971:2019 + A11:2021, no additional safety instructions are required for this product.	
Disposal	Unused and uncontaminated products can be incinerated in an environmentally friendly manner or disposed of at a waste disposal site. Contaminated products must be disposed of in accordance with the national laws and regulations valid for the respective type of contamination.	
Shelf life	5 years from the production date, if unused and stored correctly.	
Storage	Keep out of direct sunlight. Store in a dry place. Incorrect storage can lead to a reduction in the shelf life.	 
Traceability	Batch-related traceability from the determination of requirements to issuing. Product data sheet Version 2 Valid from Batch 2617 +	

Packaging

Recycling	Licensed in accordance with VerpackG (German Packaging Act), Licence number DE1618662887322. Please recycle the packaging.	
-----------	---	---

www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/kittel/pppe-kittel/wiroclever-flex/
-----	---





Variant 1

Sales unit	100 Unit/Cardboard box				
Packaging level 1	10 Unit/Polybag				
Minimum order quantity	1 Cardboard box				
Item numbers	Item number	Colour	Size	Size (circumference x length)	Tolerance
	25304502	white+blue	M	≈ 120 x 104/119/134/149 cm ± 3 cm	
	25304503	white+blue	L	≈ 120 x 104/119/134/149 cm ± 3 cm	
GTINs	Item number	Unit of Use UDI	Packaging level 1 UDI	Packaging level 2 UDI	Cardboard box UDI
	25304502	4051642004815	4051642075532	-----	4051642575537
	25304503	4051642006598	4051642075365	-----	4051642575360

Variant 2

Sales unit	100 Unit/Cardboard box				
Packaging level 1	10 Unit/Polybag				
Minimum order quantity	1 Cardboard box				
Item numbers	Item number	Colour	Size	Size (circumference x length)	Tolerance
	25304504	white+blue	XL	≈ 144 x 104/119/134/149 cm ± 3 cm	
	25304505	white+blue	XXL	≈ 168 x 104/119/134/149 cm ± 3 cm	
GTINs	Item number	Unit of Use UDI	Packaging level 1 UDI	Packaging level 2 UDI	Cardboard box UDI
	25304504	4051642004808	4051642075303	-----	4051642575308
	25304505	4051642004792	4051642075310	-----	4051642575315

The numerical data for the measurements, weights, thicknesses and tolerances are target values, and there may be some deviation.

The information represents the current state of our knowledge. It offers no guarantee of the product characteristics and does not form the basis of a contractual legal understanding. Please reconfirm any information that is older than 2 years. Typographical and other errors excepted.

The product data sheets provided are the property of WIROS Wilfried Rosbach GmbH. WIROS Wilfried Rosbach GmbH is the owner of all copyrights and rights of use and exploitation for the product data sheets. It is not permitted to change the product data sheets or to use the pictograms. The product data sheets provided may only be used in conjunction with original WIROS products.





wiroCLEVER FLEX

PP+PE JAS

PE coating op armen & voorkant | Elastisch boorden | Strikbanden bij hals & taille | 2 scheurperforaties (voor het inkorten)



PREMIUM+



Productgegevensformulier

wiroCLEVER FLEX



Fabrikant

Firma + Adres	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Deutschland
SRN	DE-MF-000004956
Handelsmerk	care & serve®

Autorisaties

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Zwitserland
--------	--

Productbeschrijving


Categorie	PREMIUM+
Productomschrijving	care & serve® PREMIUM+ wiroCLEVER FLEX PP+PE jas PE coating op armen & voorkant Elastisch boorden Strikbanden bij hals & taille 2 scheurperforaties (voor het inkorten)
Producteigenschappen	PE coating op armen & voorkant Elastisch boorden Strikbanden bij hals & taille 2 scheurperforaties (voor het inkorten)

Materiaal

Materiaal	Polypropyleen spinvlies met polyethyleencoating
Materiaalgewicht	PP: ≈ 20 g/m ² (± 2 g/m ²)

Gebruik

Toepassing	Medische beschermende kleding zoals bedoeld in de Technische vereisten voor biologische agentia (TRBA 250) ter voorkoming van contaminatie van werk- of privékleiding bij ingrepen of verpleging door direct contact met bloed, secretie, excretie of ander gecontamineerd materiaal.
Voedselcontact	Kort indirect contact met voedingsmiddelen is toegestaan.
Toepassingsgebied	Tijdens medische behandelingen komt de patiënt niet direct in aanraking met medische beschermende kleding. Medische beschermende kleding is bedoeld voor het afdekken van kleding en/of haren.
Doelgroep	Medewerkers en bezoekers van laboratoria, de farmaceutische industrie, ziekenhuizen en vergelijkbare instellingen.
patiëntengroep	Medische beschermende kleding is geschikt voor alle patiëntengroepen.
indicatie	Medische kleding als barrière voor het afdekken van kleding en/of haren.
contra-indicatie	Geen bekende contra-indicaties.
Gebruiksaanwijzingen	Wegwerpproduct niet steriel
Voorbehoud/bepaling	Geen PSA (persoonlijk beschermingsmiddel) Niet geschikt voor het verpakken en opslaan van levensmiddelen.
Aanwijzing	Alle ernstige incidenten in direct verband met dit product moeten worden gemeld aan de fabrikant en de verantwoordelijke autoriteiten.
Toepassingsgebieden	ziekenhuis verzorgingshuis o.a. specialisten Industrie farmaceutische industrie Laboratorium Voedingsmiddelverwerking HACCP Schoonmaken hygiëne

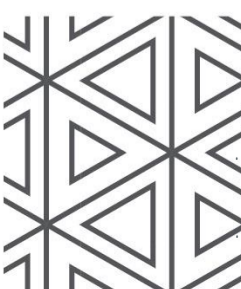

Productgegevensformulier

wiroCLEVER FLEX



Extra materiaal informatie latexvrij



Gezondheidsinformatie

Bij huidirritatie of allergische reacties het gebruik onmiddellijk staken en een arts raadplegen.

Voor zover bekend volgens de huidige stand van de techniek, bevatten de producten geen giftige, kankerverwekkende, mutagene of voor de reproductie giftige stoffen als ze worden gebruikt overeenkomstig hun beoogde doel.

Deze producten bevatten geen latex bestanddelen en worden beschouwd als hypoallergeen. Ze kunnen echter irritatie veroorzaken op een gevoelige huid. Langdurig dragen kan de ventilatie van de huid beperken, wat kan leiden tot huidirritatie.

Standards

CE-markering

Geneeskundig product dat behoort tot klasse I overeenkomstig EU 2017/745



SRN

DE-MF-000004956

Basis UDI DI

4051642-wiroCLEVERFLEX-X5

CE-markering

De CE-markering garandeert het vrije verkeer van producten en goederen binnen de Europese

Economische Gemeenschap. Het CE-gemarkeerde product voldoet aan de elementaire eisen van de vermelde Europese verordeningen.

VO (EU) 2023/988

Verordening (EU) Nr. 2023/988 inzake algemene productveiligheid

VO (EG) 1935/2004

Verordening voor materialen en kunststof voorwerpen die bestemd zijn voor contact met levensmiddelen.



VO (EU) 10/2011

Verordening over materialen en voorwerpen van kunststof die bedoeld zijn om met levensmiddelen in aanraking te komen

Gebruik

Gebruiksaanwijzing

Vóór gebruik

Zorg ervoor dat u het juiste product heeft gekozen, passend bij uw wensen en het beoogde gebruik. Draag medische beschermende kleding niet als deze kapot is of al eerder gebruikt is. Medische beschermende kleding is bedoeld voor kortdurend gebruik, in een medische situatie mag de kleding alleen worden gebruikt bij één patiënt.

Gebruik

Schorten worden met de gesloten kant naar voren gedragen en aan de achter- of zijkant dichtgemaakt. Steek uw armen door de mouwen en strik de koorden in uw hals en in de taille vast.

Om bij het uittrekken een contaminatie met de kleding te voorkomen, wordt geadviseerd dat een tweede persoon de schort aan de achterkant opent en naar voren over de schouders schuift. De drager pakt de bovenste uiteinden van de schort vast en keert de schort bij het uittrekken binnenstebuiten.

Veiligheidsvoorschriften

Volgens onze risicoanalyse in overeenstemming met EN ISO 14971:2019 + A11:2021 zijn er geen aanvullende veiligheidsvoorschriften vereist voor dit product.

Verwijdering

Ongebruikte en niet besmette producten kunnen milieuvriendelijk worden verbrand of op vuilstortplaatsen worden verwerkt. Besmette producten moeten volgens de geldende nationale wetten en voorschriften, naargelang de besmettingsaard, worden vernietigd.

Houdbaarheid

5 jaren na productiedatum, voor zover ongebruikt en bij correcte opslag.

Opslag

Beschermen tegen direct zonlicht

Droog bewaren

Onjuiste opslag kan leiden tot een kortere houdbaarheid.



Traceerbaarheid

Traceerbaarheid van de charges, vanaf het onderzoek naar de behoeften tot aan de levering

Productgegevensformulier Versie 2 geldig vanaf charge 2617 +

Verpakking

Recycling

Licentie verleend volgens VerpackG, licentienummer DE1618662887322.

Recycle de verpakking.



Productgegevensformulier

wiroCLEVER FLEX



www.wiros.de

WEB <https://www.wiros.de/shop/kittel/pppe-kittel/wiroclever-flex/>

Variant 1

Verkoopenheid 100 Stuks/Doos

Verpakkingslaag 1 10 Stuks/Polyethyleen zak

Minimum bestelhoeveelheid 1 Doos

Artikelnummers	Artikelnummer	Kleur	Maat	Maat (omvang x lengte)	Tolerantie
	25304502	wit+blauw	M	≈ 120 x 104/119/134/149 cm ± 3 cm	
	25304503	wit+blauw	L	≈ 120 x 104/119/134/149 cm ± 3 cm	

GTINs	Artikelnummer	Unit of Use UDI	Verpakkingsniveau 1 UDI	Verpakkingsniveau 2 UDI	Doos UDI
	25304502	4051642004815	4051642075532	-----	4051642575537
	25304503	4051642006598	4051642075365	-----	4051642575360

Variant 2

Verkoopenheid 100 Stuks/Doos

Verpakkingslaag 1 10 Stuks/Polyethyleen zak

Minimum bestelhoeveelheid 1 Doos


Artikelnummers	Artikelnummer	Kleur	Maat	Maat (omvang x lengte)	Tolerantie
	25304504	wit+blauw	XL	≈ 144 x 104/119/134/149 cm ± 3 cm	
	25304505	wit+blauw	XXL	≈ 168 x 104/119/134/149 cm ± 3 cm	

GTINs	Artikelnummer	Unit of Use UDI	Verpakkingsniveau 1 UDI	Verpakkingsniveau 2 UDI	Doos UDI
	25304504	4051642004808	4051642075303	-----	4051642575308
	25304505	4051642004792	4051642075310	-----	4051642575315

De cijfers aangaande maten, gewichten, sterkte en toleranties dienen als normen te worden begrepen en kunnen afwijken.

Deze gegevens zijn gebaseerd op onze actuele kennis. Ze zijn geen gegarandeerde toezegging van producteigenschappen en zijn niet gebaseerd op een wettelijke overeenkomst. Informatie die ouder is dan 2 jaar dient opnieuw bevestigd te worden. Invoerbouten en vergissingen voorbehouden.

De ter beschikking gestelde productinformatiebladen zijn eigendom van WIROS Wilfried Rosbach GmbH. WIROS Wilfried Rosbach GmbH is houder van alle auteurs-/gebruiks- en exploitatierechten van de productinformatiebladen. Het is niet toegestaan de productinformatiebladen te wijzigen of de pictogrammen te gebruiken. De ter beschikking gestelde productinformatiebladen mogen alleen gebruikt worden in combinatie met originele WIROS-producten.

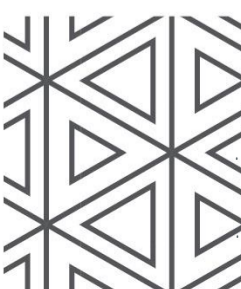

wiroCLEVER FLEX

BLOUSES PP+PE

Revêtement PE aux bras et sur le devant | Poignets élastiques | Liens à nouer au cou et à la taille | 2 Perforations de découpe (pour raccourcir la longueur)



PREMIUM+



Fiche produit

wiroCLEVER FLEX



Fabricant

Société + Adresse	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Allemagne
SRN	DE-MF-000004956
Marque commerciale	care & serve®

Procurations

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Suisse
--------	---

Description du produit

Catégorie	PREMIUM+
Désignation du produit	care & serve® PREMIUM+ wiroCLEVER FLEX Blouses PP+PE Revêtement PE aux bras et sur le devant Poignets élastiques Liens à nouer au cou et à la taille 2 Perforations de découpe (pour raccourcir la longueur)
Caractéristiques du produit	Revêtement PE aux bras et sur le devant Poignets élastiques Liens à nouer au cou et à la taille 2 perforations de découpe (pour raccourcir la longueur)

Matériau

Matériau	Polypropylène non-tissé revêtu de polyéthylène
Poids des matériaux	PP : $\approx 20 \text{ g/m}^2$ ($\pm 2 \text{ g/m}^2$)

Utilisation

Usage prévu	Vêtements de protection médicale conformes aux exigences techniques relatives aux agents biologiques (TRBA 250) pour éviter la contamination des vêtements professionnels ou privés lors d'interventions ou de traitements par contact direct avec du sang, des sécrétions, des excréments ou d'autres matières contaminées.
Contact avec les aliments	Un contact indirect de courte durée avec les aliments est autorisé.
Champ d'application	Il n'y a pas d'application médicale directe pour le patient. Les vêtements de protection médicaux servent à couvrir les vêtements et/ou les cheveux.
Groupe d'application	Employés et visiteurs de laboratoires, de l'industrie pharmaceutique, d'hôpitaux ou d'établissements similaires.
Groupe de patients	Les vêtements de protection médicaux conviennent à tous les groupes de patients.
Indication	Vêtements médicaux en tant que barrière pour couvrir les vêtements et / ou les cheveux.
Contre-indication	Aucune contre-indication connue.
Remarque d'utilisation	Produit à usage unique Non stérile
limitation	Pas d'EPI (équipement de protection individuelle) Déconseillé pour l'emballage et le stockage d'aliments
Remarque	Tous les incidents graves directement liés à ce produit doivent être signalés au fabricant et aux autorités compétentes.
Domaines d'utilisation	Hôpital maison de retraite autres groupes spécialisés Industrie Industrie pharmaceutique Laboratoires Traitement des aliments HACCP Nettoyage Hygiène



Fiche produit

wiroCLEVER FLEX



Infos supplémentaires sur les matériaux sans latex



Conseils en matière de santé : En cas d'irritation cutanée ou de réaction allergique, cesser immédiatement l'utilisation et demander conseil à un médecin. Dans la mesure où l'état actuel de la technique le permet, les produits ne contiennent aucune substance toxique, cancérigène, mutagène ou nocive pour la reproduction lorsqu'ils sont utilisés conformément à leur usage prévu. Ces produits ne contiennent pas de composants en latex et sont considérés comme hypoallergéniques. Ils peuvent toutefois provoquer des irritations sur les peaux sensibles. Un port prolongé peut limiter l'aération de la peau, ce qui peut entraîner des irritations cutanées.

standards

Marquage CE Dispositif médical de classe 1 selon la norme EU 2017/745



SRN DE-MF-000004956

Basis UDI DI 4051642-wiroCLEVERFLEX-X5

Marquage CE

Le marquage CE garantit la libre circulation des produits et des marchandises au sein de la Communauté économique européenne. Le produit marqué CE est conforme aux exigences essentielles des directives européennes spécifiées.

VO (EU) 2023/988 Règlement (UE) n° 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits

VO (EG) 1935/2004 Ordonnance relative aux matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des produits alimentaires.



VO (EU) 10/2011 Ordonnance sur les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires

Utilisation

Mode d'emploi Avant utilisation
Veuillez vous assurer d'avoir choisi le produit adapté à vos besoins et domaines d'utilisation. Veuillez ne pas porter de vêtements de protection à usage médical s'ils présentent des défauts ou ont déjà été utilisés. Les vêtements de protection à usage médical sont destinés à une utilisation de courte durée ; en milieu médical, l'utilisation est limitée à un seul patient.

Maniement

Les blouses sont portées côté fermé vers l'avant et se ferment à l'arrière ou sur le côté. Pour ce faire, glisser les bras dans les manches et nouer les rubans d'attache au niveau du cou et de la taille.

Pour éviter toute contamination en retirant la blouse, il est recommandé qu'une deuxième personne l'ouvre dans le dos et la fasse glisser vers l'avant, par-dessus les épaules. Celui qui porte la blouse la saisit par le haut en la retournant pour la retirer.

Consigne de sécurité Selon notre analyse des risques selon EN ISO 14971:2019 + A11:2021, aucune consigne de sécurité supplémentaire n'est requise pour ce produit.

Élimination Les produits non utilisés et non contaminés peuvent être incinérés dans le respect de l'environnement ou mis en décharge. Les produits contaminés doivent être éliminés conformément aux lois et réglementations nationales en vigueur pour chaque type de contamination.

Durabilité 5 années à compter de la date de production, si non utilisé et stocké correctement.

Stockage Protéger du rayonnement solaire.
Stocker à sec.
Un stockage inapproprié peut réduire la durabilité.



Traçabilité Traçabilité relative aux lots, de l'évaluation des besoins à la sortie du stock.
Fiche produit Version 2 valable à partir du lot 2617 +

Emballage

Recyclage Licencié selon VerpackG, numéro de licence DE1618662887322.
Veuillez procéder au recyclage de l'emballage.





www.wiros.de

WEB <https://www.wiros.de/shop/kittel/pppe-kittel/wiroclever-flex/>

Variante 1

Unité de vente 100 pièce/Carton

Niveau d'emballage 1 10 pièce/Sachet poly

Quantité minimale commandée 1 Carton

Numéros d'articles	Numéro d'article	Couleur	Taille	Dimension (V x L)	Tolérance
	25304502	blanc+bleu	M	≈ 120 x 104/119/134/149 cm ± 3 cm	
	25304503	blanc+bleu	L	≈ 120 x 104/119/134/149 cm ± 3 cm	

GTINs	Numéro d'article	Unit of Use UDI	Niveau d'emballage 1 UDI	Niveau d'emballage 2 UDI	Carton UDI
	25304502	4051642004815	4051642075532	-----	4051642575537
	25304503	4051642006598	4051642075365	-----	4051642575360

Variante 2

Unité de vente 100 pièce/Carton

Niveau d'emballage 1 10 pièce/Sachet poly

Quantité minimale commandée 1 Carton

Numéros d'articles	Numéro d'article	Couleur	Taille	Dimension (V x L)	Tolérance
	25304504	blanc+bleu	XL	≈ 144 x 104/119/134/149 cm ± 3 cm	
	25304505	blanc+bleu	XXL	≈ 168 x 104/119/134/149 cm ± 3 cm	

GTINs	Numéro d'article	Unit of Use UDI	Niveau d'emballage 1 UDI	Niveau d'emballage 2 UDI	Carton UDI
	25304504	4051642004808	4051642075303	-----	4051642575308
	25304505	4051642004792	4051642075310	-----	4051642575315

Les valeurs de dimensions, poids, épaisseurs et tolérances doivent être considérées comme des valeurs nominales et peuvent différer.

Les informations sont basées sur l'état actuel de nos connaissances. Elles ne garantissent pas les propriétés des produits et ne constituent pas une interprétation contractuelle de la loi. Veuillez faire confirmer les données de plus de 2 ans.

Sous réserve d'erreurs et d'omissions.

Les fiches de données de produits mises à disposition appartiennent à l'entreprise WIROS Wilfried Rosbach GmbH. L'entreprise WIROS Wilfried Rosbach GmbH détient tous les droits d'auteur, d'utilisation et de reproduction des fiches de données produits. Il est interdit de modifier les fiches de données produits ou d'utiliser les pictogrammes. Il ne faut pas faire référence aux fiches de données de produits mises à disposition sans les produits WIROS d'origine.




wiroCLEVER FLEX

BATA DE PP+PE

Revestimiento de PE en brazos y parte frontal | Puños elásticos | Cintas para atar en cuello y cintura | 2 perforaciones de separación (para acortar la longitud)



PREMIUM+

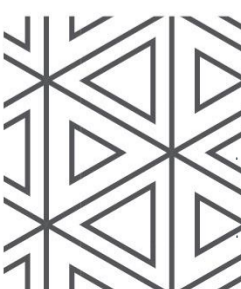

Hoja de datos del producto

wiroCLEVER FLEX



Fabricante

Empresa + Dirección	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Alemania
SRN	DE-MF-000004956
Marca registrada	care & serve®

Autorizaciones

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Suiza
--------	--

Descripción del producto


Categoría	PREMIUM+
Denominación del producto	care & serve® PREMIUM+ wiroCLEVER FLEX Bata de PP+PE Revestimiento de PE en brazos y parte frontal Puños elásticos Cintas para atar en cuello y cintura 2 perforaciones de separación (para acortar la longitud)
Características del producto	revestimiento de PE en brazos y parte frontal Puños elásticos Cintas para atar en cuello y cintura 2 perforaciones de separación (para acortar la longitud)

Material

Material	Tela no tejida de polipropileno con revestimiento de polietileno
Peso del material	PP: $\approx 20 \text{ g/m}^2$ ($\pm 2 \text{ g/m}^2$)

Uso

Finalidad	Ropa de protección sanitaria conforme a las Normas Técnicas para Agentes Biológicos (TRBA 250) para evitar la contaminación de ropa laboral o particular en caso de intervenciones o medidas de cuidado debida al contacto directo con sangre, secreciones, excreciones y otras sustancias contaminadas.
Contacto con alimentos	Se admite un contacto indirecto a corto plazo con alimentos.
Campo de aplicación	Sin aplicación médica directa en pacientes. La ropa de protección sanitaria sirve para cubrir prendas y/o cabello.
Grupo de aplicaciones	Empleados y visitantes de laboratorios, de la industria farmacéutica, hospitales o instituciones similares.
Grupo de pacientes	La ropa de protección sanitaria es apropiada para todos los grupos de pacientes.
Indicación	Ropa sanitaria con función de barrera para cubrir prendas y/o cabello.
Contraindicación	Sin contraindicaciones conocidas.
Información de uso	Producto desechable sin esterilizar
Limitación	No es un EPI (equipo de protección individual) No es apto para empaquetar y almacenar alimentos.
Nota	Todos los incidentes graves relacionados directamente con este producto deben informarse al fabricante y a las autoridades responsables.
Campos de aplicación	Hospital Residencia de ancianos Otros grupos especialistas Industria Industria farmacéutica Laboratorio Procesamiento de alimentos HACCP Limpieza Higiene

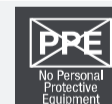

Hoja de datos del producto

wiroCLEVER FLEX



Información adicional sobre el material sin látex



Mensaje de carácter sanitario En caso de irritación cutánea o reacciones alérgicas, interrumpir inmediatamente el uso y consultar a un médico. Por lo que se sabe según el estado actual de la técnica, los productos no contienen sustancias tóxicas, cancerígenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción si se utilizan de acuerdo con su finalidad prevista. Estos productos no contienen componentes de látex y se consideran hipoalergénicos. No obstante, pueden causar irritaciones en pieles sensibles. El uso prolongado puede restringir la ventilación de la piel, lo que puede provocar irritaciones cutáneas.

Normas

Marcado CE Producto sanitario de clase I según UE 2017/745



SRN DE-MF-000004956

Basis UDI DI 4051642-wiroCLEVERFLEX-X5

Marcado CE

El marcado CE garantiza la libre circulación de productos y mercancías en la Comunidad Económica Europea. El producto con marcado CE cumple con los requisitos esenciales de la normativa europea especificada.

VO (EU) 2023/988 Reglamento (UE) n.º 2023/988 relativo a la seguridad general de los productos

VO (EG) 1935/2004 Reglamento relativo a materiales y objetos de plástico destinados a entrar en contacto con los alimentos.



VO (EU) 10/2011 Reglamento sobre materiales y objetos de plástico destinados a entrar en contacto con alimentos

Uso

Instrucciones de uso Antes de utilizar Asegúrese de que ha escogido el producto adecuado para sus necesidades y aplicaciones. No use la ropa de protección quirúrgica si presenta algún defecto o si ya se ha utilizado. La ropa de protección quirúrgica está prevista para utilizarse durante poco tiempo y, en el ámbito sanitario, su uso se limita a un solo paciente.

Manipulación

Las batas se llevan con la parte cerrada hacia delante y abiertas por detrás o por el lateral. Para ponérsela, pasar los brazos por las mangas y atar las cintas al cuello y a la cintura.

Para evitar contaminar la ropa al quitárselas, se recomienda que sea otra persona quien abra la bata por detrás y la deslice hacia delante sobre los hombros. La persona que lleva la bata deberá coger la bata por la parte superior y ponerla del revés al quitársela.

Indicación de seguridad Según nuestro análisis de riesgos conforme a la norma EN ISO 14971:2019 + A11:2021, no se requieren instrucciones de seguridad adicionales para este producto.

Eliminación Los productos no utilizados y no contaminados pueden incinerarse de forma respetuosa con el medio ambiente o eliminarse en vertederos. Los productos contaminados deben eliminarse de acuerdo con las leyes y reglamentos nacionales aplicables a cada tipo de contaminación.

Durabilidad 5 años a partir de la fecha de producción, si no se utiliza y además se almacena correctamente.

Almacenamiento Proteger de la radiación solar.

Almacenar siempre secos.

La vida útil podría reducirse en caso de un almacenamiento inadecuado.



Trazabilidad Trazabilidad de lotes desde que se evalúan las necesidades hasta la salida de la mercancía.

Hoja de datos del producto Versión 2 válido a partir de lote 2617 +

Embalaje

Reciclaje Licencia según VerpackG, número de licencia DE1618662887322.

Rogamos que recicle el embalaje.



Hoja de datos del producto

wiroCLEVER FLEX



www.wiros.de

WEB <https://www.wiros.de/shop/kittel/pppe-kittel/wiroclever-flex/>

Variante 1

Unidad de venta 100 Unidad/Cartón

Nivel de embalaje 1 10 Unidad/Bolsa de polietileno

Cantidad mínima de pedido 1 Cartón

Números de artículo	Número de artículo	Color	Tamaño	Talla (perímetro x largo)	Tolerancia
	25304502	blanco+azul	M	≈ 120 x 104/119/134/149 cm ± 3 cm	
25304503	blanco+azul	L	≈ 120 x 104/119/134/149 cm ± 3 cm		

GTINs	Número de artículo	Unit of Use UDI	Nivel de embalaje 1 UDI	Nivel de embalaje 2 UDI	Cartón UDI
	25304502	4051642004815	4051642075532	-----	4051642575537
25304503	4051642006598	4051642075365	-----	4051642575360	

Variante 2

Unidad de venta 100 Unidad/Cartón

Nivel de embalaje 1 10 Unidad/Bolsa de polietileno

Cantidad mínima de pedido 1 Cartón

Números de artículo	Número de artículo	Color	Tamaño	Talla (perímetro x largo)	Tolerancia
	25304504	blanco+azul	XL	≈ 144 x 104/119/134/149 cm ± 3 cm	
25304505	blanco+azul	XXL	≈ 168 x 104/119/134/149 cm ± 3 cm		

GTINs	Número de artículo	Unit of Use UDI	Nivel de embalaje 1 UDI	Nivel de embalaje 2 UDI	Cartón UDI
	25304504	4051642004808	4051642075303	-----	4051642575308
25304505	4051642004792	4051642075310	-----	4051642575315	

Las cifras de dimensiones, pesos, espesores y tolerancias deben entenderse como valores nominales y pueden variar.

La información se basa en nuestros conocimientos actuales. No constituye una garantía de las propiedades del producto y no implica ningún tipo de relación contractual. Vuelva a confirmar los datos que tengan más de 2 años de antigüedad.

Reservado el derecho a errores y omisiones.

Las fichas técnicas de los productos facilitadas son propiedad de WIROS Wilfried Rosbach GmbH. WIROS Wilfried Rosbach GmbH es propietaria de todos los derechos de autor, de uso y explotación de las fichas técnicas de los productos. No está permitido modificar las fichas técnicas de los productos ni utilizar los pictogramas. Las fichas técnicas de los productos que se facilitan solo pueden utilizarse junto con los productos originales de WIROS.



Scheda prodotto

wiroCLEVER FLEX




CAMICE IN PP+PE

Rivestimento PE su braccia e parte anteriore | Polsini elasticizzati | Lacci su collo e vita | 2 aperture (per accorciare la lunghezza)



PREMIUM+

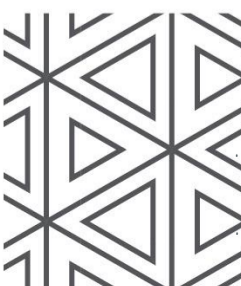

Scheda prodotto

wiroCLEVER FLEX



Produttore

Azienda + Indirizzo	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Germania
SRN	DE-MF-000004956
Marchio commerciale	care & serve®

Autorizzazioni

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Svizzera
--------	---

Descrizione del prodotto


Categoria	PREMIUM+
Descrizione del prodotto	care & serve® PREMIUM+ wiroCLEVER FLEX Camice in PP+PE Rivestimento PE su braccia e parte anteriore Polsini elasticizzati Lacci su collo e vita 2 aperture (per accorciare la lunghezza)
Caratteristiche del prodotto	Rivestimento PE su braccia e parte anteriore Polsini elasticizzati Lacci su collo e vita 2 aperture (per accorciare la lunghezza)

Materiale

Materiale	Spunbond polipropilene con rivestimento in polietilene
Peso del materiale	PP: ≈ 20 g/m ² (± 2 g/m ²)

Utilizzo


Scopo dell'utilizzo	Indumenti di protezione medica ai sensi delle regole tecniche per agenti biologici (TRBA 250) per evitare la contaminazione di indumenti da lavoro o privati durante interventi o azioni di cura attraverso il contatto diretto con sangue, secrezioni, escrementi o altro materiale contaminato.
Contatto con gli alimentari	È consentito un contatto indiretto di breve durata con gli alimenti.
Campo di applicazione	Non c'è un'applicazione medica diretta sul paziente. L'abbigliamento medico protettivo viene utilizzato per coprire i vestiti e/o i capelli.
Gruppo di applicazione	Impiegati e visitatori di laboratori, dell'industria farmaceutica, ospedali o istituzioni simili.
Gruppo di pazienti	L'abbigliamento medico protettivo è adatto a tutti i gruppi di pazienti.
Indicazione	Abbigliamento medico come barriera per coprire i vestiti e/o i capelli.
Controindicazione	Nessuna controindicazione nota.
Istruzioni per l'uso	Prodotto monouso non sterile
Limitazione	Nessun DPI (dispositivi di protezione individuale) Non adatto all'imballaggio e alla conservazione di alimenti.
Nota	Tutti gli incidenti gravi in connessione diretta con questo prodotto devono essere segnalati al produttore e alle autorità responsabili.
Campi di applicazione	Ospedale Casa di riposo Altri gruppi specializzati Industria Industria farmaceutica Laboratorio Trattamento di prodotti alimentari HACCP Pulizia Igiene

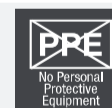




Scheda prodotto

wiroCLEVER FLEX





Informazioni supplementari sul	privo di lattice	
Indicazioni sulla salute	In caso di irritazioni cutanee o reazioni allergiche interrompere immediatamente l'uso e consultare un medico. Per quanto è noto in base allo stato attuale della tecnica, i prodotti non contengono sostanze tossiche, cancerogene, mutagene o tossiche per il sistema riproduttivo se utilizzati in conformità alla loro destinazione d'uso. Questi prodotti non contengono componenti in lattice e sono da considerarsi ipoallergenici. Possono tuttavia causare irritazioni in caso di pelle sensibile. L'uso prolungato può limitare la ventilazione della pelle, con conseguenti irritazioni cutanee.	


Standard

Marchio CE	Dispositivo medico della classe I secondo EU 2017/745		
SRN	DE-MF-000004956		
Basis UDI DI	4051642-wiroCLEVERFLEX-X5		
	Marchio CE La marcatura CE garantisce la libera circolazione dei prodotti e delle merci all'interno della Comunità Economica Europea. Il prodotto con marchio CE è conforme ai requisiti essenziali dei regolamenti europei indicati.		
VO (EU) 2023/988	Regolamento (UE) n. 2023/988 sulla sicurezza generale del prodotto		
VO (EG) 1935/2004	Regolamento sui materiali e sugli oggetti di plastica destinati al contatto con alimenti.		
VO (EU) 10/2011	Regolamento relativo alle materie e agli oggetti in plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari		

Utilizzo

Istruzioni per l'uso	Prima dell'uso Assicuratevi di aver selezionato il prodotto giusto per le vostre esigenze e per gli ambiti di applicazione. Non indossare indumenti di protezione medica se hanno difetti o sono già stati usati. Gli indumenti di protezione medica sono previsti per un utilizzo di breve durata; in ambito clinico il loro uso è limitato a un paziente. Utilizzo I camici sono indossati con il lato chiuso rivolto in avanti e chiuso sul retro o sul lato. Per fare ciò bisogna infilare le braccia nelle maniche e chiudere i lacci al collo e in vita. Per evitare la contaminazione con i vestiti quando ci si spoglia, si raccomanda che una seconda persona apra il camice sul retro e lo faccia scivolare in avanti sulle spalle. Chi lo indossa afferra le estremità superiori del camice e lo gira al contrario quando lo toglie.		
Avvertenza di sicurezza	Secondo la nostra analisi dei rischi in conformità alla norma EN ISO 14971:2019 + A11:2021 per questo prodotto non sono necessarie ulteriori istruzioni di sicurezza.		
Smaltimento	I prodotti non utilizzati e non contaminati possono essere inceneriti in modo ecologico o smaltiti nelle discariche. I prodotti contaminati devono essere smaltiti in conformità alle leggi e ai regolamenti nazionali in vigore per tipo di contaminazione.		
Durata	5 anni dalla data di produzione, se non utilizzati e correttamente conservati.		
Conservazione	Proteggere dalla luce del sole. Conservare all'asciutto. La conservazione impropria può provocare una riduzione della durata.		
Tracciabilità	Tracciabilità del lotto dalla determinazione dei requisiti all'uscita dal magazzino. Scheda prodotto Versione 2 valido da lotto 2617 +		

Confezionamento

Riciclaggio	Licenza in conformità a VerpackG, numero di licenza DE1618662887322. Portare l'imballaggio al riciclaggio.	
-------------	---	---





www.wiros.de

WEB <https://www.wiros.de/shop/kittel/pppe-kittel/wiroclever-flex/>

Variante 1

Unità di vendita 100 Pezzo/Cartone

Livello di imballaggio 1 10 Pezzo/Sacchetto di plastica

Unità minima di ordine 1 Cartone

Numeri articolo	Numero di articolo	Colore	Taglia	Dimensioni (U x L)	Tolleranza
	25304502	bianco+blu	M	≈ 120 x 104/119/134/149 cm ± 3 cm	
25304503	bianco+blu	L	≈ 120 x 104/119/134/149 cm ± 3 cm		

GTINs	Numero di articolo	Unit of Use UDI	Livello di imballaggio 1 UDI	Livello di imballaggio 2 UDI	Cartone UDI
	25304502	4051642004815	4051642075532	-----	4051642575537
25304503	4051642006598	4051642075365	-----	4051642575360	

Variante 2

Unità di vendita 100 Pezzo/Cartone

Livello di imballaggio 1 10 Pezzo/Sacchetto di plastica

Unità minima di ordine 1 Cartone

Numeri articolo	Numero di articolo	Colore	Taglia	Dimensioni (U x L)	Tolleranza
	25304504	bianco+blu	XL	≈ 144 x 104/119/134/149 cm ± 3 cm	
25304505	bianco+blu	XXL	≈ 168 x 104/119/134/149 cm ± 3 cm		

GTINs	Numero di articolo	Unit of Use UDI	Livello di imballaggio 1 UDI	Livello di imballaggio 2 UDI	Cartone UDI
	25304504	4051642004808	4051642075303	-----	4051642575308
25304505	4051642004792	4051642075310	-----	4051642575315	

Le cifre relative a dimensioni, pesi, spessori e tolleranze vanno intese come valori nominali e possono differire.

Le informazioni si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze. Non rappresentano una garanzia sulle caratteristiche del prodotto e non giustificano un aspetto legale contrattuale. Le indicazioni più vecchie di 2 anni devono essere riconfermate.

Con riserva di errori di immissione ed errori.

Le schede tecniche dei prodotti fornite sono di proprietà di WIROS Wilfried Rosbach GmbH. WIROS Wilfried Rosbach GmbH è proprietaria di tutti i diritti di creazione, utilizzo e sfruttamento delle schede tecniche dei prodotti. La modifica delle schede tecniche dei prodotti o l'uso dei pittogrammi non è consentito. Le schede tecniche dei prodotti fornite possono essere utilizzate solo per i prodotti WIROS originali.



Δελτίο δεδομένων προϊόντος

wiroCLEVER FLEX




ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΟΔΙΑ ΡΡ+ΡΕ

Επίστρωση ΡΕ σε μανίκια & πρόσθιο τμήμα | Λάστιχο | Ιμάντες δεσίματος σε αυχένα & μέση | 2 γραμμές προδιάτρησης (για μείωση του μήκους)



PREMIUM+

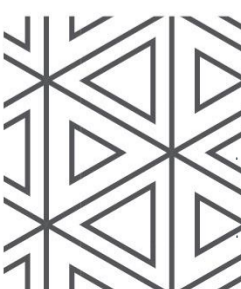

Δελτίο δεδομένων προϊόντος

wiroCLEVER FLEX



Κατασκευαστής

Εταιρεία + Διεύθυνση	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Γερμανία
SRN	DE-MF-000004956
Εμπορικό σήμα	care & serve®

Πληρεξουσιότητες

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Ελβετία
--------	--

Περιγραφή προϊόντος


Κατηγορία	PREMIUM+
Ονομασία προϊόντος	care & serve® PREMIUM+ wiroCLEVER FLEX Ιατρική ποδιά PP+PE Επίστρωση PE σε μανίκια & πρόσθιο τμήμα Λάστιχο Ιμάντες δεσίματος σε αυχένα & μέση 2 γραμμές προδιάτρησης (για μείωση του μήκους)
Ιδιότητες προϊόντος	Επίστρωση PE σε μανίκια & πρόσθιο τμήμα Λάστιχο Ιμάντες δεσίματος σε αυχένα & μέση 2 γραμμές προδιάτρησης (για μείωση του μήκους)

Υλικό

Υλικό	Μη υφασμένο ύφασμα πολυπροπυλενίου με επίστρωση πολυαιθυλενίου
Βάρος υλικού	PP: $\approx 20 \text{ g/m}^2 (\pm 2 \text{ g/m}^2)$

Χρήση

Ενδεδειγμένη χρήση	Ιατρικός ιματισμός προστασίας κατά την έννοια των Τεχνικών Κανονισμών για την Εργασία με Βιολογικούς Παράγοντες (TRBA 250) για την προστασία του επαγγελματικού ή ιδιωτικού ρουχισμού από μόλυνση κατά την διενέργεια επεμβάσεων ή εργασιών περίθαλψης, από την απευθείας επαφή με αίμα, εκκρίσεις, απεκκρίσεις ή άλλο επιμολυσμένο υλικό.
Επαφή με τρόφιμα	Επιτρέπεται η σύντομη, έμμεση επαφή με τρόφιμα.
Πεδίο εφαρμογής	Δεν χρησιμοποιείται σε ιατρικές εφαρμογές απευθείας επαφής με ασθενείς. Ιατρικός ιματισμός προστασίας για κάλυψη των ρούχων ή/και μαλλιών.
Ομάδα εφαρμογής	Εργαζόμενοι και επισκέπτες εργαστηρίων, της φαρμακοβιομηχανίας, νοσοκομείων ή παρόμοιων εγκαταστάσεων.
Ομάδα ασθενών	Ιατρικός ιματισμός προστασίας κατάλληλος για όλες τις ομάδες ασθενών.
Ένδειξη	Ιατρικός ιματισμός ως φραγμός για την κάλυψη των ρούχων ή/και των μαλλιών.
Αντένδειξη	Δεν υπάρχουν γνωστές αντενδείξεις.
Υπόδειξη χρήσης	Προϊόν μίας χρήσης μη αποστειρωμένα
Περιορισμός	Δεν είναι ΜΑΠ (μέσο ατομικής προστασίας) Δεν είναι κατάλληλο για συσκευασία και αποθήκευση τροφίμων.
Σημείωση	Όλα τα σοβαρά περιστατικά που σχετίζονται άμεσα με αυτό το προϊόν πρέπει να αναφέρονται στον κατασκευαστή και στις αρμόδιες αρχές.
Τομείς χρήσης	Νοσοκομείο Οίκος ευγηρίας κ.α. κύκλοι ειδικών Βιομηχανία Φαρμακευτική βιομηχανία Εργαστήριο Επεξεργασία τροφίμων HACCP Καθαρισμός Υγιεινή

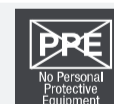

Δελτίο δεδομένων προϊόντος

wiroCLEVER FLEX



Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το υλικό δεν περιέχει λατέξ



Υπόδειξη σχετικά με την υγεία Σε περίπτωση δερματικών ερεθισμών ή αλλεργικών αντιδράσεων σταματήστε αμέσως τη χρήση να αναζητήσετε ιατρική συμβουλή. Στον βαθμό που είναι γνωστό σύμφωνα με τις τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις, τα προϊόντα δεν περιέχουν τοξικές, καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες, όταν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την ενδεδειγμένη χρήση τους. Αυτά τα προϊόντα δεν περιέχουν συστατικά από λατέξ και θεωρούνται υποαλλεργικά. Μπορεί, ωστόσο, να προκαλέσει ερεθισμό σε ευαίσθητες επιδερμίδες. Σε παρατεταμένη χρήση μπορεί να περιορίσει τον αερισμό της επιδερμίδας και να προκαλέσει ερεθισμό.

Πρότυπα

Σήμανση CE Ιατροτεχνολογικό προϊόν της κατηγορίας I σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΕ 2017/745



SRN DE-MF-000004956

Basis UDI DI 4051642-wiroCLEVERFLEX-X5

Σήμανση CE

Η σήμανση CE διασφαλίζει την ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων και εμπορευμάτων εντός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ένωσης. Το προϊόν που φέρει τη σήμανση CE πληροί τις βασικές απαιτήσεις των αναφερόμενων Ευρωπαϊκών Οδηγιών.

VO (EU) 2023/988 Κανονισμός (ΕΕ) Αρ. 2023/988 σχετικά με τη γενική ασφάλεια προϊόντων

VO (EG) 1935/2004 Κανονισμός σχετικά με τα υλικά και τα αντικείμενα από πλαστικό τα οποία προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.



VO (EU) 10/2011 Κανονισμός σχετικά με τα υλικά & αντικείμενα από πλαστικό που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.

Εφαρμογή

Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Πριν τη χρήση Βεβαιωθείτε πως έχετε επιλέξει το κατάλληλο για τις ανάγκες σας και τους τομείς χρήσης προϊόν. Μην φοράτε ιματισμό προστασίας ιατρικού τύπου, εφόσον παρουσιάζει ελαττώματα ή έχει ήδη χρησιμοποιηθεί. Ο ιματισμός προστασίας ιατρικού τύπου προορίζεται μόνο για σύντομη χρήση, στον ιατρικό τομέα η χρήση πρέπει να περιορίζεται σε έναν/μία ασθενή.

Χρήση

Οι μπλούζες φοριούνται με την κλειστή πλευρά εμπρός και κλείνουν πίσω ή στο πλάι. Για τον σκοπό αυτό περάστε τους βραχίονες στα μανίκια και κλείστε τους ιμάντες δεσίματος στον αυχένα και στη μέση.

Προς αποφυγή μόλυνσης κατά την αφαίρεση, συνιστάται το άνοιγμα της μπλούζας από πίσω με τη βοήθεια ενός δεύτερου ατόμου το οποίο θα την ωθήσει προς τα εμπρός πάνω από τους ώμους. Για να την βγάλετε, ο χρήστης πιάνει τα άνω άκρα της μπλούζας και γυρίζει την μπλούζα προς τα αριστερά.

Υπόδειξη ασφαλείας Σύμφωνα με την ανάλυση κινδύνου που διενεργήσαμε κατά το πρότυπο EN ISO 14971:2019 + A11:2021 για το συγκεκριμένο προϊόν δεν απαιτούνται πρόσθετες υποδείξεις ασφαλείας.

Απόρριψη Τα μη χρησιμοποιημένα ή μη επιμολυσμένα προϊόντα μπορούν να καίγονται με περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο σε κλιβάνους ή να απορρίπτονται σε χώρους υγειονομικής ταφής. Τα επιμολυσμένα προϊόντα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας ανάλογα με το είδος της

Διάρκεια ζωής 5 έτη από την ημερομηνία παραγωγής, εφόσον δεν έχουν χρησιμοποιηθεί και διασφαλίζεται η σωστή αποθήκευση.

Αποθήκευση Να προστατεύονται από την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.

Να φυλάσσονται σε ξηρό μέρος.

Ο μη ορθός τρόπος αποθήκευσης μπορεί να έχει ως επακόλουθο τη μείωση της διάρκειας ζωής.



Ιχνηλασιμότητα Ιχνηλασιμότητα παρτίδων από την καταγραφή των αναγκών έως την έξοδο από την αποθήκη.

Δελτίο δεδομένων προϊόντος Έκδοση 2 Ισχύει από παρτίδα 2617 +

Συσκευασία

Ανακύκλωση Αδειοδότηση κατά τον γερμανικό νόμο περί συσκευασιών (VerpackG), αριθμός αδείας DE1618662887322.

Παραδώστε τη συσκευασία προς ανακύκλωση.





www.wiros.de

WEB <https://www.wiros.de/shop/kittel/pppe-kittel/wiroclever-flex/>

Παραλλαγή 1

Μονάδα πώλησης	100 Τεμάχιο/Κουτί				
Επίπεδο συσκευασίας 1	10 Τεμάχιο/Σακούλα				
Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	1 Κουτί				
Κωδικοί είδους	Κωδ. είδους	Χρώμα	Μέγεθος	Μέγεθος (Π x Μ)	Ανοχή
	25304502	λευκό+μπλε	M	≈ 120 x 104/119/134/149 cm ± 3 cm	
	25304503	λευκό+μπλε	L	≈ 120 x 104/119/134/149 cm ± 3 cm	
GTINs	Κωδ. είδους	Unit of Use UDI	Επίπεδο συσκευασίας 1 UDI	Επίπεδο συσκευασίας 2 UDI	Κουτί UDI
	25304502	4051642004815	4051642075532	-----	4051642575537
	25304503	4051642006598	4051642075365	-----	4051642575360

Παραλλαγή 2

Μονάδα πώλησης	100 Τεμάχιο/Κουτί				
Επίπεδο συσκευασίας 1	10 Τεμάχιο/Σακούλα				
Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας	1 Κουτί				
Κωδικοί είδους	Κωδ. είδους	Χρώμα	Μέγεθος	Μέγεθος (Π x Μ)	Ανοχή
	25304504	λευκό+μπλε	XL	≈ 144 x 104/119/134/149 cm ± 3 cm	
	25304505	λευκό+μπλε	XXL	≈ 168 x 104/119/134/149 cm ± 3 cm	
GTINs	Κωδ. είδους	Unit of Use UDI	Επίπεδο συσκευασίας 1 UDI	Επίπεδο συσκευασίας 2 UDI	Κουτί UDI
	25304504	4051642004808	4051642075303	-----	4051642575308
	25304505	4051642004792	4051642075310	-----	4051642575315

Οι αναφερόμενες τιμές που αφορούν σε διαστάσεις, βάρος, πάχος και ανοχές πρέπει να νοούνται ως ονομαστικές τιμές και ενδέχεται να παρουσιάζουν αποκλίσεις.

Τα αναφερόμενα στοιχεία βασίζονται στις τρέχουσες γνώσεις μας. Δεν εξασφαλίζουν εγγυημένα την ύπαρξη των ιδιοτήτων του προϊόντος και δεν θεμελιώνουν καμία συμβατική υποχρέωση κατά την έννοια του Δικαίου. Στοιχεία παλαιότερα των 2 ετών χρήζουν επιβεβαίωσης.

Με την επιφύλαξη σφαλμάτων και τυπογραφικών λαθών.

Τα διαθέσιμα φύλλα δεδομένων προϊόντων είναι ιδιοκτησία της WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Η εταιρεία WIROS Wilfried Rosbach GmbH είναι ιδιοκτήτης όλων των δικαιωμάτων δημιουργού/χρήσης και εκμετάλλευσης των φύλλων δεδομένων προϊόντων. Δεν



Ürün Bilgi Formu

wiroCLEVER FLEX



PP+PE ÖNLÜK

Kollar ve ön kısımlar PE kaplamalı | Çekme lastik | Boyun ve bel bölgesinde bağlama bantları | 2 ayırma perforasyonu (Uzunluğu kısaltmak için)



PREMIUM+



Wilfried Rosbach GmbH

www.wiros.de

Produktdatenblatt | wiroCLEVER FLEX | Version 2 | 03.03.2025

30 / 101



Ürün Bilgi Formu

wiroCLEVER FLEX



Üretici

Şirket + Adres	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Almanya
SRN	DE-MF-000004956
Ticari marka	care & serve®

Yetkilendirmeler

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, İsviçre
--------	--

Ürün açıklaması

Kategori	PREMIUM+
Ürün tanımı	care & serve® PREMIUM+ wiroCLEVER FLEX PP+PE önlük Kollar ve ön kısımlar PE kaplamalı Çekme lastik Boyun ve bel bölgesinde bağlama bantları 2 ayırma perforasyonu (Uzunluğu kısaltmak için)
Ürün özellikleri	Kollar ve ön kısımlar PE kaplamalı Çekme lastik Boyun ve bel bölgesinde bağlama bantları 2 ayırma perforasyonu (Uzunluğu kısaltmak için)

Malzeme

Malzeme	Polietilen kaplamalı polipropilen örgü keçe
Malzeme ağırlığı	PP: ≈ 20 g/m ² (± 2 g/m ²)

Kullanım

Kullanım amacı	Müdahaleler veya bakım önlemleri sırasında kan, salgı, dışkı veya diğer kontamine malzemelerle doğrudan temas yoluyla iş veya özel giysilerin kontaminasyonunu önlemek için Biyolojik Ajanlara Yönelik Teknik Kurallar (TRBA 250) anlamında tıbbi koruyucu giysiler.
Gıda teması	Gıdalarla kısa süreli dolaylı temasa izin verilir.
Uygulama alanı	Hastaya doğrudan tıbbi uygulama yapılmamaktadır. Tıbbi koruyucu giysiler, giysileri korumak ve/veya saç örtmek için kullanılır.
Uygulama grubu	Çalışanlar ve laboratuvarlara, ilaç endüstrisine, hastanelere veya benzeri kurumlara gelen ziyaretçiler.
Hasta grubu	Tıbbi koruyucu giysiler tüm hasta grupları için uygundur.
İndikasyon	Giysileri korumak ve/veya saç örtmek için bir bariyer olarak kullanılabilen tıbbi giysiler.
Kontrendikasyon	Bilinen bir kontrendikasyon yok.
Kullanım İle ilgili Notlar	Tek kullanımlık ürün steril değil
Kısıtlama	KKD (kişisel korunma donanımı) değildir Gıda maddelerinin paketlenmesi ve depolanması için uygun değildir.
Açıklama	Bu ürünle doğrudan bağlantılı tüm ciddi olaylar üreticiye ve sorumlu yetkililere bildirilmelidir.
Kullanım alanları	Hastane Yaşlı Bakım Evleri ve diğer Uzman Kurumlar Sanayi İlaç endüstrisi Laboratuvar Gıda işleme HACCP Temizlik Hijyen



Ürün Bilgi Formu

wiroCLEVER FLEX



Ek malzeme bilgisi	lateks içermez	
Sağlık ile ilgili uyarı	<p>Cilt tahrişlerinde veya alerjik reaksiyonlarda kullanımı hemen bırakın ve bir hekime danışın.</p> <p>Tekniğin güncel durumuna göre bilindiği kadarıyla, ürünler, öngörülen amaca uygun kullanıldıklarında, toksik, kanserojen, mutajenik veya teratojenik maddeler içermemektedir.</p> <p>Bu ürünler lateks bileşenleri içermez ve hipoalerjenik sayılır. Ancak hassas ciltte tahrişlere neden olabilirler. Uzun süre takıldığında cildin hava alması kısıtlanabilir, bu da cilt tahrişlerine yol açabilir.</p>	

Standartlar

CE işareti	AB 2017/745 uyarınca I sınıfı medikal üründür.		
SRN	DE-MF-000004956		
Basis UDI DI	4051642-wiroCLEVERFLEX-X5		
	CE işareti CE işareti, ürünlerin ve malların Avrupa Ekonomik Topluluğu içinde serbest dolaşımını garanti eder. CE işaretli ürün, belirtilen Avrupa yönetmeliklerinin temel taleplerini karşılar.		
VO (EU) 2023/988	Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği (AB) 2023/988		
VO (EG) 1935/2004	Gıda maddeleriyle temas etmek için olan plastikten üretilmiş malzemeler ve cisimlerle ilgili düzenleme.		
VO (EU) 10/2011	Gıda maddeleriyle temas etmesi amaçlanan plastik malzemeler ve eşyalarla ilgili düzenleme		

Kullanım

Kullanım Kılavuzu	<p>Kullanmadan önce Lütfen ihtiyaçlarınız ve uygulama alanlarınız için doğru ürünü seçtiğinizden emin olun. Tıbbi koruyucu giysileri kusurlularsa veya daha önce kullanılmışlarsa lütfen giymeyin. Tıbbi koruyucu giysiler kısa süreli kullanım için tasarlanmıştır, tıbbi alanda kullanımları bir hasta ile sınırlıdır.</p> <p>Kullanım Önlükler kapalı taraf öne bakacak şekilde giyilir ve arkada veya yandan kapatılır. Bunun için kollarınızı kolların içine kaydırın ve boyun ve beldeki bağları bağlayın. Çıkarma sırasında giysiler ile bulaşmasını önlemek için, ikinci bir kişinin arkadan önlüğü açması ve omuzlar üzerinden öne doğru itmesi önerilir. Giyen kişi önlüğün üst uçlarını kavrar ve önlüğü çıkarırken ters çevirir.</p>		
Güvenlik Uyarısı	EN ISO 14971:2019 + A11:2021 uyarınca yaptığımız risk analizine göre bu ürün için ek güvenlik uyarıları gerekli değildir.		
Bertaraf	Kullanılmayan ve kirlenmemiş ürünler çevreye zarar vermeyecek şekilde yakılabilir veya bertaraf edilebilir. Kirlenmiş ürünler, kirlilik türüne göre yürürlükteki ulusal yasa ve talimatlara uygun olarak bertaraf edilmelidir.		
Kullanım Süresi	5 yıl , üretim tarihinden itibaren, kullanılmadığı ve doğru depolandığı takdirde.		
Saklama	Güneş ışınlarından koruyun. Kuru bir yerde depolayın. Yanlış depolama dayanıklılığın azalmasına neden olabilir.		
İzlenebilirlik	Gereksinimlerin belirlenmesinden depo çıkışına kadar parti ile ilgili izlenebilirlik sağlanmaktadır. Ürün Bilgi Formu Versiyon 2 Geçerli parti başlangıcı 2617 +		

Ambalaj

Geri Dönüşüm	VerpackG uyarınca lisanslı, Lisans No. DE1618662887322. Lütfen ambalajı geri dönüşüme aktarın.	
--------------	---	--

www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/kittel/pppe-kittel/wiroclever-flex/
-----	---



Ürün Bilgi Formu

wiroCLEVER FLEX



Varyant 1

Satış birimi	100 Adet/Karton				
Ambalaj düzeyi 1	10 Adet/Poli torba				
Minimum sipariş miktarı	1 Karton				
Ürün Numarası	Ürün numarası	Renk	Beden	Beden (Ç x U)	Tolerans
	25304502	beyaz+mavi	M	≈ 120 x 104/119/134/149 cm ± 3 cm	
	25304503	beyaz+mavi	L	≈ 120 x 104/119/134/149 cm ± 3 cm	
GTINs	Ürün numarası	Unit of Use UDI	Ambalaj seviyesi 1 UDI	Ambalaj seviyesi 2 UDI	Karton UDI
	25304502	4051642004815	4051642075532	-----	4051642575537
	25304503	4051642006598	4051642075365	-----	4051642575360

Varyant 2

Satış birimi	100 Adet/Karton				
Ambalaj düzeyi 1	10 Adet/Poli torba				
Minimum sipariş miktarı	1 Karton				
Ürün Numarası	Ürün numarası	Renk	Beden	Beden (Ç x U)	Tolerans
	25304504	beyaz+mavi	XL	≈ 144 x 104/119/134/149 cm ± 3 cm	
	25304505	beyaz+mavi	XXL	≈ 168 x 104/119/134/149 cm ± 3 cm	
GTINs	Ürün numarası	Unit of Use UDI	Ambalaj seviyesi 1 UDI	Ambalaj seviyesi 2 UDI	Karton UDI
	25304504	4051642004808	4051642075303	-----	4051642575308
	25304505	4051642004792	4051642075310	-----	4051642575315

Boyut, ağırlık, kalınlık ve toleranslar için belirtilen rakamlar nominal değerler olarak anlaşılmalıdır ve farklılık gösterebilir.

Verilen bilgiler, bilgilerimizin mevcut durumuna dayanmaktadır. Bunlar, ürün özelliklerinin garantisini teşkil etmemektedir ve sözleşmeye ilişkin yasal bir anlayışı haklı çıkarmaz. 2 yıldan eski bilgileri lütfen teyit edin.

Şirketimiz tipografik hata ve yanlışlardan sorumlu değildir.

Kullanıma sunulan ürün veri sayfaları WIROS Wilfried Rosbach GmbH şirketinin mülkiyetindedir. WIROS Wilfried Rosbach GmbH ürün veri sayfalarının tüm telif/kullanım ve değerlendirme haklarının sahibidir. Ürün veri sayfalarının değiştirilmesi veya piktogramların kullanılması yasaktır. Kullanıma sunulan ürün veri sayfaları sadece WIROS ürünleriyle bağlantılı olarak temel alınabilir.



Техническая спецификация

wiroCLEVER FLEX




ХАЛАТ ИЗ ПП+ПЭ

Покрытие ПЭ на рукавах и передней стороне | Эластичные манжеты | Завязки на шее и талии | 2 отрывных перфорации (для укорачивания)



PREMIUM+

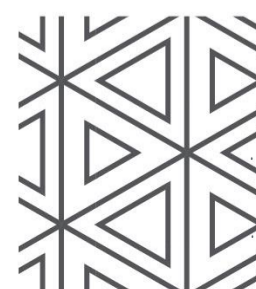

Техническая спецификация

wiroCLEVER FLEX



Производитель

Фирма + Адрес	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Германия
SRN	DE-MF-000004956
Торговая марка	care & serve®

Полномочия

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Швейцария
--------	--

Описание изделия

Категория	PREMIUM+
Обозначение продукции	care & serve® PREMIUM+ wiroCLEVER FLEX Халат из ПП+ПЭ Покрывание ПЭ на рукавах и передней стороне Эластичные манжеты Завязки на шее и талии 2 отрывных перфорации (для укорачивания)
Характеристики продукции	покрытие ПЭ на рукавах и передней стороне Эластичные манжеты Завязки на шее и талии 2 отрывных перфорации (для укорачивания)

Материал

Материал	Полипропиленовый спанбонд с полиэтиленовым покрытием
Вес материала	ПП: ≈ 20 г/м ² (± 2 г/м ²)

Использование

Назначение	Медицинская защитная одежда в значении Технических правил для биологических рабочих веществ (TRBA 250) для предотвращения загрязнения рабочей или личной одежды во время операций или санитарно-гигиенических мероприятий вследствие прямого контакта с кровью, выделениями, экскрементами или другими загрязненными материалами.
Контакт с пищевыми продуктами	Допускается кратковременный непрямой контакт с продуктами питания.
Область применения	Не применяется в медицинских целях непосредственно на пациенте. Медицинская защитная одежда служит для покрытия одежды и/или волос.
Группа применения	Сотрудники и посетители лабораторий, фармацевтических предприятий, больниц или аналогичных учреждений.
Группа пациентов	Медицинская защитная одежда подходит для всех групп пациентов.
Показание	Медицинская одежда в качестве барьера для покрытия одежды и/или волос.
Противопоказание	Противопоказаний нет.
Инструкция по применению	Одноразовый продукт нестерильные
Ограничения	Не является СИЗ (средством индивидуальной защиты) Не предназначено для упаковки и хранения пищевых продуктов.
Примечание	Обо всех серьезных инцидентах, непосредственно связанных с этим продуктом, необходимо сообщать производителю и ответственным органам.
Области применения	Больница Дом престарелых в том числе группы специалистов Промышленность фармацевтическая промышленность Лаборатории Пищевая промышленность НАССР Уборка гигиена



Техническая спецификация

wiroCLEVER FLEX



Информация о добавках в составе материала без латекса



Предупреждение о возм При раздражении кожи или аллергических реакциях необходимо немедленно прекратить использование и обратиться к врачу.
На основании актуальных научных знаний, данные изделия не содержат токсичных, канцерогенных, мутагенных или репродуктивно токсичных веществ, если используются по назначению.
Данные изделия не содержат латексных компонентов и считаются гипоаллергенными. Тем не менее, они могут вызвать раздражение чувствительной кожи. Длительное ношение изделия может ограничить поступление воздуха к коже, что, в свою очередь, может привести к её раздражению.

Стандарты

CE-маркировка Медицинское изделие класса I согласно (ЕС) 2017/745



SRN DE-MF-000004956

Basis UDI DI 4051642-wiroCLEVERFLEX-X5

CE-маркировка

Маркировка CE гарантирует свободное обращение изделий и товаров на территории ЕЭС. Изделие с маркировкой CE соответствует основным требованиям указанных европейских регламентов.

VO (EU) 2023/988 Регламент ЕС № 2023/988 об общей безопасности продукции

VO (EG) 1935/2004 Регламент о материалах и изделиях из пластмасс, контактирующих с пищевыми продуктами.



VO (EU) 10/2011 Распоряжение о материалах и изделиях из пластмасс, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами

Использование

Инструкция по использованию Перед использованием
Убедитесь, что выбрали правильное изделие для своих потребностей и сфер применения. Ни в коем случае не надевайте медицинскую защитную одежду, у которой были обнаружены дефекты или бывшей в употреблении. Медицинская защитная одежда предназначена для кратковременного использования; в сфере медицины использование ограничено одним пациентом.

Применение

Халаты носят сплошной стороной вперед и закрытыми сзади или сбоку. Для этого просуньте руки в рукава и завяжите завязки на шее и талии.

Чтобы при снятии избежать загрязнения одежды, рекомендуется, чтобы второй человек распахнул халат сзади и сдвинул его через плечи вперед. Носитель халата берется за верхние концы халата и, снимая, выворачивает его наизнанку.

Инструкция по технике безопасности По результатам анализа рисков в соответствии со стандартом EN ISO 14971:2019 + A11:2021, дополнительные рекомендации по безопасности для данного изделия не требуются.

Утилизация Неиспользованные и незагрязненные изделия можно сжигать экологически безопасным образом или утилизировать в местах для сбора мусора. Загрязненные изделия следует утилизировать в соответствии с действующим национальным законодательством и нормативно-правовыми актами, в зависимости от типа загрязнения.

Срок службы 5 лет с даты изготовления, если они не были в употреблении и при правильном хранении.

Хранение Защищать от солнечных лучей.
Хранить сухим.
Неправильное хранение может привести к снижению долговечности.



Прослеживаемость Прослеживаемость партии от определения потребностей до выхода со склада.
Техническая спецификация Версия 2 действительный, начиная с партии 2617 +

Упаковка

Переработка Лицензировано согласно Закону об упаковке, номер лицензии DE1618662887322.
Пожалуйста, отправьте упаковку на переработку.





www.wiros.de

WEB <https://www.wiros.de/shop/kittel/pppe-kittel/wiroclever-flex/>

Вариант 1

Торговая единица	100 шт./Коробка				
Уровень упаковки 1	10 шт./Полиэтиленовый пакет				
Минимальное количество заказа	1 Коробка				
Номера артикула	Номер артикула	Цвет	Размер	Размеры (обхват x длина)	допустимое отклонение
	25304502	белый+синий	M	≈ 120 x 104/119/134/149 cm	± 3 cm
	25304503	белый+синий	L	≈ 120 x 104/119/134/149 cm	± 3 cm
GTINs	Номер артикула	Unit of Use UDI	Уровень упаковки 1 UDI	Уровень упаковки 2 UDI	Коробка UDI
	25304502	4051642004815	4051642075532	-----	4051642575537
	25304503	4051642006598	4051642075365	-----	4051642575360

Вариант 2

Торговая единица	100 шт./Коробка				
Уровень упаковки 1	10 шт./Полиэтиленовый пакет				
Минимальное количество заказа	1 Коробка				
Номера артикула	Номер артикула	Цвет	Размер	Размеры (обхват x длина)	допустимое отклонение
	25304504	белый+синий	XL	≈ 144 x 104/119/134/149 cm	± 3 cm
	25304505	белый+синий	XXL	≈ 168 x 104/119/134/149 cm	± 3 cm
GTINs	Номер артикула	Unit of Use UDI	Уровень упаковки 1 UDI	Уровень упаковки 2 UDI	Коробка UDI
	25304504	4051642004808	4051642075303	-----	4051642575308
	25304505	4051642004792	4051642075310	-----	4051642575315

Цифровые данные размеров, веса, толщины и допустимых отклонений следует понимать как номинальные величины и они могут отличаться. Данные основаны на текущем уровне наших знаний.

Они не являются гарантированным заверением о характеристиках товара и не создают договорного правового понимания. Информацию, которой больше 2 лет, необходимо подтвердить повторно.

Возможны опечатки и другие ошибки.

Предоставленные технические паспорта изделий продукции являются собственностью компании WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Компания WIROS Wilfried Rosbach GmbH является владельцем всех авторских прав/прав на использование и реализацию технических паспортов изделий. Запрещается вносить изменения в технические паспорта изделий или использовать пиктограммы. Предоставленные технические паспорта изделий могут использоваться только в связи с оригинальными изделиями



Karta produktu

wiroCLEVER FLEX



KITEL PP+PE

Powłoka PE z przodu i na ramionach | Gumki ściągające | Tasiemki do wiązania przy szyi i w talii | 2 perforacje do regulacji (zmiany długości)



PREMIUM+



Karta produktu

wiroCLEVER FLEX



Producent

Firma + Adres	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Niemcy
SRN	DE-MF-000004956
Znak towarowy	care & serve®

Upoważnienia

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Szwajcaria
--------	---

Opis produktu

Kategoria	PREMIUM+
Nazwa produktu	care & serve® PREMIUM+ wiroCLEVER FLEX Kitel PP+PE Powłoka PE z przodu i na ramionach Gumki ściągające Tasiemki do wiązania przy szyi i w talii 2 perforacje do regulacji (zmiany długości)
Właściwości produktu	Powłoka PE z przodu i na ramionach Gumki ściągające Tasiemki do wiązania przy szyi i w talii 2 perforacje do regulacji (zmiany długości)

Materiał

Materiał	Polipropylen ciągły formowany z powłoką polietylenową
Waga materiału	PP: ≈ 20 g/m ² (± 2 g/m ²)

Zastosowanie

Zamierzone przeznaczenie	Medyczna odzież ochronna zgodna z przepisami technicznymi dla środków biologicznych (TRBA 250), używana w celu uniknięcia zanieczyszczenia odzieży roboczej lub prywatnej podczas wykonywania zabiegów i czynności pielęgnacyjnych w bezpośrednim kontakcie z krwią, wydzielinami, odchodami lub innym zanieczyszczonym materiałem.
Kontakt z żywnością	Dopuszczony krótkotrwały, pośredni kontakt z produktami spożywczymi.
Zakres zastosowania	Nie ma bezpośredniego zastosowania medycznego dla pacjentów. Medyczna odzież ochronna służy do przykrycia odzieży i/lub włosów.
Grupa zastosowania	Pracownicy i goście laboratoriów, przemysłu farmaceutycznego, szpitali lub podobnych instytucji.
Grupa pacjentów	Medyczna odzież ochronna jest odpowiednia dla wszystkich grup pacjentów.
Wskazania	Odzież medyczna jako bariera przykrywająca odzież i/lub włosy.
Przeciwwskazania	Brak znanych przeciwwskazań.
Instrukcja użytkowania	Produkt jednorazowego użytku niesterylny
Zastrzeżenia	Produkt nie jest ŚOI (środkiem ochrony indywidualnej) Nie nadaje się do pakowania i przechowywania żywności.
Informacja	Wszystkie poważne incydenty związane bezpośrednio z tym produktem należy zgłaszać producentowi i odpowiednim władzom.
Obszary zastosowania	Szpitala Domy opieki w tym Ośrodki specjalistyczne przemysł przemysł farmaceutyczny laboratorium przygotowanie produktów spożywczych HACCP sprzątanie higiena



Karta produktu

wiroCLEVER FLEX



Dodatkowe informacje o materiałach nie zawiera lateksu



Wskazówki dotyczące zdrowia W przypadku podrażnienia skóry lub reakcji alergicznych należy natychmiast przerwać stosowanie i zasięgnąć porady lekarza. Zgodnie z obecnym stanem wiedzy, produkty nie zawierają żadnych substancji toksycznych, rakotwórczych, mutagennych ani szkodliwych dla rozrodczości, jeśli są używane zgodnie z ich przeznaczeniem. Produkty nie zawierają składników lateksowych i są uważane za hipoalergiczne. Mogą one jednak powodować podrażnienia wrażliwej skóry. Długotrwałe noszenie może ograniczać wentylację skóry, co może prowadzić do jej podrażnienia.

Standardy

Oznakowanie CE Wyrób medyczny klasy I zgodny z normą UE 2017/745



SRN DE-MF-000004956

Basis UDI DI 4051642-wiroCLEVERFLEX-X5

Oznakowanie CE

Oznaczenie CE gwarantuje swobodny przepływ produktów i towarów w obrębie Europejskiej Wspólnoty

Gospodarczej. Produkt oznaczony znakiem CE spełnia zasadnicze wymagania określone w przepisach europejskich.

VO (EU) 2023/988 Rozporządzenie (UE) nr 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów

VO (EG) 1935/2004 Rozporządzenie w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi.



VO (EU) 10/2011 Rozporządzenie w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych dopuszczonych do kontaktu z żywnością

Stosowanie

Instrukcja obsługi
Przed użyciem
Prosimy, by upewnić się że wybrany przez Państwa produkt jest dopasowany do Państwa potrzeb oraz obszarów zastosowania. Nie należy nosić medycznej odzieży ochronnej, jeśli jest ona uszkodzona lub była używana. Medyczna odzież ochronna jest przeznaczona do krótkotrwałego użytku; w medycynie jej stosowanie jest ograniczone do jednego pacjenta/pacjentki.
Użytkowanie
Kitle należy nosić z zamkniętą stroną skierowaną do przodu i zapięty z tyłu lub z boku. Aby to zrobić, wsuń ręce w rękawy i zawiąż tasemki na szyi i w talii. Aby zapobiec zanieczyszczeniu odzieży podczas zdejmowania, zaleca się, aby druga osoba rozpięła kitel z tyłu i zsunęła go do przodu przez ramiona. Użytkownik chwytając górne końce kitla i podczas zdejmowania wyraca go na lewą stronę.

Wskazówka bezpieczeństwa Zgodnie z naszą analizą ryzyka przeprowadzoną zgodnie z normą EN ISO 14971:2019 + A11:2021, dla tego produktu nie są wymagane żadne dodatkowe instrukcje bezpieczeństwa.

Utylizacja Produkty, który nie były użytkowane ani skażone, mogą zostać spalone lub zutylizowane w sposób przyjazny dla środowiska. Skażone produkty należy zutylizować w sposób zgodny z obowiązującym krajowymi zaleceniami i przepisami prawnymi.

Trwałość 5 lat od daty produkcji, jeśli produkt był prawidłowo przechowywany i nieużywany

Przechowywanie Chronić przed promieniowaniem słońca
Przechowywać w suchym miejscu.
Niewłaściwe przechowywanie może obniżyć trwałość produktu.



Identyfikowalność
Możliwość identyfikacji konkretnej partii od zgłoszenia zapotrzebowania do opuszczenia magazynu.
Karta produktu Wersja 2 ważne od partii 2617 +

Opakowanie

Recykling Licencjonowane przez VerpackG, numer licencji DE1618662887322.
Opakowanie należy zwrócić do ponownego przetworzenia.





www.wiros.de

WEB <https://www.wiros.de/shop/kittel/pppe-kittel/wiroclever-flex/>

Wariant 1

jednostka sprzedaży 100 sztuka/karton

Poziom pakowania 1 10 sztuka/Torebka foliowa

Minimalna ilość zamówienia 1 karton

Numer artykułu	Numer artykułu	kolor	Rozmiar	Rozmiar (obwód x długość)	tolerancja
	25304502	biały+niebieski	M	≈ 120 x 104/119/134/149 cm	± 3 cm
	25304503	biały+niebieski	L	≈ 120 x 104/119/134/149 cm	± 3 cm

GTINs	Numer artykułu	Unit of Use UDI	Poziom pakowania 1 UDI	Poziom pakowania 2 UDI	karton UDI
	25304502	4051642004815	4051642075532	-----	4051642575537
	25304503	4051642006598	4051642075365	-----	4051642575360

Wariant 2

jednostka sprzedaży 100 sztuka/karton

Poziom pakowania 1 10 sztuka/Torebka foliowa

Minimalna ilość zamówienia 1 karton

Numer artykułu	Numer artykułu	kolor	Rozmiar	Rozmiar (obwód x długość)	tolerancja
	25304504	biały+niebieski	XL	≈ 144 x 104/119/134/149 cm	± 3 cm
	25304505	biały+niebieski	XXL	≈ 168 x 104/119/134/149 cm	± 3 cm

GTINs	Numer artykułu	Unit of Use UDI	Poziom pakowania 1 UDI	Poziom pakowania 2 UDI	karton UDI
	25304504	4051642004808	4051642075303	-----	4051642575308
	25304505	4051642004792	4051642075310	-----	4051642575315

Wartości liczbowe dotyczące rozmiarów, masy, grubości i tolerancji należy rozumieć jako wartości nominalne, które mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych.

Podane informacje są zgodne z naszym aktualnym stanem wiedzy. Nie stanowią gwarancji właściwości produktu oraz nie stanowią umownego rozumienia prawa. Informacje, które zostały podane przed okresem 2 lat, wymagają ponownego potwierdzenia.

Błędy i pomyłki zastrzeżone.

Udostępnione karty informacyjne produktów są własnością firmy WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Firma WIROS Wilfried Rosbach GmbH jest właścicielem wszelkich praw autorskich/praw do użytkowania i wykorzystywania kart informacyjnych produktów. Zabronione jest dokonywanie zmian w kartach informacyjnych produktów oraz wykorzystywanie piktogramów. Udostępnionych kart informacyjnych produktów można używać wyłącznie w połączeniu z oryginalnymi produktami firmy WIROS.



wiroCLEVER FLEX

PP + PE-KITTEL

PE-belægning på arme og front | Elastikkant | Bindestropper i nakke og talje | 2 adskillelserperforeringer (for at forkorte længden)



PREMIUM+





Producent

Firma + Adresse	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Deutschland
SRN	DE-MF-000004956
Handelsmærke	care & serve®

Fuldmagter

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Schweiz
--------	--

Produktbeskrivelse

Kategori	PREMIUM+
Produktbetegnelse	care & serve® PREMIUM+ wiroCLEVER FLEX PP + PE-kittel PE-belægning på arme og front Elastikkant Bindestropper i nakke og talje 2 adskillellesperforeringer (for at forkorte længden)
Produktegenskaber	PE-belægning på arme og front Elastikkant Bindestropper i nakke og talje 2 adskillellesperforeringer (for at forkorte længden)

Materiale


Materiale	Polypropylen-fiberdug med polyætylen-belægning
Materialets vægt	PP: ≈ 20 g/m ² (± 2 g/m ²)

Anvendelse

Anvendelsesformål	Medicinsk beskyttelsesbeklædning som defineret i de tekniske regler for biologiske stoffer (TRBA 250) for at undgå kontaminering af arbejde eller privat beklædning under indgreb eller plejeforanstaltninger gennem direkte kontakt med blod, sekreter, udskillelse eller andet forurenede materiale.	
Fødevarekontakt	Kortvarig, indirekte kontakt med fødevarer er tilladt.	
Anvendelsesområde	Der er ingen direkte medicinsk anvendelse på patienten. Medicinsk beskyttelsestøj bruges til at dække tøj og/eller hår.	
Applikationsgruppe	Medarbejdere og besøgende på laboratorier, medicinalindustrien, hospitaler eller lignende institutioner.	
Patientgruppe	Medicinsk beskyttelsesbeklædning er velegnet til alle patientgrupper.	
Indikation	Medicinsk tøj som en barriere for at dække tøj og/eller hår.	
Kontraindikation	Ingen kendte kontraindikationer.	
Anvendeshenvisning	Engangsprodukt ikke steril	 
Begrænsning	Ingen PSA (personligt værneudstyr) Ikke egnet til indpakning og opbevaring af fødevarer.	
Bemærk	Alle alvorlige hændelser i direkte forbindelse med dette produkt skal rapporteres til producenten og de ansvarlige myndigheder.	
Anvendelsesområder	Hospital Plejehjem herunder faggrupper Industri farmaindustri Laboratorium Levnedsmiddelforarbejdning HACCP Rengøring Hygiejne	     






Yderligere oplysninger om materialet	latexfri	
Sundhedshenvisning	<p>Hvis der opstår hudirritation eller allergiske reaktioner, skal du straks afbryde brugen og søge læge. Så vidt det er kendt i henhold til den aktuelle teknik, indeholder produkterne ingen giftige, kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske stoffer, når de anvendes i overensstemmelse med deres tilsigtede anvendelse.</p> <p>Disse produkter indeholder ingen latexkomponenter og betragtes som hypoallergene. De kan dog forårsage irritation på følsom hud. Ved længere tids anvendelse kan ventilationen af huden være begrænset, hvilket kan føre til hudirritation.</p>	


Standarder

CE-mærkning	Medicinsk produkt klasse I i henhold til EU 2017/745	 
SRN	DE-MF-000004956	
Basis UDI DI	4051642-wiroCLEVERFLEX-X5	
	<p>CE-mærkning</p> <p>CE-mærkningen garanterer fri bevægelighed for produkter og varer inden for det Europæiske Økonomiske Fællesskab. Det CE-mærkede produkt opfylder de grundlæggende krav i de angivne europæiske regulativer.</p>	
VO (EU) 2023/988	Forordning (EU) nr. 2023/988 vedr. generel produktsikkerhed	
VO (EG) 1935/2004	Forordning vedrørende materialer og genstande af kunststof, som er tiltænkt kontakt med levnedsmidler.	
VO (EU) 10/2011	Forordning om plastmaterialer- og genstande bestemt til kontakt med fødevarer	

Anvendelse

Brugsanvisning	<p>Før brug</p> <p>Kontrollér, at du har valgt det passende produkt til dine behov og anvendelsesområder. Anvend ikke medicinske beskyttelsesbeklædning, hvis det udviser mangler eller allerede har været brugt. Medicinske beskyttelsesbeklædning er beregnet til kortvarig anvendelse, på det medicinske område er anvendelsen begrænset til én patient.</p> <p>Håndtering</p> <p>Kittel bæres med den lukkede side vendt fremad og lukket på bagsiden eller siden. For at gøre dette skal du skyde armene ind i ærmerne og lukke bindebåndene i nakken og i taljen.</p> <p>For at forhindre forurening med tøjet når den tages af, anbefales det, at en anden person åbner kitlen bagpå og skubber den frem over skuldrene. Bæreren griber fat i de øverste ender af kitlen og vender kitlen udad, når den tages af.</p>	
Sikkerhedshenvisning	Ifølge vores risikoanalyse i henhold til EN ISO 14971:2019 + A11:2021 kræves ingen yderligere sikkerhedsanvisninger for dette produkt.	
Bortskaffelse	Ubrugte og ukontaminerede produkter kan forbrændes på miljøvenlig vis eller bortskaffes via et deponeringsanlæg. Kontaminerede produkter skal bortskaffes i henhold til nationale love og forskrifter alt efter den pågældende kontamineringstype.	
Holdbarhed	5 år efter produktionsdatoen, hvis ubrugte og under forudsætning af korrekt opbevaring.	
Opbevaring	<p>Skal beskyttes mod direkte sol.</p> <p>Skal opbevares tørt.</p> <p>Forkert opbevaring kan medføre reduceret holdbarhed.</p>	
Sporbarhed	Charge-baseret sporbarhed fra meddelelse om behov frem til forsendelse fra lageret. Produktdatablad Version 2 gyldig fra charge 2617 +	

Emballage

Genbrug	Licenseret i henhold til VerpackG, licensnummer DE1618662887322. Aflever emballagen på en genbrugsstation.	
---------	--	---





www.wiros.de

WEB <https://www.wiros.de/shop/kittel/pppe-kittel/wiroclever-flex/>

Variant 1

Salgsenhed 100 Styk/Kasse

Emballageniveau 1 10 Styk/Plasticpose

Minimumsbestillingsmængde 1 Kasse

Varenumre	Artikelnummer	Farve	Størrelse	Størrelse (O x L)	Tolerance
	25304502	hvid+blå	M	≈ 120 x 104/119/134/149 cm ± 3 cm	
	25304503	hvid+blå	L	≈ 120 x 104/119/134/149 cm ± 3 cm	

GTINs	Artikelnummer	Unit of Use UDI	Emballageniveau 1 UDI	Emballageniveau 2 UDI	Kasse UDI
	25304502	4051642004815	4051642075532	-----	4051642575537
	25304503	4051642006598	4051642075365	-----	4051642575360

Variant 2

Salgsenhed 100 Styk/Kasse

Emballageniveau 1 10 Styk/Plasticpose

Minimumsbestillingsmængde 1 Kasse

Varenumre	Artikelnummer	Farve	Størrelse	Størrelse (O x L)	Tolerance
	25304504	hvid+blå	XL	≈ 144 x 104/119/134/149 cm ± 3 cm	
	25304505	hvid+blå	XXL	≈ 168 x 104/119/134/149 cm ± 3 cm	

GTINs	Artikelnummer	Unit of Use UDI	Emballageniveau 1 UDI	Emballageniveau 2 UDI	Kasse UDI
	25304504	4051642004808	4051642075303	-----	4051642575308
	25304505	4051642004792	4051642075310	-----	4051642575315

Talangerne vedrørende mål, vægt, tykkelse og tolerancer skal forstås som målværdier og kan afvige.

Angivelserne er baseret på vores aktuelle viden. De udgør ikke nogen garanti for bestemte egenskaber og danner ikke noget grundlag for et juridisk kontraktforhold. Angivelser ældre end 2 år bør søges bekræftet på ny.

Med forbehold for fejl.

Produktdatabladene er WIROS Wilfried Rosbach GmbH's ejendom. WIROS Wilfried Rosbach GmbH er indehaver af alle ophavsrettigheder/rettigheder til brug og udnyttelse af produktdatabladene. Det er ikke tilladt at ændre produktdatabladene eller at bruge piktogrammerne. De medfølgende produktdatablade må kun anvendes i forbindelse med originale WIROS produkter.



PP+PE-SKYDDSRÖCK

PE-överdrag på armar och framsida | Gummidragband | Knytbånd i nacke och midja | 2 separationsperforeringar (för att förkorta längden)



PREMIUM+





Tillverkare

Företag + Adress	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Tyskland
SRN	DE-MF-000004956
Varumärke	care & serve®

Tillstånd

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Schweiz
--------	--

Produktbeskrivning


Kategori	PREMIUM+
Produktbeteckning	care & serve® PREMIUM+ wiroCLEVER FLEX PP+PE-skyddsrock PE-överdrag på armar och framsida Gummidragband Knytband i nacke och midja 2 separationsperforeringar (för att förkorta längden)
Produktegenskaper	PE-överdrag på armar och framsida Gummidragband Knytband i nacke och midja 2 separationsperforeringar (för att förkorta längden)

Material


Material	Polypropylen-spunbond med polyetenbeläggning
Materialets vikt	PP: ≈ 20 g/m ² (± 2 g/m ²)

Användning

Användningsområde	Medicinsk skyddsbeklädnad i den mening som avses i Tekniska regler för biologiska medel (TRBA 250). Den används för att undvika, under ingrepp eller vårdåtgärder, kontaminering av arbets- eller privata kläder från direktkontakt med blod, avskömlingar, sekret eller annat förorenat material.
Kontakt med livsmedel	Kortvarig indirekt kontakt med livsmedel är tillåten.
Användningsområde	Det finns ingen direkt medicinsk användning för patienten. Medicinska skyddskläder används för att täcka kläder och/eller hår.
Användningsgrupp	Anställda och besökare på laboratorier, läkemedelsindustrin, sjukhus eller liknande institutioner.
Patientgrupp	Medicinsk skyddskläder är lämplig för alla patientgrupper.
Indikation	Medicinska kläder som barriär för att täcka kläder och/eller hår.
Kontraindikation	Inga kända kontraindikationer.
Anvisningarna för användandet	Produkt för engångsbruk ej steril
Begränsning	Ingen personlig skyddsutrustning (PSU) Inte lämpligt för packning och förvaring av livsmedel.
Obs	Alla allvarliga händelser i direkt anslutning till denna produkt måste rapporteras till tillverkaren och de ansvariga myndigheterna.
Användningsområden	Sjukhus Alderdomshem inkl. Expertkretsar Industrin Läkemedelsindustrin Laboratorier Livsmedelsförädling HACCP Rengöring Hygien

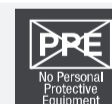





Ytterligare materialinformation	Latexfri	
Hälsovarningar	<p>Om hudirritation eller allergiska reaktioner uppstår, avbryt användningen omedelbart och uppsök läkare.</p> <p>Enligt vad som är känt enligt den senaste tekniken innehåller produkterna inga giftiga, cancerframkallande, mutagena eller reproduktionsstörande ämnen när de används i enlighet med avsedd användning.</p> <p>Dessa produkter innehåller inga latexkomponenter och anses vara hypoallergen. De kan dock orsaka irritation på känslig hud. Om den bärs under långa perioder kan ventilationen av huden begränsas, vilket kan leda till hudirritation.</p>	

Standarder

CE-märkning	Medicinsk produkt av klass I enligt förordning (EU) 2017/745		
SRN	DE-MF-000004956		
Basis UDI DI	4051642-wiroCLEVERFLEX-X5		
	<p>CE-märkning</p> <p>CE-märkningen garanterar fri handel med produkter och varor inom Europeiska ekonomiska gemenskapen. Den CE-märkta produkten uppfyller de grundläggande kraven i de angivna europeiska förordningarna.</p>		
VO (EU) 2023/988	EU-förordning nr 2023/988 om allmän produktsäkerhet		
VO (EG) 1935/2004	Förordning om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel		
VO (EU) 10/2011	Förordning om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel		

Användning

Bruksanvisning	<p>Före användning</p> <p>Se till att du har rätt produkt för dina behov och användningsområden. Använd inte medicinska skyddskläder om de är defekta eller redan har använts. Medicinska ansiktsmasker för engångsbruk är avsedda för kortvarig användning, inom det medicinska området är användningen begränsad till en patient.</p> <p>Hantering</p> <p>Skyddsrockar bärs med den stängda sidan framåt och stängs på baksidan eller på sidan. För att göra detta, för in armarna i ärmarna och stäng banden i nacke och midja.</p> <p>För att förhindra kontaminering med kläder vid avklädning, rekommenderas att en andra person öppnar klänningen på baksidan och skjuter den framåt över axlarna. Bäraren tar tag i de övre skyddsrockändarna och vänder skyddsrocken åt vänster vid avklädning.</p>		
Säkerhetsanvisning	Enligt vår riskanalys, enligt EN ISO 14971:2019 + A11:2021 krävs inga ytterligare säkerhetsinstruktioner för denna produkt.		
Avfallshantering	Oanvända och okontaminerade produkter kan miljövänligt förbrännas eller avfallshanteras på en deponi. Kontaminerade produkter måste avfallshanteras i enlighet med gällande lagar och förordningar utifrån typ av kontaminering.		
Hållbarhet	5 år från produktionsdatumet, om den är oanvänd och har förvarats korrekt.		
Förvaring	<p>Undvik direkt solljus.</p> <p>Förvaras torrt.</p> <p>Felaktig förvaring kan leda till en minskad hållbarhet.</p>		
Spårbarhet	Batchrelaterad spårbarhet från behovsbedömning till lagerutgång. Produktdatablad Version 2 Giltigt fr.o.m. batch 2617 +		

Förpackning

Återvinning	Licensierad enligt VerpackG (tysk förpackningslag), licensnummer DE1618662887322. Vänligen lämna in förpackningen för återvinning.	
-------------	---	---

www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/kittel/pppe-kittel/wiroclever-flex/
-----	---





Varianter 1

Försäljningsenhet	100 Antal/Kartong				
Förpackningsnivå 1	10 Antal/Polypåse				
Minsta ordervolym	1 Kartong				
Artikelnummer	Artikelnummer	Färg	Storlek	Storlek (O x L)	Tolerans
	25304502	vit+blå	M	≈ 120 x 104/119/134/149 cm ± 3 cm	
	25304503	vit+blå	L	≈ 120 x 104/119/134/149 cm ± 3 cm	
GTINs	Artikelnummer	Unit of Use UDI	Förpackningsnivå 1 UDI	Förpackningsnivå 2 UDI	Kartong UDI
	25304502	4051642004815	4051642075532	-----	4051642575537
	25304503	4051642006598	4051642075365	-----	4051642575360

Varianter 2

Försäljningsenhet	100 Antal/Kartong				
Förpackningsnivå 1	10 Antal/Polypåse				
Minsta ordervolym	1 Kartong				
Artikelnummer	Artikelnummer	Färg	Storlek	Storlek (O x L)	Tolerans
	25304504	vit+blå	XL	≈ 144 x 104/119/134/149 cm ± 3 cm	
	25304505	vit+blå	XXL	≈ 168 x 104/119/134/149 cm ± 3 cm	
GTINs	Artikelnummer	Unit of Use UDI	Förpackningsnivå 1 UDI	Förpackningsnivå 2 UDI	Kartong UDI
	25304504	4051642004808	4051642075303	-----	4051642575308
	25304505	4051642004792	4051642075310	-----	4051642575315


Siffrorna för mått, vikter, tjocklekar och toleranser ska förstås som börvärden och kan variera.

Uppgifterna är baserade på vår nuvarande kunskapsnivå. De är inte någon garanterad försäkring om produktfunktioner och motiverar inte någon avtalsenlig tolkning av lagen. Var god och inhämta bekräftelse för uppgifter som är äldre än 2 år.

Inmatningsfel och fel förbehållna.

De bifogade produktdatabladen tillhör WIROS Wilfried Rosbach GmbH. WIROS Wilfried Rosbach GmbH är innehavare av alla upphovs-/användnings-/nyttjanderättigheter till produktdatabladen. Det är inte tillåtet att ändra produktdatabladen eller använda piktogrammen. De bifogade produktdatabladen får endast användas i samband med original WIROS-produkter.



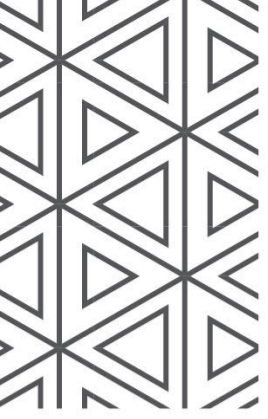

wiroCLEVER FLEX

PP+PE-KITTEL

PE-belegg på armer og framme | Gummitrekkmansjetter | Bånd i hals og midje | To adskillende perforeringer (for å forkorte lengden)



PREMIUM+





Produsent

Firma + Adresse	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Tyskland
SRN	DE-MF-000004956
Varemerke	care & serve®

Autorisasjoner

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Sveits
--------	---

Produktbeskrivelse

Kategori	PREMIUM+
Produktnavn	care & serve® PREMIUM+ wiroCLEVER FLEX PP+PE-kittel PE-belegg på armer og framme Gummitrekkmansjetter Bånd i hals og midje To adskillende perforeringer (for å forkorte lengden)
Produktegenskaper	PE-belegg på armer og framme Gummitrekkmansjetter Bånd i hals og midje To adskillende perforeringer (for å forkorte lengden)

Materiale


Materiale	Polypropylen-spunnet fleece med polyetylenlaminering
Materialvekt	PP: ≈ 20 g/m ² (± 2 g/m ²) PP: ≈ 15 g/m ² (± 2 g/m ²)

Bruk




Bruksområde	Medisinsk vernetøy i henhold til de tekniske reglene for biologisk arbeidsutstyr (TRBA 250) for å unngå forurensning av arbeidstøy eller private klær under inngrep eller tiltak knyttet til helsetjenester gjennom direkte kontakt med blod, sekreter, utskilte væsker eller annet forurensende materiale.	
Matkontakt	Kortvarig indirekte kontakt med matvarer er tillatt.	
Bruksområde	Det er ingen direkte medisinsk anvendelse på pasienten. Medisinsk vernetøy brukes til å dekke til klær og/eller hår.	
Anvendelsesgruppe	Medarbeidere og besøkende på laboratorier, i farmasøytisk industri, på sykehus eller liknende institusjoner.	
Pasientgruppe	Medisinsk vernetøy egner seg til alle pasientgrupper.	
Indikasjon	Medisinsk tøy som en barriere for å dekke til klær og/eller hår.	
Kontraindikasjon	Ingen kjente kontraindikasjoner.	
Veiledning ang. bruk	Engangsprodukt Ikke-sterile	 
Begrensning	Intet PPE (personlig verneutstyr) Ikke egnet for pakking og oppbevaring av matvarer.	
Merk	Alle alvorlige hendelser i direkte forbindelse med dette produktet må rapporteres til produsenten og ansvarlige myndigheter.	
Bruksområder	Sykehus Aldershjem Bl.a. spesialistgrupper Industri Farmasøytisk industri Laboratorier Bearbeiding av næringsmidler HACCP Rengjøring Hygiene	     







Ytterligere informasjon om materialet	uten lateks	
Veiledning ang. helse	<p>Hvis det oppstår hudirritasjon eller allergiske reaksjoner, må du umiddelbart avbryte bruken, og søke legehjelp.</p> <p>Så langt det er kjent i henhold til den nåværende teknikken, inneholder produktene ingen giftige, kreftfremkallende, mutagene eller reproduksjonstoksiske stoffer når de brukes i samsvar med tiltenkt bruk.</p> <p>Disse produktene inneholder ingen latekskomponenter, og anses som hypoallergene. Imidlertid kan de forårsake irritasjon på sensitiv hud. Hvis den brukes over lengre tid, kan ventilasjonen av huden være begrenset, noe som kan føre til hudirritasjon.</p>	


Standarder

CE-merking	Medisinsk produkt av klasse I iht. EU 2017/745	 
SRN	DE-MF-000004956	
Basis UDI DI	4051642-wiroCLEVERFLEX-X5	
	<p>CE-merking</p> <p>CE-merkingen garanterer fri bevegelse av produkter og varer innenfor Det europeiske økonomiske fellesskapet. Det CE-merkede produktet oppfyller de grunnleggende kravene i de europeiske bestemmelsene som er oppgitt.</p>	
VO (EU) 2023/988	Forordning (EU) nr. 2023/988 om generell produktsikkerhet	
VO (EG) 1935/2004	Direktiv ang. plastmaterialer og -gjenstander som er beregnet på å komme i kontakt med matvarer.	
VO (EU) 10/2011	Forordning om materialer og gjenstander av kunststoff, som er laget for å komme i kontakt med matvarer.	

Bruk

Bruksanvisning	<p>Før bruk</p> <p>Vennligst forsikre deg om at du har valgt riktig produkt for dine behov og anvendelsesområder. Vennligst ikke bruk medisinsk vernetøy dersom det oppviser defekter eller allerede er brukt. Medisinsk vernetøy er beregnet på kortvarig bruk. På det medisinske området er bruken begrenset til én enkelt pasient.</p> <p>Håndtering</p> <p>En går i kittel med den lukkede siden vendt fremover og lukket bak eller på siden. For å gjøre dette, så stikk armene inn i ermene og lukk i nakken og midjen båndene til knytting.</p> <p>For å forhindre forurensning med klær når du tar kittelen av, anbefales det at en annen person åpner kittelen bak og skyver den fremover over skuldrene. Den som har plagget på seg, griper tak i kittelens øvre ender og vender kittelen mot venstre når den tas av.</p>	
Sikkerhetshenvisninger	I følge vår risikoanalyse i henhold til EN ISO 14971:2019 + A11:2021, er det ikke nødvendig med ytterligere sikkerhetsinstruksjoner for dette produktet.	
Avfallshåndtering	Produkter som ikke er brukte eller ikke er kontaminerte kan brennes i henhold til lowerket eller leveres til avfallshåndtering. Kontaminerte produkter må avhendes etter gjeldende lovverk og forskrifter i henhold til type forurensning.	
Holdbarhet	5 år etter produksjonsdato, så lenge produktet er ubrukt og korrekt oppbevart.	
Oppbevaring	<p>Beskyttes mot direkte sollys.</p> <p>Skal oppbevares tørt.</p> <p>Feil oppbevaring kan føre til en reduksjon av holdbarheten.</p>	 
Sporbarhet	Sporbarhet for batcher fra behovsbestemmelse til transport fra lager. Produktdatablad Versjon 2 gyldig fra batch 2617 +	

Forpakning

Gjenvinning	<p>Lisensiert i henhold til VerpackG, lisensnummer DE1618662887322.</p> <p>Lever også forpakningen til gjenvinning.</p>	 \$VerpackG
-------------	---	---





www.wiros.de

WEB <https://www.wiros.de/shop/kittel/pppe-kittel/wiroclever-flex/>

Variant 1

Salgsenhet 100 Stk./Kartong

Emballasjenivå 1 10 Stk./Plastpose

Minste bestillingsvolum 1 Kartong

Artikkelnumre	Varenummer	Farge	Størrelse	Størrelse (O x L)	Toleranse
	25304502	hvitt+blått	M	≈ 120 x 104/119/134/149 cm ± 3 cm	
	25304503	hvitt+blått	L	≈ 120 x 104/119/134/149 cm ± 3 cm	
GTINs	Varenummer	Unit of Use UDI	Emballasjenivå 1 UDI	Emballasjenivå 2 UDI	Kartong UDI
	25304502	4051642004815	4051642075532	-----	4051642575537
	25304503	4051642006598	4051642075365	-----	4051642575360

Variant 2

Salgsenhet 100 Stk./Kartong

Emballasjenivå 1 10 Stk./Plastpose

Minste bestillingsvolum 1 Kartong

Artikkelnumre	Varenummer	Farge	Størrelse	Størrelse (O x L)	Toleranse
	25304504	hvitt+blått	XL	≈ 144 x 104/119/134/149 cm ± 3 cm	
	25304505	hvitt+blått	XXL	≈ 168 x 104/119/134/149 cm ± 3 cm	
GTINs	Varenummer	Unit of Use UDI	Emballasjenivå 1 UDI	Emballasjenivå 2 UDI	Kartong UDI
	25304504	4051642004808	4051642075303	-----	4051642575308
	25304505	4051642004792	4051642075310	-----	4051642575315

Tallverdiene for størrelser, vekt, styrke og toleranser er å anse som nominelle verdier og kan være avvikende.

Angivelsene er basert på vår nåværende kunnskap. De er ingen garantert forsikring om produkttegenskaper og er ikke å forstå som en rettskraftig kontrakt. Informasjon som er eldre enn 2 år skal bekreftes på nytt.

Med forbehold om feil og mangler.

Produktdatabladene som tilbys tilhører WIROS Wilfried Rosbach GmbH. WIROS Wilfried Rosbach GmbH er eier av alle opphavsrettigheter, utnyttings- og bruksrettigheter av produktdatabladene. Det er ikke tillatt å endre produktdatabladene eller bruke piktogrammene.

Produktdatabladene som leveres kan kun brukes sammen med originale WIROS-produkter.



Informační list výrobku

wiroCLEVER FLEX



PP+PE PLÁŠŤ

PE povlak na rukávech a vpředu | Elastické náplety | Tkanice v oblasti šije a pasu | 2 oddělovací perforace (pro zkrácení délky)



PREMIUM+



Informační list výrobku

wiroCLEVER FLEX



Výrobce

Firma + Adresa	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Německo
SRN	DE-MF-000004956
Obchodní značka	care & serve®

Zmocnění

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Švýcarsko
--------	--

Popis výrobku

Kategorie	PREMIUM+
Označení výrobku	care & serve® PREMIUM+ wiroCLEVER FLEX PP+PE plášť PE povlak na rukávech a vpředu Elastické náplety Tkanice v oblasti šíše a pasu 2 oddělovací perforace (pro zkrácení délky)
Vlastnosti výrobku	PE povlak na rukávech a vpředu Elastické náplety Tkanice v oblasti šíše a pasu 2 oddělovací perforace (pro zkrácení délky)

Materiál

Materiál	Polypropylenová netkaná textilie s povrstvením polyethylenem
Hmotnost materiálu	PP: ≈ 20 g/m ² (±2 g/m ²)

Použití

Účel použití	Lékařský ochranný oděv ve smyslu technických předpisů pro biologické činitele (TRBA 250) k prevenci kontaminace pracovního nebo civilního oděvu při zákrocích nebo provádění péče v důsledku kontaktu s krví, sekrety, exkrementy nebo jiným kontaminovaným materiálem.
Styk s potravinami	Krátkodobý nepřímý styk s potravinami je povolen.
Oblast použití	Neprovádí se přímé léčebné použití na pacientovi. Zdravotnický ochranný oděv slouží k zakrytí oděvu a/nebo vlasů.
Skupina použití	Zaměstnanci a návštěvníci laboratoří, farmaceutického průmyslu, nemocnic nebo podobných institucí.
Skupina pacientů	Zdravotnické ochranné oděvy jsou vhodné pro všechny skupiny pacientů.
Indikace	Zdravotnický oděv jako bariéra k zakrytí oděvu a/nebo vlasů.
Kontraindikace	Žádné známé kontraindikace.
Pokyny pro použití	Jednorázový výrobek nesterilní
Omezení	Nejedná se o osobní ochranné prostředky (OOP) Nevhodné pro balení a skladování potravin.
Informace	Všechny závažné nehody v přímé souvislosti s tímto výrobkem musí být nahlášeny výrobci a odpovědným orgánům.
Oblasti použití	Nemocnice Domov důchodců a jiné odborné kruhy Průmysl Farmaceutický průmysl Laboratoř Zpracování potravin HACCP Čištění Hygiena



Informační list výrobku

wiroCLEVER FLEX



Další informace o materiálu

bez latexu



Informace týkající se zdraví

V případě podráždění kůže nebo alergických reakcí okamžitě přestaňte výrobek používat a vyhledejte lékařskou pomoc.

Podle současného stavu techniky výroby neobsahují žádné toxické, karcinogenní, mutagenní ani reprotoxické látky, pokud jsou používány v souladu se svým určením.

Tyto výrobky neobsahují latexové složky a jsou považovány za hypoalergenní. Mohou však způsobit podráždění citlivé pokožky. Dlouhodobé nošení může omezit větrání pokožky, což může vést k jejímu podráždění.

Standardy

Označení CE

Zdravotnický prostředek třídy I podle EU 2017/745



SRN

DE-MF-000004956

Basis UDI DI

4051642-wiroCLEVERFLEX-X5

Označení CE

Označení CE zaručuje volný pohyb výrobků a zboží v rámci Evropského

hospodářského společenství. Výrobek s označením CE splňuje základní požadavky uvedených evropských nařízení.

VO (EU) 2023/988

Nařízení (EU) č. 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků

VO (EG) 1935/2004

Übersetzung bitte noch eintragen



VO (EU) 10/2011

Nařízení o materiálech a předmětech z plastu určených pro styk s potravinami

Použití

Návod k použití

Před použitím

Ujistěte se prosím, že jste zvolili výrobek vhodný pro vaše potřeby a oblasti použití. Zdravotnický ochranný oděv nenoste, pokud vykazuje nedostatky nebo již byl použit. Zdravotnický ochranný oděv je určen ke krátkodobému použití, v lékařské oblasti je použití omezeno na jednoho pacienta.

Manipulace

Pláště se nosí celistvou stranou dopředu s vázáním vzadu nebo na bocích. Navlečte si plášť na ruce a zavažte tkanice na zátylku a v pase.

Pro vyloučení kontaminace s oblečením doporučujeme, aby plášť vzadu rozvázala druhá osoba a posunula jej přes ramena dopředu. Osoba v plášti uchopí horní konce pláště a při svlékání otočí plášť na rub.

Bezpečnostní upozornění

Podle naší analýzy rizik v souladu s normou EN ISO 14971:2019 + A11:2021 nevyžaduje tento výrobek žádné další bezpečnostní pokyny.

Likvidace

Nepoužité a nekontaminované výrobky lze spálit způsobem šetrným k životnímu prostředí nebo uložit na skládku. Kontaminované výrobky je nutné zlikvidovat v souladu s platnými vnitrostátními zákony a předpisy v závislosti na typu kontaminace.

Životnost

5 let od data výroby, pokud je zboží nepoužité a bylo skladováno správně.

Skladování

Chraňte před přímým slunečním zářením.

Skladujte v suchu.

Nevhodné skladování může vést ke snížení životnosti.



Vysledovatelnost

Vysledovatelnost šarže od zjištění potřeb až po odběr ze skladu.


Informační list výrobku Verze 2 platí od šarže 2617 +

Obal

Recyklace

Licence podle zákona VerpackG, číslo licence: DE1618662887322.

Obal prosím předejte k recyklaci.

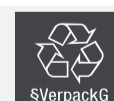

www.wiros.de

WEB

<https://www.wiros.de/shop/kittel/pppe-kittel/wiroclever-flex/>





Varianta 1

Prodejní jednotka	100 kus/Kartón				
Úroveň obalu 1	10 kus/Sáček				
Minimální objednáací množství	1 Kartón				
Čísla výrobků	Číslo výrobku	Barva	Velikost	Velikost (O × D)	Tolerance
	25304502	bílá+modrá	M	≈ 120 x 104/119/134/149 cm ± 3 cm	
	25304503	bílá+modrá	L	≈ 120 x 104/119/134/149 cm ± 3 cm	
GTINs	Číslo výrobku	Unit of Use UDI	Úroveň obalu 1 UDI	Úroveň obalu 2 UDI	Kartón UDI
	25304502	4051642004815	4051642075532	-----	4051642575537
	25304503	4051642006598	4051642075365	-----	4051642575360

Varianta 2

Prodejní jednotka	100 kus/Kartón				
Úroveň obalu 1	10 kus/Sáček				
Minimální objednáací množství	1 Kartón				
Čísla výrobků	Číslo výrobku	Barva	Velikost	Velikost (O × D)	Tolerance
	25304504	bílá+modrá	XL	≈ 144 x 104/119/134/149 cm ± 3 cm	
	25304505	bílá+modrá	XXL	≈ 168 x 104/119/134/149 cm ± 3 cm	
GTINs	Číslo výrobku	Unit of Use UDI	Úroveň obalu 1 UDI	Úroveň obalu 2 UDI	Kartón UDI
	25304504	4051642004808	4051642075303	-----	4051642575308
	25304505	4051642004792	4051642075310	-----	4051642575315

Číselné údaje o rozměrech, hmotnostech, tloušťkách a tolerancích je nutné chápat jako cílové hodnoty, a proto mohou být odlišné.

Veškeré údaje jsou založeny na aktuálním stavu našich vědomostí. Nejsou ujištěním o vlastnostech výrobku a nevyplývá z nich žádný právní vztah smluvní povahy. Údaje starší než 2 roky nechte prosím znovu ověřit.

Chyby při zadávání a omyly vyhrazeny.

Poskytnuté informační listy výrobků jsou majetkem společnosti WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Společnost WIROS Wilfried Rosbach GmbH vlastní veškerá autorská/uživatelská a uživatelská práva k informačním listům výrobků. Není dovoleno informační listy výrobků měnit nebo používat jejich piktogramy. Poskytnuté informační listy výrobků smí být použity pouze v souvislosti s originálními výrobky WIROS.



PP+PE LÁTOGATÓI KÖPENY

PE-bevonat a karon és az előoldalon | Gumipertlis | Kötők a nyakon és a derékon | 2 elválasztó perforáció (a hosszúság lerövidítése érdekében)



PREMIUM+





Gyártó

Cég + Cím	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Németország
SRN	DE-MF-000004956
Márkanév	care & serve®

Meghatalmazások

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Svájc
--------	--

Termékleírás

Kategória	PREMIUM+
Termék megnevezése	care & serve® PREMIUM+ wiroCLEVER FLEX PP+PE látogatói köpeny PE-bevonat a karon és az előoldalon Gumipertlis Kötők a nyakon és a derékon 2 elválasztó perforáció (a hosszúság lerövidítése érdekében)
Termékjellemzők	PE-bevonat a karon és az előoldalon Gumipertlis Kötők a nyakon és a derékon 2 elválasztó perforáció (a hosszúság lerövidítése érdekében)

Anyaga

Anyaga	Polipropilén spin flíz polietilén bevonattal
Anyag tömege	PP: ≈ 20 g/m ² (± 2 g/m ²)

Használat

Felhasználási cél	A biológiai hatóanyagok műszaki szabályainak (TRBA 250) megfelelő orvosi védőruházat, amellyel elkerülheti, hogy munkaruhája vagy mindennapi ruházata a beavatkozások vagy a páciensek gondozása során vérrel, váladékkal, ürülékkel vagy más szennyezett anyaggal való közvetlen érintkezés révén beszennyeződjön.
-------------------	---

Élelmiszerrel való érintkezés	Rövid ideig tartó közvetett érintkezés élelmiszerrel megengedett.
-------------------------------	---

Alkalmazási terület	A használatával kapcsolatban nincs közvetlen orvosi beavatkozás a páciensen. Az orvosi védőruházat a ruházat és/vagy a haj eltakarását szolgálja.
---------------------	---

Alkalmazási csoport	A laboratóriumokban, gyógyszeriparban, kórházakban vagy a felsoroltakhoz hasonló intézményben dolgozó alkalmazottak, és ezen intézmények látogatói.
---------------------	---

Pácienscsoport	Az orvosi védőruházat az összes pácienscsoport számára alkalmas.
----------------	--


Indikáció	Akadályként szolgáló, a ruházat és/vagy haj eltakarására szánt orvosi ruházat.
-----------	--

Ellenjavallat	Nincs ismert ellenjavallat.
---------------	-----------------------------

Felhasználásra vonatkozó előírás	Egyszer használatos termék nem steril
----------------------------------	--



Korlátozás	Nem egyéni védőeszköz Nem alkalmas élelmiszer csomagolására és tárolására.
------------	---

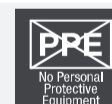

Megjegyzés	A termékkel közvetlenül kapcsolatos minden súlyos eseményről jelenteni kell a gyártónak és a felelős hatóságoknak.
------------	--

Felhasználási területek	Kórház idősotthon többek között szakmai körök Ipar gyógyszeripar Labor Élelmiszer-feldolgozás HACCP-rendszer Tisztítás higiénia
-------------------------	--



Termékadatlap

wiroCLEVER FLEX



Az anyagra vonatkozó további információk

latex-mentes



Egészségügyi megjegyzés

Bőrirritáció vagy allergiás reakció esetén a használatot azonnal le kell állítani, és orvosi tanácsot kell kérni.

A technika jelen állása szerinti ismeretek értelmében a rendeltetésszerűen használt termékeink nem tartalmaznak mérgező, rákkeltő, mutagén vagy reprodukzív toxicitású anyagokat.

Ezek a termékek nem tartalmaznak latex-összetevőket, és hipoallergénnek minősülnek. Azonban az érzékeny bőrön irritációkat okozhatnak. A hosszabb ideig tartó viselés korlátozhatja a bőr szellőzését, ami bőrirritációhoz vezethet.

Szabványok

CE-megjelölés

Az (EU) 2017/745 rendelet I. csoportjába tartozó orvostechnikai eszköz



SRN

DE-MF-000004956

Basis UDI DI

4051642-wiroCLEVERFLEX-X5

CE-megjelölés

A CE-jelölés garantálja a termékek és áruk szabad forgalmazását az Európai

Gazdasági Közösségen belül. A CE-jelöléssel ellátott termék megfelel a mindenkor érvényes európai rendeletek alapvető követelményeinek.

VO (EU) 2023/988

988/2023 sz., az általános termékbiztonságról szóló EU-rendelet

VO (EG) 1935/2004

Az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyokról szóló rendelet



VO (EU) 10/2011

Rendelet az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyokról

Alkalmazás

Használati utasítás

Használat előtt

Győződjön meg arról, hogy a szükségleteinek és az alkalmazási területnek megfelelő terméket választotta ki. Ne viseljen hiányosságokat felmutató vagy már használt orvosi védőruházatot. Az orvosi védőruházatot rövid ideig tartó használatra tervezték, és orvosi használat esetén egy adott védőruházat használatra egyetlen páciensre korlátozódik.

Használat

A látogatói köpenyeket a zárt oldallal előrefelé kell viselni, és hátul vagy oldalban kell összezárni. Ehhez csúsztassa mindkét karját a látogatói köpeny ujjába, a kötőket pedig a nyakrészen és a derékon kösse össze.

Annak érdekében, hogy a látogatói köpeny levetése során elkerülhesse a ruhadarabbal történő szennyeződés veszélyét, javasoljuk, hogy egy második személy nyissa szét hátul a kötényt, és a vállakon átbújatva csúsztassa előre az anyagot. A viselő ezt követően megfogja a kötény felső végeit, és levetéskor kifordítja a kötényt.

Biztonsági figyelmeztetés

Az EN ISO 14971:2019 + A11:2021 szerint végzett kockázatelemzésünk értelmében erre a termékre vonatkozóan nincs szükség további biztonsági utasításokra.

Ártalmatlanítás

A fel nem használt és nem kontaminált termékeket környezetbarát módon el lehet égetni vagy ártalmatlanítani. A szennyezett termékeket a vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően, a kontamináció típusa szerint kell megsemmisíteni.

Eltarthatóság

5 év a gyártás dátumától számítva, amennyiben nem használják fel és helyesen tárolják.

Tárolás

Védje a napfénytől.

Száraz helyen tárolandó.

A szakszerűtlen tárolás csökkentheti az eltarthatóságot.



Visszakövethetőség

A tételekkel kapcsolatos nyomon-követhetőség a szükségletek megadásától a raktárból történő kilépéséig.


Termékadatlap Verzió 2 érvényes ettől a tételtől 2617 +

Csomagolás

Recycling

Engedélyezve a VerpackV szerint, licenz-szám: DE1618662887322.

Kérjük, adja le a csomagolást újrahasznosítás céljából.

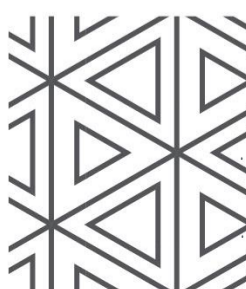



www.wiros.de

WEB <https://www.wiros.de/shop/kittel/pppe-kittel/wiroclever-flex/>

Változatok 1

Eladási egység 100 Darab/Karton

1. Csomagolási szint 10 Darab/Polybag

Minimális rendelési mennyiség 1 Karton

Cikkszámok	Cikkszám	RAL	Méret	Ruhaméret (méret x hossz)	Tűrés
	25304502	fehér+kék	M	≈ 120 x 104/119/134/149 cm ± 3 cm	
	25304503	fehér+kék	L	≈ 120 x 104/119/134/149 cm ± 3 cm	

GTINs	Cikkszám	Unit of Use UDI	Csomagolási szintek 1 UDI	Csomagolási szintek 2 UDI	Karton UDI
	25304502	4051642004815	4051642075532	-----	4051642575537
	25304503	4051642006598	4051642075365	-----	4051642575360

Változatok 2

Eladási egység 100 Darab/Karton

1. Csomagolási szint 10 Darab/Polybag

Minimális rendelési mennyiség 1 Karton

Cikkszámok	Cikkszám	RAL	Méret	Ruhaméret (méret x hossz)	Tűrés
	25304504	fehér+kék	XL	≈ 144 x 104/119/134/149 cm ± 3 cm	
	25304505	fehér+kék	XXL	≈ 168 x 104/119/134/149 cm ± 3 cm	

GTINs	Cikkszám	Unit of Use UDI	Csomagolási szintek 1 UDI	Csomagolási szintek 2 UDI	Karton UDI
	25304504	4051642004808	4051642075303	-----	4051642575308
	25304505	4051642004792	4051642075310	-----	4051642575315

A méretekre, súlyokra, vastagságokra és tűrésre vonatkozó számadatokat névleges értékeként kell érteni, és azok eltérhetnek.

Az információ ismereteink jelenlegi állásán alapul. Ezek nem garantálják a termék tulajdonságait, és nem indokolják a jog szerződéses megértését. A 2 évnél régebbi információkra, kérjük, kérjen ismételt megerősítést.

Fenntartjuk a hibák és a tévedések jogát.

A rendelkezésre bocsátott termékismertető adatlapok a WIROS Wilfried Rosbach GmbH tulajdonát képezik. A termékismertető adatlapokhoz tartozó minden szerzői/használati és értékesítési jog a WIROS Wilfried Rosbach GmbH tulajdonában áll. Tilos a termékismertető adatlapok módosítása vagy a piktogramok használata. A rendelkezésre bocsátott termékismertető adatlapok csak az eredeti WIROS termékekre vonatkoznak.



Informačný list výrobku

wiroCLEVER FLEX



PP + PE PLÁŠŤ

PE-Beschichtung an Armen & Front | Gummizugbündchen | Bindebänder in Nacken & Taille | 2 Abtrennperforationen (zum Kürzen der Länge)



PREMIUM+



Informačný list výrobku

wiroCLEVER FLEX



Výrobca

Firma + Adresa	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Nemecko
SRN	DE-MF-000004956
Ochranná známka	care & serve®

Oprávnenia

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Švajčiarsko
--------	--

Opis výrobku


Kategória	PREMIUM+
Označenie výrobku	care & serve® PREMIUM+ wiroCLEVER FLEX PP + PE plášť PE-Beschichtung an Armen & Front Gummizugbündchen Bindebänder in Nacken & Taille 2 Abtrennperforationen (zum Kürzen der Länge)
Vlastnosti výrobku	Vrstva PE na rukách a prednej časti Manžety na gumičku Viazacie pásy na šiji a páse 2 deliace perforácie (na skrátenie dĺžky)

Materiál

Materiál	Polypropylénové rúno vyrobené pod dýzou s polyetylénovou vrstvou
Hmotnosť materiálu	PP: $\approx 20 \text{ g/m}^2 (\pm 2 \text{ g/m}^2)$

Použitie

Účel použitia	Zdravotnícky ochranný odev v zmysle technických predpisov pre biologické pracovné látky (TRBA 250) na predchádzanie kontaminácie pracovného alebo súkromného oblečenia pri zásahoch alebo ošetrovaní priamym kontaktom s krvou, sekrétmi, výmeškami alebo iným kontaminovaným materiálom.
Kontakt s potravinami	Krátkodobý nepriamy kontakt s potravinami je prípustný.
Oblasť použitia	Neuskutočňuje sa žiadna priama aplikácia na pacientoch. Zdravotnícke ochranné oblečenie slúži na zakrytie oblečenia a/alebo vlasov.
Skupina použitia	Zamestnanci a návštevníci laboratórií, farmaceutický priemysel, nemocnice alebo podobné zariadenia.
Skupina pacientov	Zdravotnícke ochranné oblečenie je vhodné pre všetky skupiny pacientov.
Indikácia	Zdravotnícke oblečenie ako bariéra na zakrytie oblečenia a/alebo vlasov.
Kontraindikácia	Nie sú známe žiadne kontraindikácie.
Pokyn na použitie	Jednorazový výrobok nesterilné
Obmedzenie	Nejde o OOP (osobné ochranné pomôcky) Nevhodné na balenie a skladovanie potravín.
Upozornenie	Všetky vážne udalosti priamo súvisiace s týmto výrobkom musia byť hlásené výrobcovi a zodpovedným orgánom.
Oblasti použitia	Nemocnica domov dôchodcov a iné odborné odvetvia Priemysel Farmaceutický priemysel Laboratórium Spracovanie potravín HACCP Čistenie Hygiena

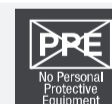

Informačný list výrobku

wiroCLEVER FLEX



Doplňujúce informácie o materiáli bez latexu



Zdravotné upozornenie Ak dôjde k podráždeniu pokožky alebo alergickým reakciám, okamžite prestaňte výrobok používať a vyhľadajte lekársku pomoc. Podľa súčasného stavu techniky neobsahujú výrobky žiadne toxické, karcinogénne a mutagénne látky ani látky toxické pre reprodukciu, ak sa používajú v súlade s ich zamýšľaným použitím. Tieto výrobky neobsahujú žiadne latexové zložky a sú považované za hypoalergénne. Na citlivej pokožke však môžu spôsobiť podráždenia. Pri dlhšom nosení môže byť obmedzené vetranie pokožky, čo môže viesť k podráždeniu pokožky.

Štandardy

Označenie CE Zdravotnícky výrobok triedy I podľa EU 2017/745



SRN DE-MF-000004956

Basis UDI DI 4051642-wiroCLEVERFLEX-X5

Označenie CE

Označenie CE zaručuje voľný pohyb výrobkov a tovarov v rámci Európskeho hospodárskeho spoločenstva. Výrobok s označením CE zodpovedá základným požiadavkám uvedených európskych nariadení.

VO (EU) 2023/988 Nariadenie (EÚ) č. 2023/988 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov

VO (EG) 1935/2004 Nariadenie o materiáloch a predmetoch z plastu, ktoré sú určené na kontakt s potravinami



VO (EU) 10/2011 Nariadenie o materiáloch a predmetoch z umelej hmoty, ktoré sú určené na styk s potravinami

Použitie

Návod na použitie Pred použitím Uistite sa, že ste si zvolili vhodný výrobok na vaše potreby a oblasti použitia. Nenoste zdravotnícke ochranné oblečenie, keď vykazuje nedostatky alebo už bolo použité. Zdravotnícke ochranné oblečenie je určené na krátkodobé použitie, v zdravotníckej oblasti je použitie obmedzené na jedného pacienta.

Manipulácia

Plášť sa nosí uzavretou stranou dopredu a uzavretý vzadu alebo na boku. Pri obliekaní vkláňte rukami do rukávov a zaviažte viazacie šnúrky na šiji a na páse.

Aby sa pri vyzliekaní zabránilo kontaminácii s oblečením, odporúčame, aby plášť vzadu rozviazala druhá osoba a posunula ho dopredu cez plecia. Nositeľ chytí horné konce pláštá a obráti plášť pri vyzliekaní na rub.

Bezpečnostné upozornenie Podľa našej analýzy rizík v zmysle EN ISO 14971:2019 + A11:2021 nie sú pre tento výrobok potrebné žiadne ďalšie bezpečnostné pokyny.

Likvidácia Nepoužité a nekontaminované výrobky je možné spáliť ekologickým spôsobom alebo uložiť na skládku. Kontaminované výrobky musia byť zlikvidované podľa platných národných zákonov a predpisov v závislosti od druhu kontaminácie.

Trvanlivosť 5 rokov od dátumu výroby, pokiaľ výrobok nebol použitý a bol správne skladovaný.

Skladovanie Chráňte pred slnečným žiarením.

Skladujte na suchom mieste.

Nevhodné skladovanie môže spôsobiť skrátenie trvanlivosti.



Vysledovateľnosť Vysledovateľnosť vzťahujúca sa na šaržu od zistenia potrieb až po odber zo skladu. Informačný list výrobku Verzia 2 platné od šarže 2617 +

Balenie

Recyklácia Licencované podľa zákona VerpackG, číslo licencie DE1618662887322. Obal odovzdajte na recykláciu.





www.wiros.de

WEB <https://www.wiros.de/shop/kittel/pppe-kittel/wiroclever-flex/>

Variant 1

Predajná jednotka 100 Kus/Kartón

Úroveň balenia 1 10 Kus/Polyetylénové vrečko

Minimálne objednané množstvo 1 Kartón

Číslo výrobku	Číslo výrobku	Farba	Veľkosť	Rozmer (obvod x dĺžka)	Tolerancia
	25304502	biela+modro	M	≈ 120 x 104/119/134/149 cm ± 3 cm	
	25304503	biela+modro	L	≈ 120 x 104/119/134/149 cm ± 3 cm	

GTINs	Číslo výrobku	Unit of Use UDI	Úroveň balenia 1 UDI	Úroveň balenia 2 UDI	Kartón UDI
	25304502	4051642004815	4051642075532	-----	4051642575537
	25304503	4051642006598	4051642075365	-----	4051642575360

Variant 2

Predajná jednotka 100 Kus/Kartón

Úroveň balenia 1 10 Kus/Polyetylénové vrečko

Minimálne objednané množstvo 1 Kartón

Číslo výrobku	Číslo výrobku	Farba	Veľkosť	Rozmer (obvod x dĺžka)	Tolerancia
	25304504	biela+modro	XL	≈ 144 x 104/119/134/149 cm ± 3 cm	
	25304505	biela+modro	XXL	≈ 168 x 104/119/134/149 cm ± 3 cm	

GTINs	Číslo výrobku	Unit of Use UDI	Úroveň balenia 1 UDI	Úroveň balenia 2 UDI	Kartón UDI
	25304504	4051642004808	4051642075303	-----	4051642575308
	25304505	4051642004792	4051642075310	-----	4051642575315

Číselné údaje o rozmeroch, hmotnostiach, hrúbkach a toleranciách je potrebné chápať ako požadované hodnoty a môžu sa líšiť.

Údaje vychádzajú z aktuálneho stavu našich znalostí. Nepredstavujú garantovaný prísľub vlastností výrobku, a preto nezakladajú žiadny právny vzťah zmluvnej povahy. Údaje, ktoré sú staršie ako 2 roky, si nechajte potvrdiť nanovo.

Chyby pri zadávaní a omyly sú vyhradené.

Poskytnuté karty údajov o výrobku sú vlastníctvom spoločnosti WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Spoločnosť WIROS Wilfried Rosbach GmbH je vlastníkom všetkých autorských práv/práv na používanie a práv na využitie kariet údajov o výrobku. Karty údajov o výrobku nie je dovolené meniť alebo používať piktogramy. Poskytnuté karty údajov o výrobku sa môžu používať len v súvislosti s originálnymi výrobkami WIROS.



Podatkovni list izdelka

wiroCLEVER FLEX



PP+PE HALJA

PE sloj na rokah in spredaj | Elastična manšeta | Vezni trakovi na vratu in pasu | 2 ločilni perforaciji (za skrajšanje dolžine)



PREMIUM+



Podatkovni list izdelka

wiroCLEVER FLEX



Proizvajalec

Podjetje + Naslov	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Nemčija
SRN	DE-MF-000004956
Blagovna znamka	care & serve®

Pooblastila

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Švica
--------	--

Opis izdelka


Kategorija	PREMIUM+
Opis izdelka	care & serve® PREMIUM+ wiroCLEVER FLEX PP+PE halja PE sloj na rokah in spredaj Elastična manšeta Vezni trakovi na vratu in pasu 2 ločilni perforaciji (za skrajšanje dolžine)
Lastnosti izdelka	PE sloj na rokah in spredaj Elastična manšeta Vezni trakovi na vratu in pasu 2 ločilni perforaciji (za skrajšanje dolžine)

Material

Material	Polipropilenska mehansko rezistentna tkanina s polietilenskim laminiranjem
Teža materiala	PP: ≈ 20 g/m ² (± 2 g/m ²)

Uporaba

Namen uporabe	Medicinska zaščitna oblačila v skladu s tehničnimi pravili za biološke delovne snovi (TRBA 250) za preprečevanje okužbe delovnih ali zasebnih oblačil pri posegih ali ob negovalnih ukrepih zaradi neposrednega stika s krvjo, sekrecijo, ekskrecijo ali drugim okuženim materialom.
Stik z živili	Dovoljen je kratek posredni stik z živili.
Področje uporabe	Ne izvaja se nikakršna neposredna uporaba na pacientih. Medicinska zaščitna oblačila so namenjena prekrivanju oblačil in/ali las.
Skupina uporabe	Sodelavci in obiskovalci laboratorijev, farmacevtske industrije, bolnišnic ali drugih ustanov.
Skupina pacientov	Medicinska zaščitna oblačila so primerna za vse skupine pacientov.
Indikacija	Medicinska oblačila kot pregrada za prekrivanje oblačil in/ali las.
Kontraindikacija	Ni znanih kontraindikacij.
Napotek za uporabo	Izdelek za enkratno uporabo nesterilno
Omejitev	Ni OZO (osebna zaščitna oprema) Ni primerno za pakiranje in shranjevanje hrane.
Napotek	Vse resne nezgode v neposredni povezavi s tem izdelkom je treba sporočiti proizvajalcu in pristojnim organom.
Področja uporabe	Bolnišnice Domovi za ostarele in druge strokovne ustanove Industrija Farmacevtska industrija Laboratorij Predelava živil HACCP Čiščenje Higiena

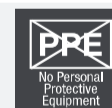

Podatkovni list izdelka

wiroCLEVER FLEX



Dodatne informacije o materialu	ne vsebuje lateksa	
Napotek za zdravje	V primeru draženja kože ali alergijskih reakcij takoj prenehajte z uporabo in poiščite zdravniško pomoč. Kolikor je znano glede na trenutno stanje tehnike, izdelki ne vsebujejo strupenih, rakotvornih, mutagenih ali za razmnoževanje strupenih snovi, če se uporabljajo v skladu s predvidenim namenom. Ti izdelki ne vsebujejo sestavin lateksa in veljajo za hipoalergene. Vendar pa lahko povzročijo draženje občutljive kože. Dolgotrajno nošenje lahko omeji zračenje kože, kar lahko povzroči draženje kože.	

Standardi

Oznaka CE	Medicinski izdelek razreda I v skladu z 2017/745		
SRN	DE-MF-000004956		
Basis UDI DI	4051642-wiroCLEVERFLEX-X5		
	Oznaka CE Oznaka CE zagotavlja prost pretok izdelkov in blaga znotraj Evropske gospodarske skupnosti. Z oznako CE označen izdelek ustreza osnovnim zahtevam navedene evropske uredbe.		
VO (EU) 2023/988	Uredba (EU) št. 2023/988 o splošni varnosti proizvodov		
VO (EG) 1935/2004	Uredba o materialih in izdelkih iz plastike, namenjenih stiku z živili		
VO (EU) 10/2011	Uredba o polimernih materialih in izdelkih namenjenih za stik z živili		

Uporaba

Navodila za uporabo	<p>Pred uporabo Prosimo, prepričajte se, da ste za svoja področja uporabe in potrebe izbrali ustrezen izdelek. Prosimo, da medicinskih zaščitnih oblačil ne nosite, če so pomanjkljiva ali že uporabljena. Medicinska zaščitna oblačila so predvidena za kratkotrajno uporabo v zdravstveni dejavnosti in, da jih nosijo pacienti.</p> <p>Uporaba Halje se nosijo z zaprto stranjo naprej in zaprejo se zadaj ali na strani. V ta namen dajte roke v rokave in vezne trakove zaprite na vratu in na pasu. Da bi pri slačenju preprečili kontaminacijo z oblačili priporočamo, da druga oseba haljo zadaj odpre in jo potisne naprej preko ramen. Nosilec prime zgornje konce halje in haljo pri slačenju obrne na levo.</p>		
Varnostni napotek	Glede na našo analizo tveganja v skladu s standardom EN ISO 14971:2019 + A11:2021 za ta izdelek niso potrebna dodatna varnostna navodila.		
Odlaganje	Neuporabljene izdelke in izdelke, ki niso kontaminirani, lahko zažgete na okolju prijazen način ali pa jih odložite na deponijo. Kontaminirane izdelke je treba odložiti v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo in predpisi glede na vrsto onesnaženosti.		
Rok trajanja	5 let od datuma proizvodnje, če so neuporabljene in pravilno skladiščene.		
Skladiščenje	Zaščititi pred sončnim sevanjem. Skladiščiti na suhem. Nepravilno skladiščenje lahko pripelje do zmanjšanja obstojnosti.		
Sledljivost	Sledljivost, ki se nanaša na posamezne serije, od ugotavljanja potreb do zmanjšanja zalog Podatkovni list izdelka Različica 2 veljavno od serije 2617 +		

Embalaža

Recikliranje	Licenca v skladu z zakonom o embalaži, številka licence DE1618662887322. Prosimo, da embalažo oddate v recikliranje.	
--------------	---	--

www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/kittel/pppe-kittel/wiroclever-flex/
-----	---





Različica 1

Prodajna enota	100 kos/Karton				
Raven pakiranja 1	10 kos/Poliestrska vrečka				
Minimalna količina naročila	1 Karton				
Številke artiklov	Številka proizvoda	Barva	Velikost	Velikost (U x L)	Toleranca
	25304502	bela+modro	M	≈ 120 x 104/119/134/149 cm ± 3 cm	
	25304503	bela+modro	L	≈ 120 x 104/119/134/149 cm ± 3 cm	
GTINs	Številka proizvoda	Unit of Use UDI	Raven pakiranja 1 UDI	Raven pakiranja 2 UDI	Karton UDI
	25304502	4051642004815	4051642075532	-----	4051642575537
	25304503	4051642006598	4051642075365	-----	4051642575360

Različica 2

Prodajna enota	100 kos/Karton				
Raven pakiranja 1	10 kos/Poliestrska vrečka				
Minimalna količina naročila	1 Karton				
Številke artiklov	Številka proizvoda	Barva	Velikost	Velikost (U x L)	Toleranca
	25304504	bela+modro	XL	≈ 144 x 104/119/134/149 cm ± 3 cm	
	25304505	bela+modro	XXL	≈ 168 x 104/119/134/149 cm ± 3 cm	
GTINs	Številka proizvoda	Unit of Use UDI	Raven pakiranja 1 UDI	Raven pakiranja 2 UDI	Karton UDI
	25304504	4051642004808	4051642075303	-----	4051642575308
	25304505	4051642004792	4051642075310	-----	4051642575315

Številčne navedbe k meram, težam, debelinam in tolerancam, se razumejo kot predvidene vrednosti in lahko odstopajo.

Navedbe se opirajo na aktualno stanje našega znanja. Niso zagotovilo o lastnostih izdelka in ne utemeljujejo nobenega pogodbenega pravnega razumevanja. Za navedbe, starejše od 2 let, zagotovite ponovno potrditev.

Pridržana pravica do napak pri vnosu in pomot.

Razpoložljivi podatkovni listi proizvodov so last podjetja WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Podjetje WIROS Wilfried Rosbach GmbH je lastnik vseh avtorskih pravic/pravic uporabe in pravic do izkoriščanja podatkovnih listov proizvoda. Informativnih listov proizvodov ni dovoljeno spreminjati ali uporabljati piktogramov. Razpoložljivi podatkovni listi izdelka se lahko uporabljajo samo v povezavi z originalnimi izdelki WIROS.



Fișa produsului

wiroCLEVER FLEX



HALAT PP+PE

Strat PE mâneci & partea frontală | Benzi din elastic | Benzi de prindere la gât & în talie | 2 perforații separatoare (pentru scurtarea lungimii)



PREMIUM+



Fișa produsului

wiroCLEVER FLEX



Producător

Firmă + Adresa	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Germania
SRN	DE-MF-000004956
Marca comercială	care & serve®

Împuterniciri

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Elveția
--------	--

Descrierea produsului

Categorie	PREMIUM+
Denumire produs	care & serve® PREMIUM+ wiroCLEVER FLEX Halat PP+PE Strat PE mâneci & partea frontală Benzi din elastic Benzi de prindere la gât & în talie 2 perforații separatoare (pentru scurtarea lungimii)
Proprietăți produs	Strat PE mâneci & partea frontală Benzi din elastic Benzi de prindere la gât & în talie 2 perforații separatoare (pentru scurtarea lungimii)

Material

Material	Insertie țesută din fir filamentar polipropilenă cu strat din polietilenă
Greutate material	PP: ≈ 20 g/m ² (± 2 g/m ²)

Utilizare

Scopul utilizării	Îmbrăcăminte de protecție medicală în conformitate cu Regulile Tehnice pentru Substanțe de Lucru Biologice (TRBA 250) pentru evitarea contaminării îmbrăcăminții de lucru sau private în cazul intervențiilor sau a măsurilor de îngrijire prin contactul direct cu sângele, secrețiile, excrețiile sau alte materiale contaminate.
Contactul cu alimentele	Este permis un contact indirect, de scurtă durată, cu produsele alimentare.
Domeniul de aplicare	Nu are loc o aplicare directă medicală pe pacienți. Îmbrăcăminte medicală de protecție are ca scop acoperirea îmbrăcăminții și/sau a părului.
Categoria de aplicare	Angajații și vizitatorii din laboratoare, industria farmaceutică, spitale sau alte instituții.
Categorie pacienți	Îmbrăcăminte medicală de protecție este adecvată pentru toate categoriile de pacienți
Indicații	Îmbrăcăminte medicală ca protecție pentru acoperirea îmbrăcăminții și/sau a părului.
Contraindicații	Nu există contraindicații cunoscute.
Indicații de utilizare	Produs de unică folosință nesteril
Limitare	Fără PSA (echipament personal de protecție) Nu sunt adecvate pentru ambalarea și depozitarea alimentelor.
Indicație	Toate incidentele grave legate direct de acest produs trebuie raportate producătorului și autorităților responsabile.
Domenii de utilizare	Spital Azil de bătrâni și alte grupuri de specialitate Industrie Industria farmaceutică Laborator Prelucrarea alimentelor HACCP Curățare Igienă



Fișa produsului

wiroCLEVER FLEX



Informații suplimentare referitoare la materiale	fără latex	
--	------------	--

Indicații de sănătate	<p>Dacă apar iritații ale pielii sau reacții alergice, opriți imediat utilizarea și solicitați sfatul medicului.</p> <p>Conform stadiului actual al tehnologiei, produsele nu conțin substanțe toxice, cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere, cu condiția să fie utilizate conform scopului lor prevăzut.</p> <p>Aceste produse nu conțin componente din latex și sunt considerate hipoalergene. Totuși, ele pot cauza iritații în cazul pielii sensibile. Purtarea îndelungată poate împiedica pielea să respire, ceea ce poate duce la iritarea pielii.</p>
-----------------------	---

Standarde

Marcaj CE	Produs medicinal clasa I conform UE 2017/745		
SRN	DE-MF-000004956		
Basis UDI DI	4051642-wiroCLEVERFLEX-X5		
	Marcaj CE		
	Marcajul CE garantează libera circulație a produselor și mărfurilor în interiorul Comunității Economice Europene. Produsul marcat cu CE respectă cerințele de bază ale reglementărilor europene menționate.		
VO (EU) 2023/988	Regulamentul (UE) nr. 2023/988 referitor la siguranța generală a produsului		
VO (EG) 1935/2004	Regulament privind materialele și obiectele din plastic care sunt prevăzute pentru a intra în contact cu alimentele.		
VO (EU) 10/2011	Regulament privind materialele și obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare		

Utilizare

Instrucțiuni de utilizare	<p>Înainte de utilizare</p> <p>Vă rugăm să vă asigurați că ați ales produsul adecvat pentru nevoile dvs. și pentru domeniile de utilizare. Vă rugăm nu purtați îmbrăcămintea de protecție dacă prezintă urme de deteriorare sau de uzură. Îmbrăcămintea de protecție este destinată uzului de scurtă durată, în domeniul medical utilizarea lor este limitată pentru un pacient/pacientă.</p> <p>Manipulare</p> <p>Halatul se poartă cu partea închisă în față și închis sau în închis pe laterală. Pentru acest lucru se introduc brațele în manșete și benzile de prindere se prind după gât sau în talie.</p> <p>Pentru a împiedica contaminarea cu îmbrăcămintea la dezbrăcare, se recomandă ca o a doua persoană să deschidă halatul la spate și să în tragă în față peste umeri. Purtătorul prinde marginile superioare ale halatului și rotește halatul la stânga pentru a îl scoate.</p>		
Indicație de siguranță	Conform analizei noastre de risc ce respectă EN ISO 14971:2019 + A11:2021, acest produs nu necesită indicații suplimentare de siguranță.		
Înlăturare	Produsele neutilizate și necontaminate pot fi arse conform prevederilor mediului sau pot fi eliminate la punctele de colectare. Produsele contaminate trebuie eliminate conform legilor și prevederilor naționale în vigoare în funcție de tipul de contaminare.		
Durată de valabilitate	5 ani de la data fabricației, în măsura în care sunt neutilizate și în cazul unei depozitări corecte.		
Depozitare	A se proteja contra radiațiilor solare. Depozitare uscată Depozitarea necorespunzătoare poate duce la reducerea valabilității.		
Trasabilitatea	Trasabilitatea în funcție de lot de la redarea necesarului până la ieșirea din depozit. Fișa produsului Versiune 2 valabil de la lotul 2617 +		

Ambalaj

Reciclare	Licențiat conform ambalajului, număr licență DE1618662887322. Vă rugăm să duceți ambalajul la reciclare.		
-----------	---	--	--



Fișa produsului

wiroCLEVER FLEX



www.wiros.de

WEB <https://www.wiros.de/shop/kittel/pppe-kittel/wiroclever-flex/>

VARIANTĂ 1

Unitate de vânzare 100 bucată/Carton

Strat de ambalaj 1 10 bucată/Pungă din plastic

Cantitate minimă de comandă 1 Carton

Număr articole	Nr. articol	Vopsea	Mărime	Dimensiuni (volum x lungime)	Toleranță
	25304502	alb+albastru	M	≈ 120 x 104/119/134/149 cm ± 3 cm	
	25304503	alb+albastru	L	≈ 120 x 104/119/134/149 cm ± 3 cm	
GTINs	Nr. articol	Unit of Use UDI	Strat de ambalaj 1 UDI	Strat de ambalaj 2 UDI	Carton UDI
	25304502	4051642004815	4051642075532	-----	4051642575537
	25304503	4051642006598	4051642075365	-----	4051642575360

VARIANTĂ 2

Unitate de vânzare 100 bucată/Carton

Strat de ambalaj 1 10 bucată/Pungă din plastic

Cantitate minimă de comandă 1 Carton

Număr articole	Nr. articol	Vopsea	Mărime	Dimensiuni (volum x lungime)	Toleranță
	25304504	alb+albastru	XL	≈ 144 x 104/119/134/149 cm ± 3 cm	
	25304505	alb+albastru	XXL	≈ 168 x 104/119/134/149 cm ± 3 cm	
GTINs	Nr. articol	Unit of Use UDI	Strat de ambalaj 1 UDI	Strat de ambalaj 2 UDI	Carton UDI
	25304504	4051642004808	4051642075303	-----	4051642575308
	25304505	4051642004792	4051642075310	-----	4051642575315

Cifrele referitoare la dimensiuni, greutate, grosimi și toleranțe trebuie înțelese ca valori nominale și pot varia.

Datele se bazează pe stadiul actual al cunoștințelor noastre. Nu reprezintă o asigurare garantată a caracteristicilor produsului și nu reprezintă un drept contractual. Datele care sunt mai vechi de 2 ani trebuie confirmate din nou.

Ne asumăm dreptul la erorile de introducere și la greșeli.

Fișele produsului puse la dispoziție sunt proprietatea WIROS Wilfried Rosbach GmbH. WIROS Wilfried Rosbach GmbH este proprietarul tuturor drepturilor de autor/utilizare și exploatare ale fișelor cu datele produselor. Nu este permisă modificarea fișelor cu datele produsului sau modificarea pictogramei. Fișele cu datele produsului puse la dispoziție pot fi utilizate doar împreună cu produsele originale WIROS.



wiroCLEVER FLEX

BATA PP+PE

Revestimento de PE nos braços e na frente | Punho de elástico | Fitas de amarração no pescoço e cintura | 2 picotados para separar (para encurtar o comprimento)



PREMIUM+



Folha de dados do produto

wiroCLEVER FLEX



Fabricante

Empresa + Morada	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Alemanha
SRN	DE-MF-000004956
Marca comercial	care & serve®

Autorizações

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Suíça
--------	--

Descrição do produto


Categoria	PREMIUM+
Designação do produto	care & serve® PREMIUM+ wiroCLEVER FLEX Bata PP+PE Revestimento de PE nos braços e na frente Punho de elástico Fitas de amarração no pescoço e cintura 2 picotados para separar (para encurtar o comprimento)
Características do produto	Revestimento de PE nos braços e na frente Punho de elástico Fitas de amarração no pescoço e cintura 2 picotados para separar (para encurtar o comprimento)

Material

Material	Não-tecido de polipropileno com camada de polietileno
Peso do material	PP: $\approx 20 \text{ g/m}^2$ ($\pm 2 \text{ g/m}^2$)

Utilização

Uso pretendido	Vestuário de proteção médica, tal como definido pelas regras técnicas alemãs para agentes biológicos (TRBA 250) para prevenir a contaminação do vestuário de trabalho ou vestuário privado durante intervenções ou medidas de manutenção através do contacto direto com sangue, secreções, excreções ou outro material contaminado.
Contacto com alimentos	É permitido um contacto indireto breve com os alimentos.
Área de aplicação	Não é realizada uma aplicação médica direta no paciente. O vestuário de proteção na medicina destina-se a cobrir o vestuário e/ou os cabelos.
Grupo de aplicação	Colaboradores e visitas de laboratórios, indústria farmacêutica, hospitais ou instituições semelhantes.
Grupo de pacientes	O vestuário de proteção na medicina é adequado para o contacto com todos os grupos de pacientes.
Indicação	Vestuário para a medicina com barreira para cobrir o vestuário e/ou os cabelos.
Contraindicação	Sem contra-indicações conhecidas.
Indicação de utilização	Produto descartável. não estéril
Limitação	Nenhum EPI (equipamento de proteção individual) Não é adequado para embalar e armazenar alimentos.
Nota	Todos os incidentes graves em conexão direta com este produto devem ser relatados ao fabricante e às autoridades responsáveis.
Áreas de aplicação	Hospitais lares da terceira idade e outros meios profissionais Indústria Indústria farmacêutica Laboratório Processamento de alimentos HACCP Limpeza Higiene

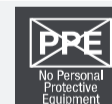

Folha de dados do produto

wiroCLEVER FLEX



Informações adicionais sobre o material sem látex



Indicação sobre a saúde Se ocorrerem irritações cutâneas ou reações alérgicas, interrompa imediatamente a utilização e procure aconselhamento médico. Tanto quanto se sabe, de acordo com o estado atual da tecnologia, os produtos não contêm qualquer substância tóxica, cancerígena, mutagénica ou reprodutivamente tóxica quando utilizados de acordo com a utilização prevista. Estes produtos não contêm quaisquer componentes de látex e são considerados hipoalergénicos. No entanto, podem causar irritação em peles sensíveis. Em caso de utilização prolongada, a ventilação da pele pode ser restrita, o que pode causar irritações cutâneas.

Normas

Marcação CE Dispositivo médico de classe I de acordo com a norma UE 2017/745



SRN DE-MF-000004956

Basis UDI DI 4051642-wiroCLEVERFLEX-X5

Marcação CE

A marcação CE garante a livre circulação de produtos e mercadorias dentro da Comunidade Económica Europeia. O produto com a marca CE cumpre os requisitos essenciais dos regulamentos europeus especificados.

VO (EU) 2023/988 Regulamento (UE) n.º 2023/988 relativo à segurança geral dos produtos

VO (EG) 1935/2004 Regulamento relativo aos materiais e objetos de matéria plástica destinados a entrar em contacto com os géneros alimentícios



VO (EU) 10/2011 Regulamento sobre materiais e objetos de plástico destinados a entrar em contato com alimentos

Utilização

Instruções de utilização Antes da utilização
Assegure-se de que optou pelo produto adequado para as suas necessidades e áreas de aplicação. Por favor, não use vestuário de proteção na medicina se este apresentar defeitos ou já tiver sido usado. O vestuário de proteção é previsto para uma utilização por um curto período de tempo e, na área da medicina, o seu uso é limitado ao contacto com um único paciente.

Manuseamento

Os aventais são usados com o lado fechado para a frente e fechados atrás ou dos lados. Para este fim, introduza os braços nas mangas e ate as fitas na nuca e na cintura.

Para evitar uma contaminação ao despir com o vestuário, recomenda-se que uma segunda pessoa desaperte o avental atrás e o desloque para a frente por cima dos ombros. O utilizador segura na extremidade superior do avental e volta-o do avesso ao despi-lo.

Nota de Segurança De acordo com a nossa análise de riscos de acordo com a EN ISO 14971:2019 + A11:2021, não são necessárias quaisquer instruções de segurança adicionais para este produto.

Eliminação Os produtos não utilizados e não contaminados podem ser incinerados ou descartados de maneira ambientalmente correta. Os produtos contaminados devem ser descartados de acordo com as leis e regulamentos nacionais aplicáveis a cada tipo de contaminação.

Validade 5 anos a partir da data de produção, se não for usado e armazenado corretamente.

Armazenagem Proteger da exposição ao sol.

Armazenar a seco.

Um armazenamento inadequado pode levar a uma redução na validade.




Rastreabilidade Rastreabilidade relacionada ao lote desde a determinação de requisitos até a saída do armazém

Folha de dados do produto Versão 2 Válido a partir do lote 2617 +

Embalagem

Reciclagem Licenciado de acordo com a norma alemã VerpackG, número de licença DE1618662887322.

Por favor, devolva a embalagem para reciclagem.

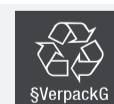

Folha de dados do produto

wiroCLEVER FLEX



www.wiros.de

WEB <https://www.wiros.de/shop/kittel/pppe-kittel/wiroclever-flex/>

Variante 1

Unidade de venda 100 unidade/Cartão

Nível de embalagem 1 10 unidade/Saco poli

Quantidade mínima 1 Cartão

Números de artigo	Número de artigo	Cor	Tamanho	Tamanho (P x C)	Tolerância
	25304502	branco+azul	M	≈ 120 x 104/119/134/149 cm ± 3 cm	
	25304503	branco+azul	L	≈ 120 x 104/119/134/149 cm ± 3 cm	
GTINs	Número de artigo	Unit of Use UDI	Nível de embalagem 1 UDI	Nível de embalagem 2 UDI	Cartão UDI
	25304502	4051642004815	4051642075532	-----	4051642575537
	25304503	4051642006598	4051642075365	-----	4051642575360

Variante 2

Unidade de venda 100 unidade/Cartão

Nível de embalagem 1 10 unidade/Saco poli

Quantidade mínima 1 Cartão

Números de artigo	Número de artigo	Cor	Tamanho	Tamanho (P x C)	Tolerância
	25304504	branco+azul	XL	≈ 144 x 104/119/134/149 cm ± 3 cm	
	25304505	branco+azul	XXL	≈ 168 x 104/119/134/149 cm ± 3 cm	
GTINs	Número de artigo	Unit of Use UDI	Nível de embalagem 1 UDI	Nível de embalagem 2 UDI	Cartão UDI
	25304504	4051642004808	4051642075303	-----	4051642575308
	25304505	4051642004792	4051642075310	-----	4051642575315


Os valores das dimensões, pesos, espessuras e tolerâncias devem ser entendidos como valores nominais e podem diferir.

As informações são baseadas no estado atual do nosso conhecimento. Elas não são uma garantia dos recursos do produto e não fundamentam um entendimento contratual da lei. Por favor, reconfirme as informações com mais de 2 anos.

Erros ortográficos e equívocos reservados.

As fichas técnicas do produto fornecidas são propriedade da WIROS Wilfried Rosbach GmbH. A WIROS Wilfried Rosbach GmbH é detentora de todos os direitos de autor, de utilização e exploração das fichas técnicas do produto. Não são permitidas quaisquer alterações às fichas técnicas do produto ou a utilização de pictogramas. As fichas técnicas do produto fornecidas só podem ser utilizadas em conjunto com os produtos originais WIROS.



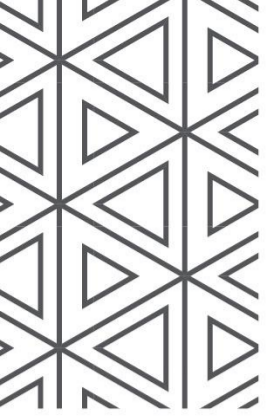

Gaminio duomenų lapas

wiroCLEVER FLEX



PP+PE DARBINIAI CHALATAI

Rankų ir priekinės kūno dalies PE dangalas | Gumos juostelės | Kaklo ir liemens raišteliai | 2 skiriamosios kiaurymės (ilgiui sutrumpinti)



PREMIUM+





Gamintojas

Firma + Adresas	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Vokietija
SRN	DE-MF-000004956
Prekiniai ženklai	care & serve®

Įgaliojimai

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Šveicarija
--------	---

Gaminio aprašymas

Kategorija	PREMIUM+
Gaminio pavadinimas	care & serve® PREMIUM+ wiroCLEVER FLEX PP+PE darbiniai chalatai Rankų ir priekinės kūno dalies PE dangalas Gumos juostelės Kaklo ir liemens raišteliai 2 skiriamosios kiaurymės (ilgiui sutrumpinti)
Gaminio savybės	rankų ir priekinės kūno dalies PE dangalas Gumos juostelės Kaklo ir liemens raišteliai 2 skiriamosios kiaurymės (ilgiui sutrumpinti)

Medžiaga

Medžiaga	Polipropilenas ir panaši į tekstilinį audinį neaustinė polimerinė medžiaga su polietileno danga
Medžiagos svoris	PP: ≈ 20 g/m ² (± 2 g/m ²)

Naudojimas

Naudojimo paskirtis	Medicininis apsauginis rūbas, kaip tai apibrėžta „Techninėse biologinių darbo medžiagų taisyklėse“ (TRBA 250), kad išvengtumėte darbo arba asmeninių drabužių užteršimo atlikdami intervencijas arba taikydami priežiūros priemones, kai yra tiesioginis kontaktas su krauju, sekretais, ekskretais ir kitomis užterštomis medžiagomis.
Kontaktas su maisto produktu	Leidžiamas trumpalaikis, netiesioginis kontaktas su maisto produktais.
Naudojimo sritis	Tiesioginio naudojimo pacientui nėra. Medicininiai apsauginiai drabužiai skirti uždengti drabužius ir (arba) plaukus.
Naudojimo grupė	Laboratorių, farmacijos pramonės, ligoninių ar panašių institucijų darbuotojams ir lankytojams.
Pacientų grupė	Medicininiai apsauginiai drabužiai tinka visoms pacientų grupėms.
Indikacija	Medicininiai drabužiai kaip barjeras drabužiams ir (arba) plaukams uždengti.
Kontraindikacija	Nėra žinoma jokių kontraindikacijų.
Naudojimo nurodymas	Vienkartinis gaminys nesterilus
Apribojimai	Ne AAP (asmeninės apsaugos priemonės) Netinka pakuoti ir saugoti maisto produktus.
Nurodymas	Apie visus rimtus incidentus, susijusius su šiuo gaminiu, būtina pranešti gamintojui ir atsakingoms institucijoms.
Naudojimo sritys	Ligoninė Slaugos namai ir kiti specialistai Gamybos farmacijos pramonė Laboratorija Maisto produktų apdorojimas HACCP Valymas Higiena



Gaminio duomenų lapas

wiroCLEVER FLEX



Papildoma informacija apie medžiagas be latekso



Nurodymai dėl sveikatos
Jei sudirginama oda ar pasireiškia alerginės reakcijos, nedelsiant nutraukite naudojimą ir kreipkitės į gydytoją.
Kiek žinoma pagal esamą technikos lygį, gaminiuose nėra jokių toksiškų, kancerogeninių, mutageninių ar toksiškų reprodukcijai medžiagų, kai jie naudojami pagal paskirtį.
Šių gaminių sudėtyje nėra latekso ir jie laikomi hipoalergiškais. Tačiau jie gali sudirginti jautrią odą. Dėvint ilgą laiką, gali būti apribota odos ventilacija, o tai gali sudirginti odą.

Standartai

CE ženklas Medicininis I klasės gaminys pagal ES 2017/745



SRN DE-MF-000004956

Basis UDI DI 4051642-wiroCLEVERFLEX-X5

CE ženklas

CE ženklas užtikrina laisvą gaminių ir prekių judėjimą Europos

ekonominėje bendrijoje. CE ženklu pažymėtas gaminys atitinka esminius nurodytų Europos reglamentų reikalavimus.

VO (EU) 2023/988 Reglamentas (ES) Nr. 2023/988 dėl bendros gaminių saugos

VO (EG) 1935/2004 Potvarkis dėl medžiagų ir objektų, pagamintų iš plastiko, kurie skirti liestis su maisto produktais



VO (EU) 10/2011 Potvarkis dėl medžiagų ir daiktų iš plastiko, skirtų sąlyčiui su maisto produktais

Naudojimas

Naudojimo instrukcija
Prieš naudojimą
Įsitikinkite, kad pasirinkote jūsų poreikius ir naudojimo sritis atitinkantį gaminį. Nedėvėkite medicininių apsauginių drabužių, jeigu pastebėjote trūkumą arba jie jau buvo naudoti. Medicininiai apsauginiai drabužiai skirti trumpalaikiam dėvėjimui, medicininėje srityje jų naudojimas apribotas ir skirtas tik vienam pacientui.

Naudojimas

Darbinis chalatas dėvimas uždara puse į priekį, o nugaroje ar šone užrišamas. Tam reikia rankas įkišti į rankoves, o raištelius surišti ties sprandu ir liemeniu.

Siekiant išvengti užsiteršimo nuo drabužių nusirengiant, rekomenduojama, kad antras asmuo darbinį chalata nugaroje atsegtų ir jį per pečius stumtų į priekį.

Dėvintysis suima viršutinius darbinio chalato galus ir nusirengdamas suka chalata į kairę.

Saugos nurodymas Pagal mūsų rizikos analizę remiantis EN ISO 14971:2019 + A11:2021, šiam gaminiui nereikalingi jokie papildomi saugos nurodymai.

Utilizavimas Nepanaudoti ir neužteršti gaminiai gali būti deginami aplinkai saugiu būdu arba utilizuojami saugykloje. Užteršti gaminiai privalo būti utilizuojami pagal galiojančius nacionalinius įstatymus ir potvarkius atsižvelgiant į jų užterštumo pobūdį.

Tinkamumas naudoti 5 metai nuo pagaminimo datos, jei nenaudotos ir tinkamai sandėliuotos.

Laikymo sąlygos Saugokite nuo saulės spindulių.
Laikykite sausoje vietoje.
Netinkamos laikymo sąlygos gali sutrumpinti tinkamumo naudoti trukmę.



Atsekamumas Prekės partijos atsekamumas nuo paklausos tyrimo iki atsargų sumažinimo.
Gaminio duomenų lapas Versija 2 galioja nuo prekės partijos 2617 +

Pakuotė

Perdirbama Licencija išduota pagal „VerpackG“, licencijos numeris DE1618662887322.
Prašome pakuotę pristatyti perdirbti.





www.wiros.de

WEB <https://www.wiros.de/shop/kittel/pppe-kittel/wiroclever-flex/>

Variantas 1

Pardavimo pakuotė	100 vienetas/Kartono dėžutė				
1 pakuotės lygis	10 vienetas/Polietileno maišelis				
Mažiausias galimas užsakyti kiekis	1 Kartono dėžutė				
Gaminio numeris	Gaminio numeris	Spalva	Dydis	Dydis (apimtis x ilgis)	Tolerancija
	25304502	baltas+mėlynas	M	≈ 120 x 104/119/134/149 cm ± 3 cm	
	25304503	baltas+mėlynas	L	≈ 120 x 104/119/134/149 cm ± 3 cm	
GTINs	Gaminio numeris	Unit of Use UDI	Lygių pakuotė 1 UDI	Lygių pakuotė 2 UDI	Kartono dėžutė UDI
	25304502	4051642004815	4051642075532	-----	4051642575537
	25304503	4051642006598	4051642075365	-----	4051642575360

Variantas 2

Pardavimo pakuotė	100 vienetas/Kartono dėžutė				
1 pakuotės lygis	10 vienetas/Polietileno maišelis				
Mažiausias galimas užsakyti kiekis	1 Kartono dėžutė				
Gaminio numeris	Gaminio numeris	Spalva	Dydis	Dydis (apimtis x ilgis)	Tolerancija
	25304504	baltas+mėlynas	XL	≈ 144 x 104/119/134/149 cm ± 3 cm	
	25304505	baltas+mėlynas	XXL	≈ 168 x 104/119/134/149 cm ± 3 cm	
GTINs	Gaminio numeris	Unit of Use UDI	Lygių pakuotė 1 UDI	Lygių pakuotė 2 UDI	Kartono dėžutė UDI
	25304504	4051642004808	4051642075303	-----	4051642575308
	25304505	4051642004792	4051642075310	-----	4051642575315


Išmatavimų, svorio, storio ir tolerancijos duomenys yra tik formalūs ir gali skirtis.

Duomenys paremti mūsų turima dabartine informacija. Jie neužtikrina gaminio savybių ir nepagrindžia sutartinių teisinių santykių. Informaciją, kuri yra senesnė nei 2 metai, prašome patvirtinti iš naujo.

Galimi klaidingi duomenys ir neatitikimai.

Pristatomi gaminio duomenų lapai yra „WIROS Wilfried Rosbach GmbH“ nuosavybė. „WIROS Wilfried Rosbach GmbH“ yra gaminio duomenų lapų visų autorių (arba) naudojimo teisių savininkas. Draudžiama keisti gaminio duomenų lapus arba naudoti piktogramas.

Pristatomus gaminio duomenų lapus leidžiama naudoti tik su originaliais WIROS gaminiiais.

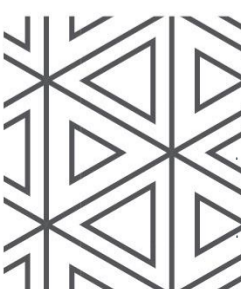

Produkta datu lapa

wiroCLEVER FLEX



PP+PE UZSVĀRČI

PE pārklājums uz rokām un priekšpusē | Gumijas savilce | Sasienamās lentes skaustā un viduklī | 2 atvienošanas perforācijas (garuma saīsināšanai)



PREMIUM+





Ražotājs

Uzņēmums + Adrese	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Vācija
SRN	DE-MF-000004956
Preču zīme	care & serve®

Atļaujas

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Šveice
--------	---

Produkta apraksts

Kategorija	PREMIUM+
Produkta nosaukums	care & serve® PREMIUM+ wiroCLEVER FLEX PP+PE uzsvārci PE pārklājums uz rokām un priekšpusē Gumijas savilce Sasienamās lentes skaustā un viduklī 2 atvienošanas perforācijas (garuma saīsināšanai)
Produkta īpašības	PE pārklājums uz rokām un priekšpusē Gumijas savilce Sasienamās lentes skaustā un viduklī 2 atvienošanas perforācijas (garuma saīsināšanai)

Materiāls

Materiāls	Neausts polipropilēna materiāls ("spanbonds") ar polietilēna slāni
Materiāla svars	Polipropilēns: $\approx 20 \text{ g/m}^2 (\pm 2 \text{ g/m}^2)$

Lietošana

Lietošanas mērķis	Medicīniskais aizsargapģērbs bioloģisku darba materiālu tehnisko noteikumu (TRBA 250) izpratnē, lai novērstu darba vai privātā apģērba piesārņošanu, veicot iejaukšanos vai ārstēšanas darbības, ko varētu radīt saskare ar asinīm, sekrētiem, izdalījumiem vai citiem piesārņojošiem materiāliem.
-------------------	--

Saskare ar pārtikas produk	Ir pieļaujama īslaicīga netieša saskare ar pārtiku.
----------------------------	---

Lietošanas joma	Medicīniskajā ziņā netiek tieši pielietots pacientam. Medicīnisko aizsargapģērbu izmanto apģērba un/vai matu nosegšanai.
-----------------	--

Lietošanas grupa	Laboratoriju, farmācijas nozares, slimnīcu vai līdzīgu iestāžu darbiniekiem un apmeklētājiem.
------------------	---

Pacientu grupa	Medicīniskais aizsargapģērbs ir piemērots visām pacientu grupām.
----------------	--


Indikācija	Medicīniskais apģērbs kā barjera apģērba un/vai matu nosegšanai.
------------	--

Kontrindikācija	Nav zināmu kontrindikāciju.
-----------------	-----------------------------

Lietošanas norādījums	Vienreizlietojams produkts nav sterili
-----------------------	---



Ierobežojums	Nav IAL (individuālie aizsarglīdzekļi) Nav piemērots pārtikas produktu iepakojšanai un uzglabāšanai.
--------------	---

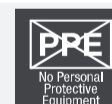

Norāde	Par visiem nopietniem incidentiem, kas saistīti tieši ar šo produktu, jāziņo ražotājam un atbildīgajām iestādēm.
--------	--

Pielietojuma jomas	Slimnīca Veco ļaužu pansionāts u.c. speciālistu aprindas Rūpniecība farmaceitiskā rūpniecība Laboratorijas Pārtikas produktu apstrāde HACCP Tīrīšana higiēna
--------------------	---





Papildu informācija par materiālu nesatur lateksu



Norāde attiecībā uz veselību Ja rodas ādas kairinājums vai alerģiskas reakcijas, nekavējoties pārtrauciet lietošanu un meklējiet medicīnisku palīdzību. Cik zināms saskaņā ar pašreizējo tehnikas attīstības līmeni, produkti nesatur toksiskas, kancerogēnas, mutagēnas vai reproduktīvajai sistēmai toksiskas vielas, ja tos izmanto atbilstoši paredzētajam lietojumam. Šie produkti nesatur lateksa komponentus un tiek uzskatīti par hipoalerģiskiem. Tomēr tie var kairināt jutīgu ādu. Ja to valkā ilgstoši, var tikt ierobežota ādas ventilācija, kas var izraisīt ādas kairinājumu.

Standarti

CE marķējums I klases medicīniskais izstrādājums saskaņā ar ES 2017/745



SRN DE-MF-000004956

Basis UDI DI 4051642-wiroCLEVERFLEX-X5

CE marķējums

CE marķējums garantē izstrādājumu un preču brīvu apriti Eiropas

VO (EU) 2023/988 Regula (ES) Nr. 2023/988 par ražojumu vispārēju drošumu

VO (EG) 1935/2004 Regula par plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem



VO (EU) 10/2011 Direktīva par plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem

Lietošana

Lietošanas instrukcija Pirms lietošanas Lūdzu, pārliedzieties, ka izvēlētais produkts ir piemērots jūsu vajadzībām un lietošanas jomām. Lūdzu, nevalkājat medicīnisko aizsargapģērbu, ja tam ir defekti vai ja tas ir lietots. Medicīniskais aizsargapģērbs ir paredzēts īslaicīgai lietošanai, lietošana medicīniskā jomā ir ierobežota vienam pacientam(-ei).

Lietošana

Halāti tiek valkāti tā, lai aizvēršanas puse būtu vērsta uz priekšu un nofiksēta aizmugurē vai sānos. Lai to izdarītu, izvelciet rokas caur piedurknēm un nofiksējiet saites pie kakla un ap vidukli.

Lai izģērbšanās laikā nepieļautu apģērba piesārņojumu, ieteicams, lai otra persona atsietu halātu aizmugurē un vilktu to uz priekšu pāri pleciem. Valkātājs satver augšējos halāta galus un, noņemot halātu, izgriež to uz kreiso pusi.

Drošības norāde Saskaņā ar mūsu riska analīzi, kas veikta atbilstoši EN ISO 14971:2019 + A11:2021, šim produktam nav nepieciešami papildu drošības norādījumi.

Utilizācija Nelietotus un nekontaminētus produktus var sadedzināt vai utilizēt izgāztuvē vidi saudzējošā veidā. Kontaminēti produkti ir jāutilizē saskaņā ar spēkā esošajiem nacionālajiem likumiem un noteikumiem un atbilstoši kontaminācijas veidam.

Derīguma termiņš 5 gadi no ražošanas datuma, ja produkts nav lietots un ir pareizi uzglabāts.

Glabāšana Sargājiet no saules stariem.

Glabājiet sausā vietā.

Nepareiza glabāšana var izraisīt derīguma termiņa saīsināšanos.




Izsekojamība Izsekojamas partijas no pieprasījuma noteikšanas līdz preču izsūtīšanai.

Produkta datu lapa Versija 2 spēkā no partijas 2617 +

Iepakojums

Pārstrāde Licencēts saskaņā ar Vācijas Likumu par iepakojumiem (VerpackG), licences numurs DE1618662887322.

Lūdzu, nododiet iepakojumu otrreizējai pārstrādei.

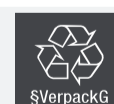

§VerpackG

www.wiros.de

WEB <https://www.wiros.de/shop/kittel/pppe-kittel/wiroclever-flex/>



Variants 1

Pārdošanas vienība	100 Gab./Kartona kaste				
Iepakojuma līmenis 1	10 Gab./Polietilēna maisiņš				
Minimālais pasūtīšanas daudzums	1 Kartona kaste				
Preču numuri	Preces numurs	Krāsa	Izmērs	Izmērs (apkārtmērs x garums)	Pielaide
	25304502	balta+zila	M	≈ 120 x 104/119/134/149 cm ± 3 cm	
	25304503	balta+zila	L	≈ 120 x 104/119/134/149 cm ± 3 cm	
GTINs	Preces numurs	Unit of Use UDI	Iepakojuma līmenis 1 UDI	Iepakojuma līmenis 2 UDI	Kartona kaste UDI
	25304502	4051642004815	4051642075532	-----	4051642575537
	25304503	4051642006598	4051642075365	-----	4051642575360

Variants 2

Pārdošanas vienība	100 Gab./Kartona kaste				
Iepakojuma līmenis 1	10 Gab./Polietilēna maisiņš				
Minimālais pasūtīšanas daudzums	1 Kartona kaste				
Preču numuri	Preces numurs	Krāsa	Izmērs	Izmērs (apkārtmērs x garums)	Pielaide
	25304504	balta+zila	XL	≈ 144 x 104/119/134/149 cm ± 3 cm	
	25304505	balta+zila	XXL	≈ 168 x 104/119/134/149 cm ± 3 cm	
GTINs	Preces numurs	Unit of Use UDI	Iepakojuma līmenis 1 UDI	Iepakojuma līmenis 2 UDI	Kartona kaste UDI
	25304504	4051642004808	4051642075303	-----	4051642575308
	25304505	4051642004792	4051642075310	-----	4051642575315

Izmēru, svara, stiprības un pielaižu skaitliskās vērtības ir uzskatāmas par nominālajām vērtībām un var atšķirties no faktiskajām vērtībām.

Dati ir balstīti uz mūsu jaunākajām zināšanām. Tie negarantē produktu īpašības un nepamato līgumiskas saistības. Lūdziet apstiprināt datus, kas ir vecāki par 2 gadiem.

Ir iespējamas ievades kļūdas un kļūdaina informācija.

Sniegtās produktu datu lapas ir uzņēmuma WIROS Wilfried Rosbach GmbH īpašums. WIROS Wilfried Rosbach GmbH ir visu autortiesību, lietošanas tiesību un produktu datu lapu izmantošanas tiesību īpašnieks. Nav atļauts mainīt produktu datu lapas vai izmantot piktoqrammas. Nodrošinātās produktu datu lapas drīkst izmantot tikai saistībā ar oriģinālajiem WIROS produktiem.



Информационен лист за продукта

wiroCLEVER FLEX




PP+PE ПРЕСТИЛКА

PE покритие при ръцете и отпред | Ластични маншети | Ленти за връзване при врата и талията | 2 отделящи се перфорации (за скъсяване на дължината)



PREMIUM+

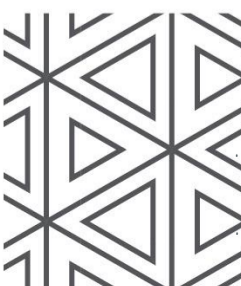

Информационен лист за продукта

wiroCLEVER FLEX



Производител

Фирма + Адрес	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Германия
SRN	DE-MF-000004956
Търговска марка	care & serve®

Упълномощавания

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Швейцария
--------	--

Описание на продукта

Категория	PREMIUM+
Наименование на продукта	care & serve® PREMIUM+ wiroCLEVER FLEX PP+PE престилка PE покритие при ръцете и отпред Ластични маншети Ленти за връзване при врата и талията 2 отделящи се перфорации (за скъсяване на дължината)
Характеристики на продукта	PE покритие при ръцете и отпред Ластични маншети Ленти за връзване при врата и талията 2 отделящи се перфорации (за скъсяване на дължината)

Материал

Материал	Полипропиленов тъкан флис с полиетиленово покритие
Тегло на материала	PP: $\approx 20 \text{ g/m}^2$ ($\pm 2 \text{ g/m}^2$)

Употреба

Употреба по предназначение	Медицинско защитно облекло по смисъла на Техническите правила за биологични работни материали (TRBA 250) за предотвратяване на замърсяване на работно или лично облекло при операции или работи по обгрижването чрез директен контакт с кръв, секрети, екскрети или друг замърсен материал.
Контакт с хранителни продукти	Допуска се краткотраен индиректен контакт с хранителни продукти.
Област на приложение	Не се извършва директно медицинско приложение върху пациенти. Медицинското защитно облекло служи за покриване на облекло и/или коси.
Група на приложение	Служители и потребители на лаборатории, от фармацевтичната индустрия, болници или подобни съоръжения.
Група пациенти	Медицинското защитно облекло е подходящо за всички групи пациенти.
Показание	Медицинско облекло като бариера за покриване на облеклото и/или косите.
Противопоказание	Няма известни противопоказания.
Указание за употреба	Продукт за еднократна употреба нестерилни
Ограничение	Не са ЛПС (лични предпазни средства) Не са подходящи за опаковане и съхранение на хранителни продукти.
Указание	Всички сериозни инциденти във връзка с този продукт трябва да бъдат докладвани на производителя и на отговорните органи.
Области на приложение	Болница Дом за възрастни и др. специализирани кръгове Индустрия Фармацевтична индустрия Лаборатория Преработка на хранителни продукти НАССР Почистване Хигиена



Информационен лист за продукта

wiroCLEVER FLEX



Допълнителна информация за	не съдържа латекс	
Указание за здравето	При кожни раздразнения или алергични реакции спрете незабавно употребата и потърсете лекарска помощ. Доколкото е известно съгласно актуалното ниво на техниката, продуктите не съдържат токсични, канцерогенни, мутагенни или токсични за репродуктивните способности вещества, ако се използват според предназначението им. Тези продукти не съдържат латексови съставки и се считат за хипоалергенни. Те обаче могат да причинят дразнения при чувствителна кожа. При по-дълго носене вентилацията на кожата може да бъде ограничена, което може да доведе до кожни раздразнения.	

Стандарти

CE маркировка	Медицински продукт от клас I съгласно EC 2017/745		
SRN	DE-MF-000004956		
Basis UDI DI	4051642-wiroCLEVERFLEX-X5		
	CE маркировка Маркировката CE гарантира свободното движение на продукти и стоки в рамките на Европейскотоикономическо пространство. Обозначеният с маркировка CE продукт съответства на основните изисквания на посочените европейски разпоредби.		
VO (EU) 2023/988	Регламент (ЕС) № 2023/988 относно общата безопасност на продуктите		
VO (EG) 1935/2004	Разпоредба за материали и предмети от синтетичен материал, които са предназначени за контакт с хранителни продукти		
VO (EU) 10/2011	Разпоредба за материали и предмети от пластмаса, които са предназначени за контакт с хранителни продукти		

Приложение

Инструкция за употреба	Преди употреба Моля, уверете се, че сте избрали подходящия за Вашите нужди и области на приложение продукт. Моля, не носете медицинско защитно облекло, ако то е дефектно или вече е било използвано. Медицинското защитно облекло е предназначено за краткосрочно използване; в областта на медицината употребата е ограничена до един пациент. Боравене Престилките се носят със затворената страна напред и се затварят отзад или странично. За целта ръцете трябва да се вкарат в ръкавите и връзките да бъдат завързани зад врата и на талията. За предотвратяване на замърсяване с облеклото при събличане се препоръчва, втори човек да отвори престилката отзад и да я избута напред над рамената. Носещото лице захваща горния край на престилката и при събличане завърта престилката на обратно.		
Указание за безопасност	Съобразно нашия анализ на риска съгласно EN ISO 14971:2019 + A11:2021 не са необходими допълнителни указания за безопасност за този продукт.		
Изхвърляне	Неизползвани и незамърсени продукти могат да бъдат изгорени по екологосъобразен начин или предадени в пункт за отпадъци. Замърсени продукти трябва да бъдат изхвърлени съгласно важащите национални закони и предписания в зависимост от вида на замърсяването.		
Срок на годност	5 години от датата на производство, ако не са използвани и при правилно съхранение.		
Съхранение	Пазете от слънчево лъчение. Съхранявайте на сухо място. Неправилно съхранение може да доведе до намаляване на срока на годност.		
Обратна проследимост	Отнесена към партидите обратна проследимост от определянето на нуждата до излизането от склада. Информационен лист за продукта Версия 2 важи от партида 2617 +		

Опаковка

Рециклиране	Лицензирани съгласно Закона за опаковките VerpackG, номер на лиценз DE1618662887322. Моля, предайте опаковката за рециклиране.	
-------------	---	--



Информационен лист за продукта

wiroCLEVER FLEX



www.wiros.de

WEB <https://www.wiros.de/shop/kittel/pppe-kittel/wiroclever-flex/>

Вариант 1

Продажна единица 100 броя/Кашон

Ниво на опаковката 1 10 броя/Полиетиленова торбичка

Минимално количество за поръчка 1 Кашон

Каталожни номера	Номер на артикул	Цвят	Размер	Размер (обиколка x дължина)	Допуск
	25304502	бял+син	M	≈ 120 x 104/119/134/149 cm ± 3 cm	
25304503	бял+син	L	≈ 120 x 104/119/134/149 cm ± 3 cm		

GTINs	Номер на артикул	Unit of Use UDI	Плоска опаковка 1 UDI	Плоска опаковка 2 UDI	Кашон UDI
	25304502	4051642004815	4051642075532	-----	4051642575537
25304503	4051642006598	4051642075365	-----	4051642575360	

Вариант 2

Продажна единица 100 броя/Кашон

Ниво на опаковката 1 10 броя/Полиетиленова торбичка

Минимално количество за поръчка 1 Кашон

Каталожни номера	Номер на артикул	Цвят	Размер	Размер (обиколка x дължина)	Допуск
	25304504	бял+син	XL	≈ 144 x 104/119/134/149 cm ± 3 cm	
25304505	бял+син	XXL	≈ 168 x 104/119/134/149 cm ± 3 cm		

GTINs	Номер на артикул	Unit of Use UDI	Плоска опаковка 1 UDI	Плоска опаковка 2 UDI	Кашон UDI
	25304504	4051642004808	4051642075303	-----	4051642575308
25304505	4051642004792	4051642075310	-----	4051642575315	

Цифровите данни за размерите, теглата, дебелините и допуските трябва да се разбират като зададени стойности и могат да се различават.

Данните се базират на текущото ниво на нашите знания. Те не представляват гаранция за продуктови характеристики и не обосновават договорно правно разбиране. Моля, поисквайте повторно потвърждение на данни, които са по-стари от 2 години. Не се поема отговорност за печатни грешки.

Предоставените на разположение продуктови спецификации са собственост на фирма WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Фирма WIROS Wilfried Rosbach GmbH е собственик на всички авторски права и права за употреба и експлоатация на продуктите спецификации. Промяна на продуктите спецификации или използване на пиктограмите не са разрешени. Предоставените на разположение продуктови спецификации могат да се използват само във връзка с оригиналните продукти на фирма WIROS.



Технічний лист

wiroCLEVER FLEX




ХАЛАТ З ПП+ПЕ

Покриття ПЕ на рукавах і спереду | Еластичні манжети | Зав'язки на шиї і талії | 2 відривні перфорації (для укорочення)



PREMIUM+

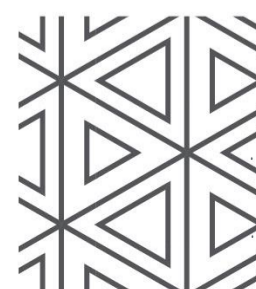



Виробник

Фірма + Адреса	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Німеччина
SRN	DE-MF-000004956
Торговельна марка	care & serve®

Повноваження

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Швейцарія
--------	--

Опис продукту


Категорія	PREMIUM+
Найменування продукту	care & serve® PREMIUM+ wiroCLEVER FLEX Халат з ПП+ПЕ Покриття ПЕ на рукавах і спереду Еластичні манжети Зав'язки на шиї і талії 2 відривні перфорації (для укорочення)
Властивості продукту	покриття ПЕ на рукавах і спереду Еластичні манжети Зав'язки на шиї і талії 2 відривні перфорації (для укорочення)

Матеріал

Матеріал	Поліпропіленовий спанбонд з поліетиленовим покриттям
Вага матеріалу	ПП: ≈ 20 г/м ² (± 2 г/м ²)

Використання

Призначення	Медичний захисний одяг в значенні Технічних правил для біологічних робочих речовин (TRBA 250) для запобігання забруднення робочого або особистого одягу під час операцій або санітарно-гігієнічних заходів внаслідок прямого контакту з кров'ю, виділеннями, екскрементами або іншими забрудненими матеріалами.
Контакт з харчовими про	Припустимий короточасний непрямий контакт з харчовими продуктами.
Сфера застосування	Не відбувається прямого медичного застосування до пацієнта. Медичний захисний одяг служить для покриття одягу та/або волосся.
Група застосування	Співробітники і відвідувачі лабораторій, фармацевтичних підприємств, лікарень або аналогічних установ.
Група пацієнтів	Медичний захисний одяг підходить для всіх груп пацієнтів.
Показання	Медичний одяг в якості бар'єру для покриття одягу та/або волосся.
Протипоказання	Невідомі протипоказання.
Інструкція щодо використання	Виріб одноразового використання не стерильний
Обмеження	Не є ЗІЗ (засобом індивідуального захисту) Не придатні для пакування та зберігання харчових продуктів.
Примітка	Про всі серйозні випадки, пов'язані з цим продуктом, необхідно повідомляти виробника та відповідальні органи.
Галузі застосування	Лікарня Будинок пристарілих в тому числі групи фахівців Промисловість Фармацевтична промисловість Лабораторії Харчова промисловість НАССР Прибирання Гігієна

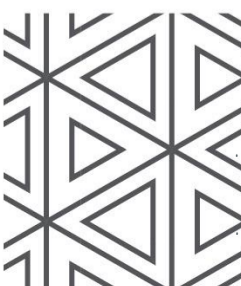



Інформація про добавки до матеріалу без латексу



Вказівка щодо охорони з: При подразненні шкіри або алергічних реакціях негайно припинити використання та звернутися за консультацією лікаря. Наскільки відомо з сучасного рівня техніки, продукція не містить жодних токсичних, канцерогенних, мутагенних або репродуктивнотоксичних речовин, якщо вона використовується відповідно до свого призначення. Ці вироби не містять латексні компоненти та вважаються гіпоалергенними. Проте у випадку чутливої шкіри вони можуть викликати подразнення. При тривалому носінні може обмежуватися вентиляція шкіри, що спричиняє подразнення шкіри.

Стандарти

CE-маркування Медичний виріб класу I відповідно до EU 2017/745



SRN DE-MF-000004956

Basis UDI DI 4051642-wiroCLEVERFLEX-X5

CE-маркування

Маркування CE гарантує вільний обіг виробів та товарів у межах Європейської економічної спільноти. Виріб з маркуванням CE відповідає основним вимогам зазначених європейських розпоряджень.

VO (EU) 2023/988 Регламент (ЄС) № 2023/988 про загальну безпеку виробу

VO (EG) 1935/2004 Розпорядження щодо матеріалів та виробів з пластмас, призначених для контакту з харчовими продуктами



VO (EU) 10/2011 Розпорядження щодо матеріалів та виробів з пластмас, призначених для контакту з харчовими продуктами

Використання

Інструкція з використання Перед використанням Переконайтесь, що обрали правильний виріб для своїх потреб та областей застосування. В жодному разі не носіть медичний захисний одяг, у якому були виявлені дефекти або яким вже користувалися. Медичний захисний одяг призначений для короткочасного використання; в сфері медицини використання обмежене одним пацієнтом.

Застосування

Халати носять суцільною стороною вперед і закривають ззаду або збоку. Для цього просуньте руки в рукава і зав'яжіть зав'язки на шиї й талії.

Щоб при знятті уникнути забруднення одягом, рекомендується, щоб друга людина відкрила халат ззаду і зсунула його через плечі вперед. Носій халата береться за верхні кінці халата і при знятті вивертає його навиворіт.

Інструкція з безпеки Відповідно до нашого аналізу ризиків за EN ISO 14971:2019 + A11:2021 для цього виробу не потрібні додаткові вказівки з техніки безпеки.

Утилізація Невикористані та незабруднені вироби можна спалювати екологічно безпечним чином або утилізувати в місцях для збору сміття. Забруднені вироби слід утилізувати відповідно до чинного національного законодавства та нормативно-правових актів, в залежності від типу забруднення.

Термін служби 5 років з дати виготовлення, якщо вони не використовуються та правильно зберігаються.


Зберігання Захищати від сонячних променів. Зберігати в сухому місці. Неправильне зберігання може призвести до зниження терміну служби.



Простежуваність Простежуваність партії від визначення потреб аж до виходу зі складу. Технічний лист Версія 2 дійсний з партії 2617 +

Упаковка

Переробка Ліцензовано згідно Закону про упаковку, номер ліцензії DE1618662887322. Будь ласка, поверніть упаковку для переробки.

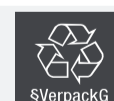

www.wiros.de

WEB <https://www.wiros.de/shop/kittel/pppe-kittel/wiroclever-flex/>





Варіант 1

Торгова одиниця	100 штук/Коробка				
Рівень упаковки 1	10 штук/Поліетиленовий мішок				
Мінімальна кількість замовлення	1 Коробка				
Номери артикулу	Номер артикулу	Колір	Розмір	Розмір (Об х Д)	Допустиме відхилення
	25304502	білий+синій	M	≈ 120 x 104/119/134/149 cm ± 3 cm	
	25304503	білий+синій	L	≈ 120 x 104/119/134/149 cm ± 3 cm	
GTINs	Номер артикулу	Unit of Use UDI	Рівень упаковки 1 UDI	Рівень упаковки 2 UDI	Коробка UDI
	25304502	4051642004815	4051642075532	-----	4051642575537
	25304503	4051642006598	4051642075365	-----	4051642575360

Варіант 2

Торгова одиниця	100 штук/Коробка				
Рівень упаковки 1	10 штук/Поліетиленовий мішок				
Мінімальна кількість замовлення	1 Коробка				
Номери артикулу	Номер артикулу	Колір	Розмір	Розмір (Об х Д)	Допустиме відхилення
	25304504	білий+синій	XL	≈ 144 x 104/119/134/149 cm ± 3 cm	
	25304505	білий+синій	XXL	≈ 168 x 104/119/134/149 cm ± 3 cm	
GTINs	Номер артикулу	Unit of Use UDI	Рівень упаковки 1 UDI	Рівень упаковки 2 UDI	Коробка UDI
	25304504	4051642004808	4051642075303	-----	4051642575308
	25304505	4051642004792	4051642075310	-----	4051642575315

Цифрові дані розмірів, ваги, товщини та допустимих відхилень слід розуміти як номінальні величини, що можуть відрізнятися.

Дані базуються на поточному стані наших знань. Вони не є гарантованим запевненням щодо характеристик товару і не створюють договірної правового розуміння. Необхідно повторно засвідчити інформацію, якій більше ніж 2 роки.

Можливі друкарські та інші помилки.

Надані технічні паспорти продукту є власністю компанії WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Компанія WIROS Wilfried Rosbach GmbH є власником усіх авторських прав, прав на використання та реалізацію технічних паспортів продукту. Не дозволяється змінювати технічні паспорти продукту або використовувати піктограми. Надані технічні паспорти продукту дозволяється використовувати лише у зв'язку з оригінальними продуктами WIROS.



Toote teabeleht

wiroCLEVER FLEX



PP+PE KITTEL

PE-kate varrukatel ja esiküljel | Kummipaelaga värvel | Kinnituspaelad kaela ja talje piirkonnas | 2 rebimisperforatsiooni (pikkuse lühendamiseks)



PREMIUM+



Toote teabeleht

wiroCLEVER FLEX



Tootja

Ettevõtte + Aadress:	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Saksamaa
SRN	DE-MF-000004956
Kaubamärk	care & serve®

Volitused

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Šveits
--------	---

Tootekirjeldus


Kategooria	PREMIUM+
Toote nimetus	care & serve® PREMIUM+ wiroCLEVER FLEX PP+PE kittel PE-kate varrukatel ja esiküljel Kummipaelaga värvel Kinnituspaelad kaela ja talje piirkonnas 2 rebimisperforatsiooni (pikkuse lühendamiseks)
Toote omadused	PE-kate varrukatel ja esiküljel Kummipaelaga värvel Kinnituspaelad kaela ja talje piirkonnas 2 rebimisperforatsiooni (pikkuse lühendamiseks)

Materjal:

Materjal:	Polüpropüleenist kootud lausriie polüetüleenist kattekihiga
Materjali kaal	PP: ≈ 20 g/m ² (± 2 g/m ²)

Kasutamine

Kasutusotstarve	Meditsiiniline kaitseriietus, mis vastab bioloogiliste mõjurite tehnilistele eeskirjadele (TRBA 250) ja on mõeldud töö- või erariiete saastumise vältimiseks protseduuride või hooldamise ajal, kui esineb otsene kokkupuude vere, sekretsiooni, väljaheidete või muu saastunud materjaliga.
Kokkupuude toiduainetega	Lühiajaline kaudne kokkupuude toiduainetega on lubatud.
Rakendusvaldkond	Otsest meditsiinilist rakendamist patsiendile ei toimu. Meditsiiniline kaitseriietus on kasutusel riietuse ja/või juuste kinnikatmiseks.
Rakendamisrühm	Laborite, farmaatsiatööstuse, haiglate või sarnaste asutuste töötajad ja külastajad.
Patsientide rühm	Meditsiiniline kaitseriietus on sobiv kõigi patsiendirühmade jaoks.
Näidustus	Meditsiiniline riietus barjäärina riietuse ja/või juuste kinnikatmiseks.
Vastunäidustus	Puuduvad teadaolevad vastunäidustused.
Kasutusjuhised	Ühekordselt kasutatav toode mittesteriilne
Piirangud	Ei ole IKV (isikukaitsevahend) Ei sobi toiduainete pakkimiseks ega hoiustamiseks.
Märkus	Kõigist selle tootega otseselt seotud tõsistest juhtumitest tuleb teavitada tootjat ja vastutavaid ametiasutusi.
Kasutusvaldkonnad	Haigla vanadekodu jt erialased ringkonnad Tööstus farmaatsiatööstus Labor Toiduainetööstus HACCP (ohuanalüüsi ja kriitiliste kontrollpunktide süsteem) Puhastus hügieen

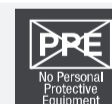

Toote teabeleht

wiroCLEVER FLEX



Lisateave materjali kohta ei sisalda lateksit



Terviseiga seotud märkus Nahaärrituste või allergiliste reaktsioonide korral lõpetage kohe kasutamine ja küsige arstilt nõu. Praeguse tehnika taseme kohaselt ei sisalda tooted toksilisi, kantserogeenseid, mutageenseid ega reproduktiivtoksilisi aineid, kui neid kasutatakse otstarbe kohaselt. Need tooted ei sisalda lateksi osi ja on hüpoallergeensed. Tundliku naha korral võivad need põhjustada ärritust. Pikemaajalise kandmise korral võib naha õhuvarustus olla pärsitud, mis võib tekitada nahaärritust.

Standardid

CE-märgistus Klass I meditsiinitooted vastavalt määrusele EL 2017/745



SRN DE-MF-000004956

Basis UDI DI 4051642-wiroCLEVERFLEX-X5

CE-märgistus

CE-märgis garanteerib toodete ja kaupade vaba liikumise Euroopa

VO (EU) 2023/988 ELi direktiiv nr 2023/988 üldise tooteohutuse kohta

VO (EG) 1935/2004 Määrus toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud plastimaterjalide ja -esemete kohta



VO (EU) 10/2011 Määrus toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud plastimaterjalide ja -esemete kohta

Kasutamine

Kasutusjuhend
Enne kasutamist
Palun veenduge, et te olete valinud välja oma vajaduste ja rakendusvaldkondade jaoks sobiva toote. Ärge kandke meditsiinilist kaitseriietust, juhul kui sellel esineb puudusi või kui seda on juba kasutatud. Meditsiiniline kaitseriietus on ette nähtud lühiajaliseks kasutamiseks, meditsiini valdkonnas on kasutamine piiratud ühe patsiendiga.

Käsitsemine
Kitleid kantakse suletud küljega ettepoole ja need suletakse tagant või küljelt. Selleks libistage käsivarred varrukatesse ning sulgege kuklas ja vöökohas olevad sidumispaelad. Selleks et takistada seljast äravõtmisel saastumist riietuse tõttu, soovitatakse, et teine isik avaks kitli tagant ja lükkaks selle üle õlgade ettepoole. Kandja haarab kitli ülemised otsad ja pöörab kitlit seljast äravõtmisel vasakule.

Ohutusjuhised Meie riskianalüüsi kohaselt, mis tehti standardi EN ISO 14971:2019 + A11:2021 järgi, ei ole selle toote jaoks vaja rohkem lisaohutusjuhiseid.

Kasutusest kõrvaldamine Kasutamata ja saastumata tooted võivad põletada keskkonnasõbralikult või ladestada prügilasse. Saastunud tooted tuleb olenevalt saastumisviisist kõrvaldada vastavalt kehtivatele riiklikele seadustele ja määrustele.

Säilivus 5 Viis aastat alates tootekuupäevast, kui on kasutamata ja õigesti hoiustatud.

Hoiustamine Kaitsta päikesekiirguse eest. Hoiustada kuivas keskkonnas. Mittevastav hoiustamine võib vähendada säilivust.



Jälgitavus Partii põhine jälgitavus alates vajaduste hindamisest kuni laost väljaminekuni. Toote teabeleht Versioon 2 Kehtib alates partiist 2617 +

Pakendamine

Taaskasutus Litsentseeritud vastavalt Saksa pakendiseadusele, litsentsinumber DE1618662887322. Palun viige pakend taaskasutusse.



www.wiros.de

WEB <https://www.wiros.de/shop/kittel/pppe-kittel/wiroclever-flex/>





Variant 1

Müügiühik	100 Tk/Kartong				
Pakkimistasand 1	10 Tk/Kilekott				
Tellimuse miinimumkogus	1 Kartong				
Toote number	Tootenumber	Värvus	Suurus	Suurus (U x L)	Hälve
	25304502	valge+sinine	M	≈ 120 x 104/119/134/149 cm ± 3 cm	
	25304503	valge+sinine	L	≈ 120 x 104/119/134/149 cm ± 3 cm	
GTINs	Tootenumber	Unit of Use UDI	Pakkimistasand 1 UDI	Pakkimistasand 2 UDI	Kartong UDI
	25304502	4051642004815	4051642075532	-----	4051642575537
	25304503	4051642006598	4051642075365	-----	4051642575360

Variant 2

Müügiühik	100 Tk/Kartong				
Pakkimistasand 1	10 Tk/Kilekott				
Tellimuse miinimumkogus	1 Kartong				
Toote number	Tootenumber	Värvus	Suurus	Suurus (U x L)	Hälve
	25304504	valge+sinine	XL	≈ 144 x 104/119/134/149 cm ± 3 cm	
	25304505	valge+sinine	XXL	≈ 168 x 104/119/134/149 cm ± 3 cm	
GTINs	Tootenumber	Unit of Use UDI	Pakkimistasand 1 UDI	Pakkimistasand 2 UDI	Kartong UDI
	25304504	4051642004808	4051642075303	-----	4051642575308
	25304505	4051642004792	4051642075310	-----	4051642575315

Mõõtmeid, raskust, tugevust ja hälbeid iseloomustavad arvanded on sihtväärtused ja võivad erineda.

Andmed tuginevad meie praegustele teadmistele. Need ei taga tootemaduste üldhinnangut ega põhjenda lepingujärgset õigust. Laske üle kahe aasta vanused andmed uuesti kinnitada.

Sisestusvead ja vead on reserveeritud.

Esitatud toote andmelehed on ettevõtte WIROS Wilfried Rosbach GmbH omand. WIROS Wilfried Rosbach GmbH on toote andmelehtede kõikide autori- ja kasutusõiguste omanik. Toote andmelehti pole lubatud muuta ega piktogramme kasutada. Esitatud toote andmelehti tohib kasutada ainult koos ettevõtte WIROS originaaltoodetega.



wiroCLEVER FLEX

PP + PE -TAKIT

Hihoissa ja etuosassa PE-pinnoite | Kuminauhareunat | Niskassa ja vyötäröllä solmittavat nauhat | 2 rei'itettyä erotuskohtaa (pituuden lyhentämiseksi)



PREMIUM+





Valmistaja

Yritys + Osoite	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Saksa
SRN	DE-MF-000004956
Tavaramerkki	care & serve®

Valtuutukset

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Sveitsi
--------	--

Tuotekuvaus

Kategoria	PREMIUM+
Tuotenimike	care & serve® PREMIUM+ wiroCLEVER FLEX PP + PE -takit Hihoissa ja etuosassa PE-pinnoite Kuminauhareunat Niskassa ja vyötäröllä solmittavat nauhat 2 rei'itettyä erotuskohtaa (pituuden lyhentämiseksi)
Tuotteen ominaisuudet	hihoissa ja etuosassa PE-pinnoite Kuminauhareunat Niskassa ja vyötäröllä solmittavat nauhat 2 rei'itettyä erotuskohtaa (pituuden lyhentämiseksi)

Materiaali

Materiaali	Polyeteleenillä pinnoitettu polypropeenikuitukangas
Materiaalin paino	PP: ≈ 20 g/m ² (± 2 g/m ²)

Käyttö

Käyttötarkoitus	Biologisten työmateriaalien (TRBA 250) teknisten määräysten mukaiset lääketieteelliset suojavaatteet suojaamaan työ- tai yksityisvaatteiden likaantuminen toimenpiteiden tai hoitotoimenpiteiden aikana kun ollaan suorassa kosketuksessa veren, eritteiden, eritteiden tai muun saastuneen materiaalin kanssa.
-----------------	---

Elintarvikekosketus	Lyhytaikainen, epäsuora kosketus elintarvikkeiden kanssa on sallittu.
---------------------	---

Käyttöalue	Potilaaseen ei kohdistu suoraa lääketieteellistä toimintaa. Lääketieteellinen suojavaatetus on tarkoitettu vaatteiden ja/tai hiusten suojaamiseen.
------------	--

Käyttöryhmä	Laboratorioiden, lääketeollisuuden, sairaaloiden tai vastaavien työntekijät ja vierailijat.
-------------	---

Potilasryhmä	Lääketieteelliset suojavaatetus soveltuu kaikille potilasryhmille.
--------------	--

Indikaatiot	Lääketieteellinen vaatetus suojaamaan vaatteita ja/tai hiuksia.
-------------	---

Vasta-aiheet	Ei tunnettuja vasta-aiheita.
--------------	------------------------------

Käyttöohje	Kertakäyttötuote Ei steriili
------------	---------------------------------



Rajoitukset	Ei PPE (henkilönsuojain) Ei sovellu elintarvikkeiden pakkaamiseen ja varastointiin.
-------------	--




Ohje	Kaikista vakavista tapahtumista, jotka liittyvät suoraan tähän tuotteeseen, on ilmoitettava valmistajalle ja vastuuviranomaisille.
------	--




Käyttöalueet	Sairaalat Vanhainkodit Muut alan yritykset Teollisuus Lääketeollisuus Laboratoriot Elintarvikkeiden jalostus HACCP Puhdistus Hygienia
--------------	--







Materiaalin lisätiedot	Lateksiton	
Terveysteen liittyviä tietoja	<p>Ihoärsytysten tai allergisten reaktioiden tapauksessa lopeta käyttö heti ja neuvottele lääkärisi kanssa.</p> <p>Sikäli kuin tekniikan uusimman tason mukaan tiedetään, tuotteet eivät sisällä myrkyllisiä, karsinogeenisiä, mutageenisia tai lisääntymiselle vaarallisia aineita, jos niitä käytetään käyttötarkoituksen mukaisesti.</p> <p>Nämä tuotteet eivät sisällä lateksiainesosia, ja ne ovat hypoallergeenisia. Ne voivat kuitenkin aiheuttaa ärsytyksiä herkällä iholla. Pitkään käytettäessä ihon ilmanvaihto voi rajoittua, mikä voi johtaa ihoärsytyksiin.</p>	


Standardit

CE-merkintä	Asetuksen EU 2017/745 mukainen lääkinnällinen tuote		
SRN	DE-MF-000004956		
Basis UDI DI	4051642-wiroCLEVERFLEX-X5		
	CE-merkintä CE-merkintä takaa tuotteiden ja tavaroiden vapaan liikkuvuuden Euroopan yhteisössä. CE-merkitty tuote täyttää sovellettavien eurooppalaisten määräysten perusvaatimukset.		
VO (EU) 2023/988	Yleisestä tuoteturvallisuudesta annettu asetus (EU) N:o 2023/988		
VO (EG) 1935/2004	Muovista valmistettujen, elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia materiaaleja ja esineitä koskeva määräys		
VO (EU) 10/2011	Asetus elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista muovisista materiaaleista ja tarvikkeista		

Käyttö

Käyttöohje	<p>Ennen käyttöä</p> <p>Varmista, että olet valinnut tarpeisiisi ja käyttöalueisiisi sopivan tuotteen. Älä käytä lääketieteellisiä suojavaatteita, mikäli ne ovat viallisia tai niitä on jo käytetty. Lääketieteelliset suojavaatteet on tarkoitettu lyhytkestoiseen käyttöön, lääketieteellisellä alalla käyttö on rajoitettu yhteen potilaaseen.</p> <p>Käyttö</p> <p>Essun suljettu puoli tulee eteen ja se suljetaan takaa tai sivulta. Pujota kädet hihoihin ja sulje niskan ja vyötärön solmittavat nauhat.</p> <p>Vaatteiden kontaminoitumisen estämiseksi riisuutumisen yhteydessä suositellaan, että toinen henkilö avaa essun selkäpuolelta ja liu'uttaa sen eteenpäin olkapäiden yli. Essun käyttäjä ottaa kiinni essun yläreunoista ja kääntää essun nurinpäin sen riisuessaan.</p>		
Turvallisuusohjeet	Standardin EN ISO 14971:2019 + A11:2021 mukaan tehdyn riskianalysimme perusteella tälle tuotteelle ei tarvita lisäturvaohjeita.		
Hävittäminen	Käyttämättömät ja kontaminoitumattomat tuotteet voidaan polttaa ympäristöä säästävällä tavalla tai toimittaa kaatopaikalle. Kontaminoituneet tuotteet täytyy hävittää kontaminoitumistavan mukaan voimassa olevia kansallisia lakeja ja määräyksiä noudattaen.		
Säilyvyysaika	5 vuotta valmistuspäivästä, mikäli tuote on käyttämätön ja varastoitu oikein.		
Varastointi	Suojaa auringonvalolta. Säilytettävä kuivassa. Epäasianmukainen varastointi voi lyhentää säilyvyysaika.		
Jäljitettävyys	Eräkohtainen jäljitettävyys tarvearvioinnista aina varastosta poistumiseen. Tuotetietolehti Versio 2 voimassa alkaen erästä 2617 +		

Pakkaus

Kierrätys	Lisensoitu Saksan pakkauslain (VerpackG) mukaisesti, lisenssinumero DE1618662887322. Toimita pakkaus kierrätykseen.	
-----------	--	---

www.wiros.de

WEB	https://www.wiros.de/shop/kittel/pppe-kittel/wiroclever-flex/
-----	---





Vaihtoehdot 1

Myyntiyksikkö	100 Kappale/Pahvilaatikko				
Pakkaustaso 1	10 Kappale/Muovipussi				
Minimitilausmäärä	1 Pahvilaatikko				
tuotenumero	Tuotenumero	Väri	Koko	Koko (L x P)	Toleranssi
	25304502	valkoinen+sininen	M	≈ 120 x 104/119/134/149 cm ± 3 cm	
	25304503	valkoinen+sininen	L	≈ 120 x 104/119/134/149 cm ± 3 cm	
GTINs	Tuotenumero	Unit of Use UDI	Pakkaustaso 1 UDI	Pakkaustaso 2 UDI	Pahvilaatikko UDI
	25304502	4051642004815	4051642075532	-----	4051642575537
	25304503	4051642006598	4051642075365	-----	4051642575360

Vaihtoehdot 2

Myyntiyksikkö	100 Kappale/Pahvilaatikko				
Pakkaustaso 1	10 Kappale/Muovipussi				
Minimitilausmäärä	1 Pahvilaatikko				
tuotenumero	Tuotenumero	Väri	Koko	Koko (L x P)	Toleranssi
	25304504	valkoinen+sininen	XL	≈ 144 x 104/119/134/149 cm ± 3 cm	
	25304505	valkoinen+sininen	XXL	≈ 168 x 104/119/134/149 cm ± 3 cm	
GTINs	Tuotenumero	Unit of Use UDI	Pakkaustaso 1 UDI	Pakkaustaso 2 UDI	Pahvilaatikko UDI
	25304504	4051642004808	4051642075303	-----	4051642575308
	25304505	4051642004792	4051642075310	-----	4051642575315

Mittoja, painoja, vahvuuksia ja toleransseja koskevat luvut ovat ohjearvoja ja voivat poiketa todellisista arvoista.

Annetut tiedot perustuvat tämänhetkisiin tietoihimme. Ne eivät kuitenkaan anna takuuta tuotteen ominaisuuksista eivätkä aikaansaa sopimuksellista oikeussuhdetta. Jos tiedot ovat yli kaksi vuotta vanhoja, pyydä niille vahvistus.

Mahdollisuus näppäily- ja muihin virheisiin varataan.

Saatavilla olevat tuotteen tietolehdet ovat WIROS Wilfried Rosbach GmbH:n omaisuutta. WIROS Wilfried Rosbach GmbH omistaa kaikki tuotteen tietolehtien tekijän-, käyttö- ja hyödyntämisoikeudet. Tuotteen tietolehtien muuttaminen tai piktogrammien käyttäminen on kielletty. Saatavilla olevia tuotteen tietolehtiä saa käyttää vain yhdessä alkuperäisten WIROS-tuotteiden kanssa.

